



wiroMICROGRIP PF

[de]	Produktdatenblatt LATEX HANDSCHUHE	Seite 2
[en]	Product data sheet LATEX GLOVES	Page 8
[nl]	Productgegevensformulier LATEX HANDSCHOENEN	Zijde 14
[fr]	Fiche produit GANTS EN LATEX	Page 20
[es]	Hoja de datos del producto GUANTES DE LÁTEX	Página 26
[it]	Scheda prodotto GUANTI IN LATTICE	Pagina 32
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ	Σελίδα 38
[tr]	Ürün Bilgi Formu LATEKS ELDIVENLER	Sayfa 44
[ru]	Техническая спецификация ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ	Страница 49
[pl]	Karta produktu RĘKAWICE LATEKSOWE	Strona 55
[da]	Produktdatablad LATEX-HANDSKER	Side 60
[sv]	Produktdatablad LATEXHANDSKAR	Sida 65
[no]	Produktdatablad LATEX-HANSKER	Side 70
[cs]	Informační list výrobku LATEXOVÉ RUKAVICE	Strana 75
[hu]	Termékadatlap LATEX VÉDŐKESZTYŰ	Oldal: 80
[sk]	Informačný list výrobku LATEXOVÉ RUKAVICE	Strana 85
[sl]	Podatkovni list izdelka ROKAVICE IZ LATEKSA	Stran 90
[ro]	Fișa produsului MÂNUȘI DIN LATEX	Pagina 95
[pt]	Folha de dados do produto LUVAS DE LÁTEX	Página 100
[lt]	Gaminio duomenų lapas LATEKSO PIRŠTINĖS	Puslapis 105
[lv]	Produkta datu lapa LATEKSA CIMDI	Lappuse 110
[bg]	Информационен лист за продукта ЛАТЕКСОВИ РЪКАВИЦИ	Страница 115
[uk]	Технічний лист ЛАТЕКСНІ РУКАВИЧКИ	Сторінка 120
[et]	Toote teabeleht LATEXSKINDAD	Lk 125
[fi]	Tuotetietolehti LATEKSIKÄSINEET	Sivu 130





LATEX HANDSCHUHE

Puderfrei | Micro-texturiert

i* Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.



PREMIUM





Hersteller

Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmarke	care & serve®

Bevollmächtigungen

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

Produktbeschreibung

Kategorie	PREMIUM
Produktbezeichnung	care & serve® PREMIUM wiroMICROGRIP PF Latex Handschuhe Puderfrei Micro-texturiert i* Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.
Produkteigenschaften	Puderfrei Micro-texturiert



Material

Material	Naturlatex
Materialstärke	Finger: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Handfläche: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Rand: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Materialgewicht	Größe M $\approx 5,8$ g/St. ($\pm 0,2$ g)

Verwendung

Verwendungszweck	Einweg-Schutzhandschuh zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen zwischen Anwender/-innen und Patienten/Patientinnen bei der Durchführung von medizinischen Untersuchungen sowie zur Verhinderung, dass die Oberfläche der Hände mit gesundheitsgefährdenden Stoffen und Gemischen oder mit schädlichen biologischen Wirkstoffen in Berührung kommt. Die Schutzhöhe sowie die maximale Tragedauer ergeben sich aus der ermittelten Leistungsstufe je geprüfem Stoff.
Lebensmittelkontakt	Ein kurzzeitiger indirekter Kontakt mit Lebensmitteln ist zulässig.
Anwendungsbereich	Handschuhe werden verwendet, um eine Kontamination der Hände des medizinischen Personals zu verhindern.
Anwendungsgruppe	Die Verwendung ist auf entsprechend ausgebildete Fachkräfte beschränkt. Nicht geeignet für Anwender mit einer Latexallergie.
Patientengruppe	Nicht geeignet für Patienten mit einer Latexallergie. Die Verwendung von Latex Handschuhen in der Neonatalpflege wird nicht empfohlen um eine Sensibilisierung zu verhindern.
Indikation	Handschuhe werden verwendet, um eine Kontamination der Hände des medizinischen Personals zu verhindern, 1) bei direktem Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten, Schleimhäuten, nicht intakter Haut und anderem potenziell infektiösem Material 2) bei direktem Kontakt mit Patienten, die mit Erregern kolonisiert oder infiziert sind, die über den Kontaktweg übertragen werden, z. B. VRE, MRSA, RSV, oder 3) bei Handhabung oder Berührung von sichtbar oder potenziell kontaminierten Patientenpflegegeräten und Umgebungsoberflächen.
Kontraindikation	Latex kann zu allergischen Reaktionen und Sensibilisierung führen.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril



Einschränkung	Die Feststellung der Anwendungseignung und/oder Anwendungsdauer von care & serve® Produkten liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für eine unsachgemäße Verwendung von care & serve® Produkten. Bei einer bekannten Latexallergie, dieses Produkt bitte nicht verwenden. Sofern eine Risikoanalyse zu dem Ergebnis geführt hat, dass der aufgeführte Schutz NICHT ausreicht, sollte Schutzkleidung mit höherem Schutzverhalten eingesetzt werden. Nicht für den Gebrauch mit petroleum- oder ölhaltigen Substanzen geeignet. Nicht zum Einpacken und Lagern von Lebensmitteln geeignet.
Hinweis	Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Arztpraxen Industrie Pharmaindustrie Labor Nahrungsmittelverarbeitung HACCP Service Gastronomie HoReCa Reinigung Hygiene Kosmetik Wellness Schönheitsindustrie Haus + Garten Landwirtschaft Bauwesen
Gesundheitshinweis	Enthält Naturkautschuklatex, der Typ-IV- und Typ-I-Allergien auslösen kann. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen sofort die Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen. Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden.



Standards

CE-Kennzeichnung

SRN

Basis UDI DI

Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745

Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß (EU) 2016/425

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

CE-Kennzeichnung

Die CE Kennzeichnung garantiert den freien Verkehr von Produkten und Waren innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das CE-gekennzeichnete Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Europäischen Verordnungen.

EN ISO 21420:2020

Norm über Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

Test	Ergebnis
ph-Wert	Bestanden
Beweglichkeit	5
Mindestlänge	Länge
Größe 7: 230 mm	≈ 240 mm
Größe 8: 240 mm	≈ 240 mm
Größe 9: 250 mm	≈ 240 mm
Größe 10: 260 mm	≈ 240 mm

Informationen

Produktinformationen und Gebrauchsanweisung beachten.

EN 455-1:2022

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 1: Anforderungen und Prüfung auf Dichtheit

Wasserhalteprüfung	Ergebnis
Dichtheit	AQL 1.5

EN 455-2:2015

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 2: Anforderungen und Prüfung der physikalischen Eigenschaften

Mindestlänge	Länge
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Ergebnis
Reißkraft	Bestanden

CE

2777

MD

CLASS I

PPE

CAT. III

www.dofp.it

www.wiro.dofp.it

AQL

1.5



EN 455-3:2015

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 3: Anforderungen und Prüfung für die biologische Bewertung

Test	Ergebnis
Puderrückstände	< 2 mg
Extrahierbare Proteine	< 50 µg/g



Informationen

i* Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

Eine deutliche Kennzeichnung, ob der Handschuh gepudert oder puderfrei ist, ist obligatorisch.

EN 455-4:2009

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 4: Anforderungen und Prüfung zur Bestimmung der Mindesthaltbarkeit

Test	Ergebnis
Haltbarkeit	3

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Norm über Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken



Prüfchemikalie	Level
K Natriumhydroxid 40 %	4
P Wasserstoffperoxid 30 %	2
T Formaldehyd 37 %	3

Informationen

Durchbruchzeiten je Leistungsstufe: Stufe 1 > 10 Min. | Stufe 2 > 30 Min. | Stufe 3 > 60Min. | Stufe 4 > 120 Min. | Stufe 5 > 240 Min. | Stufe 6 > 480 Min.

Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien.

Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden (ausgenommen ist der Fall, bei dem der Handschuh 400 mm oder länger ist – in diesem Fall wird ebenfalls die Stulpe getestet) und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können.

Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist.

Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen.

Nur für die einmalige Verwendung bestimmt, nicht wiederverwenden.

EN ISO 374-2:2019

Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration

Test	Ergebnis
Luft-Leck-Prüfung	Bestanden

EN ISO 374-4:2019

Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 4: Bestimmung des Widerstandes gegen Degradation durch Chemikalien

Prüfchemikalie	Degradation %
K Natriumhydroxid 40 %	-32,8
P Wasserstoffperoxid 30 %	-6,5
T Formaldehyd 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Norm über Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen



Test	Ergebnis
Schutz vor Bakterien und Pilzen	Bestanden
Schutz vor Viren, Bakterien und Pilze	Bestanden

Informationen

Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen beurteilt und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Proben.

VO (EU) 2023/988

Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit

VO (EG) 1935/2004

Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen



VO (EU) 10/2011

Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen



Anwendung

Gebrauchsanweisung	Vor dem Gebrauch Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Latex enthält. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben und beachten Sie die Vorgaben der jeweiligen Normen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten Ihres Einweg-Schutzhandschuhs. Bitte tragen Sie den Einweg-Schutzhandschuh nicht, wenn er Mängel aufweist oder bereits benutzt wurde. Einweg-Schutzhandschuhe sind bei Arbeiten mit leichten Chemikalien nur für einen kurzzeitigen Gebrauch vorgesehen. Handhabung Bitte wählen Sie die für Sie passende Größe. Der Einweg-Schutzhandschuh schützt den mit ihm abgedeckten Bereich. Sollte ein persönlicher Schutz anderer Körperteile oder der Atemwege notwendig sein, ergänzen Sie weitere PSA-Produkte und verwenden Sie nur PSA, die für den vorgesehenen Einsatz freigegeben sind. Sollte ein medizinischer Schutz anderer Körperteile oder der Atemwege notwendig sein, ergänzen Sie weitere Medizinprodukte und verwenden Sie nur Medizinprodukte, die für den vorgesehenen Einsatz freigegeben sind. Sie sind allein verantwortlich für die richtige Kombination zusätzlicher PSA oder zusätzlicher Medizinprodukte und die Einhaltung der notwendigen Vorgaben der Normen je Einsatzzweck. Bestimmen Sie allein verantwortlich die Nutzungsdauer beim jeweiligen Einsatz unter Berücksichtigung von Schutzwirkung und Tragekomfort. Im medizinischen Bereich ist die Nutzung auf einen Patienten/Patientin begrenzt. Nach Kontamination kann eine Veränderung der angegebenen Leistungsstufen nicht ausgeschlossen werden. Überprüfen Sie auch während der Verwendung regelmäßig, ob der Artikel unversehrt ist. Tauschen Sie einen beschädigten Einweg-Schutzhandschuh umgehend gegen einen intakten aus. Bei Verunreinigungen oder Beschädigungen sollte der Einweg-Schutzhandschuh ausgezogen und ordnungsgemäß entsorgt werden. Achtung: Sofortiger Anwendungsstopp bei möglichen allergischen Reaktionen. Waschen Sie Ihre Hände gründlich und suchen Sie gegebenenfalls medizinische Hilfe auf.
Sicherheitshinweis	Enthaltenes Naturlatex kann allergische Reaktionen verursachen.
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	3 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	Vor starker Hitze, Sonneneinstrahlung, Frost, Feuchtigkeit, Ozon, Röntgenstrahlen und ultravioletem Licht schützen. Trocken lagern. Lagertemperatur zwischen 10 °C und 40 °C. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 3 gültig ab Charge 2617 +



Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Variante 1

Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton
Verpackungsebene 1	100 Stück/Spender
Mindestbestellmenge	1 Karton



Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (B x L)	Toleranz
	40351401	weiß	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	weiß	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	weiß	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	weiß	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.





wiroMICROGRIP PF

LATEX GLOVES

Powder free | Micro-textured

i* This product contains natural rubber latex, which can cause allergic reactions including anaphylactic reactions.



PREMIUM





Manufacturer

Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
SRN	DE-MF-000004956
Trademark	care & serve®

Authorisation

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Switzerland
--------	--

Product description

Category	PREMIUM
Product description	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Latex gloves Powder free Micro-textured i* This product contains natural rubber latex, which can cause allergic reactions including anaphylactic reactions.

Product features	Powder free Micro-textured
------------------	-------------------------------



Material

Material	Natural latex
Thickness	Finger: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Palm: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Hand edge: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Material weight	Size M $\approx 5,8$ g/pc. ($\pm 0,2$ g)

Application

Intended use	Disposable protective glove to avoid cross-contamination between users and patients when performing medical examinations, and to prevent the surface of the hands from coming into contact with substances, mixtures, or harmful biological agents that are hazardous to health. The level of protection and the maximum wearing time come from the determined performance level for each material tested.
Contact with food produce	Short-term indirect contact with foodstuffs is permitted.
Scope of application	Gloves are used to prevent contamination of the hands of medical staff.
Application group	Use is restricted to appropriately trained professionals. Not suitable for users with a latex allergy.
Patient group	Not suitable for patients with a latex allergy. The use of Latex gloves in neonatal care is not recommended in order to prevent sensitisation.
Indication	Gloves are used to prevent contamination of the hands of medical personnel, 1) in case of direct contact with blood or body fluids, mucous membranes, non-intact skin and other potentially infectious material. 2) in direct contact with patients colonised or infected with pathogens transmitted by the contact route, e.g. VRE, MRSA, RSV; or 3) when handling or touching visibly or potentially contaminated patient care equipment and environmental surfaces.
Contraindication	Latex can cause allergic reactions and sensitisation.
Notes on use	Disposable product Not sterile





Limitation	It is the sole responsibility of the user to determine the suitability and/or duration of use of care & serve® products for their intended use. The manufacturer assumes no responsibility for the improper use of care & serve® products. If you have a known allergy to latex, please do not use this product. If a risk analysis has deemed that the protection listed above is NOT sufficient, protective clothing with higher protective properties should be used. Not suitable for use with substances which contain petroleum or oil. Not suitable for packing or storing food.		
Note	All serious incidents directly related to this product must be reported to the manufacturer and the competent authorities.		
Application areas	Hospital Old people's home inc. specialist circles Medical practices Industry Pharmaceutical industry Laboratory Food processing HACCP Service Food & drink Hospitality Cleaning Hygiene Cosmetics Wellness Beauty industry House + Garden Agriculture Construction Industry		
Health advice	Contains natural rubber latex that can cause type IV and type I allergies. If skin irritation or allergic reactions occur, discontinue use immediately and seek medical advice. As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic, mutagenic or reproductively toxic substances when used in accordance with their intended use.		

Standards

CE marking

SRN

Basis UDI DI

Class I medical device in accordance with EU 2017/745

Personal protective equipment category III in accordance with Regulation (EU) 2016/425

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

CE marking

The CE mark guarantees the free movement of products and goods within the European Economic Community. All products with the CE mark comply with the essential requirements of the European regulations specified.

CE 2777

MD CLASS I

PPE CAT. III

EN ISO 21420:2020

Standard: Protective gloves - General requirements and test methods

Test	Result
pH value	Passed
Mobility	5
Minimum length	Length
Size 7: 230 mm	≈ 240 mm
Size 8: 240 mm	≈ 240 mm
Size 9: 250 mm	≈ 240 mm
Size 10: 260 mm	≈ 240 mm

Information

Observe the product information and instructions for use.



www.wiros.de/IFI

EN 455-1:2022

Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes

Water retention test	Result
Seal tightness	AQL 1.5

AQL 1.5

EN 455-2:2015

Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties

Minimum length	Length
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Result
Tensile strength	Passed



EN 455-3:2015

Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

Test	Result
Powder residues	< 2 mg
Extractable proteins	< 50 µg/g



Information

i* This product contains natural rubber latex, which can cause allergic reactions including anaphylactic reactions.

Clear labelling of whether the glove is powdered or powder-free is mandatory.

EN 455-4:2009

Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination

Test	Result
Shelf life	3

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Standard: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks.

Test chemical	Level
K Sodium Hydroxide 40%	4
P Hydrogen Peroxide 30 %	2
T Formaldehyde 37%	3



Information

Breakthrough time: Level 1 > 10 min. | Level 2 > 30 min. | Level 3 > 60 min. | Level 4 > 120 min. | Level 5 > 240 min. | Level 6 > 480 min.

This information does not specify the actual protection duration in the workplace and does not distinguish between mixtures and pure chemicals.

The resistance to chemicals is assessed under laboratory conditions using samples only taken from the palm of the hand (except where the glove measures 400 mm or longer - in this case, the cuff is also tested), and applies only to the tested chemicals. The resistance can alter when the chemicals are used in a mixture.

We recommend checking whether the gloves are suitable for the intended application, as the conditions at the workplace can vary from those in the type test depending on the temperature, abrasion and degradation.

If protective gloves are already in use, these can offer reduced resistance to dangerous chemicals due to changes in their physical properties. Degradation caused by contact with chemicals, movements pulling threads, rubbing, etc. can considerably reduce the actual duration of use. Degradation can be the most important factor with aggressive chemicals, which must be taken into consideration when selecting chemical-resistant gloves.

The gloves must be checked for flaws or defects before use.

For single use only, do not reuse.

EN ISO 374-2:2019

Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 2: Determination of resistance to penetration

Test	Result
Air penetration test	Passed

EN ISO 374-4:2019

Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals

Test chemical	Degradation %
K Sodium Hydroxide 40%	-32,8
P Hydrogen Peroxide 30 %	-6,5
T Formaldehyde 37%	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Standard: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organism risks

Test	Result
Protection against bacteria and fungi	Passed
Protection against bacteria, fungi and viruses	Passed



Information

The penetration resistance is assessed under laboratory conditions and refers solely to the tested samples.

VO (EU) 2023/988

Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety

VO (EG) 1935/2004

Regulation regarding plastic materials and articles intended to come into contact with food.



VO (EU) 10/2011

Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food





Use

Instructions for use

Before use

Please note that this product contains latex. Please make sure that you have selected the correct product for your requirements and application areas, and observe the requirements set out in the respective standards. Should you have any questions, please consult the supplier of your disposable protective gloves. Please do not wear the disposable protective gloves if they show visible defects or have already been used. Disposable protective gloves are only intended for short-term use when working with light chemicals.

Use

Please select the correct size for you.

The disposable protective gloves protect the area they cover. If protection is required for a different part of the body or the respiratory system, use additional PPE products and, for each application, only use the PPE approved for that intended purpose. If medical protection is required for a different part of the body or the respiratory system, use additional medical products and, for each application, only use the medical products approved for that intended purpose. The user is solely responsible for the correct combination of additional PPE or medical products and compliance with the necessary requirements of the standards for each application. You alone are responsible for the duration of use during the respective application, while taking into consideration the protective effect and wear comfort. In the medical sector, use is limited to one patient. An alteration in the given protection level cannot be excluded following contamination. Also check regularly during use that the item is intact. Replace a damaged disposable protective glove with an intact one immediately. Remove the disposable protective glove if it is contaminated or damaged and dispose of it correctly.

Warning: In the event of a potential allergic reaction, stop using this product immediately. Wash your hands thoroughly and seek medical help if necessary.

Safety notice

Contains natural latex that can cause allergic reactions.

Disposal

Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.

Shelf life

3 years from the production date, if unused and stored correctly.

Storage

Protect from intense heat, sunlight, frost, moisture, ozone, X-rays and ultraviolet light.

Store in a dry place.

Storage temperature between 10 °C and 40 °C.

Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.



Traceability

Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing.

Product data sheet Version 3 Valid from Batch 2617 +

Packaging

Recycling

Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322.

Please recycle the packaging.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/>

Variant 1

Sales unit

1000 Unit/Cardboard box

Packaging level 1

100 Unit/Dispenser box

Minimum order quantity

1 Cardboard box

Item numbers

Item number	Colour	Size	Size (W x L)	Tolerance
40351401	white	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
40351402	white	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
40351403	white	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
40351404	white	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm



wiroMICROGRIP PF



GTINs	Item number	Unit of Use UDI	Packaging level 1 UDI	Packaging level 2 UDI	Cardboard box UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.
The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years.
Typographical and other errors excepted.
The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.





LATEX HANDSCHOENEN

Poedervrij | Micro-opgeruwd

i* Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties of anafylactische reacties kan uitlokken.



PREMIUM





Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmerk	care & serve®

Autorisaties

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Zwitserland
--------	--

Productbeschrijving

Categorie	PREMIUM
Productomschrijving	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Latex handschoenen Poedervrij Micro-opgeruwd i* Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties of anafylactische reacties kan uitlokken.

Producteigenschappen	Poedervrij Micro-opgeruwd
----------------------	------------------------------



Materiaal

Materiaal	natuurlijke latex
Sterkte materiaal	Vinger: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Handpalm: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Rand: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Materiaalgewicht	Maat M $\approx 5,8$ g/st. ($\pm 0,2$ g)

Gebruik

Toepassing	Wegwerphandschoenen om kruisbesmetting tijdens medisch onderzoek tussen gebruiker/gebruikster en patiënt te vermijden en om te voorkomen dat het oppervlakte van de hand in aanraking komt met stoffen en mengsels die een gevaar voor de gezondheid vormen of met schadelijke biologisch werkzame stoffen. De beschermingsgraad en de maximale draagduur zijn het resultaat van het verkregen prestatieniveau van elke gecontroleerde stof.
Voedselcontact	Kort indirect contact met voedingsmiddelen is toegestaan.
Toepassingsgebied	Handschoenen worden gebruikt om besmetting van de handen van medisch personeel te voorkomen.
Doelgroep	Het gebruik is voorbehouden aan voldoende geschoold en gespecialiseerd personeel. Niet geschikt voor gebruikers met een latexallergie.
patiëntengroep	Niet geschikt voor patiënten met een latexallergie. Het gebruik van latex handschoenen in de neonatale zorg wordt afgeraden om overgevoeligheid te voorkomen.
indicatie	Handschoenen worden gebruikt om besmetting van de handen van medisch personeel te voorkomen, 1) in direct contact met bloed of lichaamsvloeistoffen, slijmvliezen, niet-intacte huid en ander potentieel besmettelijk materiaal 2) in direct contact met patiënten die zijn gekoloniseerd of geïnfecteerd met pathogenen die via de contactroute worden overgedragen, b.v. B. VRE, MRSA, RSV of 3) bij het hanteren of aanraken van zichtbaar of mogelijk besmette apparatuur voor patiëntenzorg en omliggende oppervlakken.
contra-indicatie	Latex kan leiden tot allergische reacties en overgevoeligheid.
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct niet steriel



Voorbehoud/bepanking

Het bepalen of producten van care & serve® geschikt zijn voor bepaalde toepassingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De fabrikant kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het ondeskundige gebruik van producten van care & serve®.

Indien u een latexallergie heeft, mag u dit product niet gebruiken.

Indien een risicoanalyse heeft uitgewezen dat de vermelde bescherming NIET voldoet, moet gebruik worden gemaakt van beschermende kleding met een hogere beschermingsgraad.

Niet geschikt voor gebruik met olie of oliehoudende substanties.


Niet geschikt voor het verpakken en opslaan van levensmiddelen.

Aanwijzing

Alle ernstige incidenten in direct verband met dit product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten.

Toepassingsgebieden

ziekenhuis | verzorgingshuis | o.a. specialisten
Medische praktijken
Industrie | farmaceutische industrie
Laboratorium
Voedingsmiddelverwerking
HACCP
service | gastronomie | horeca
Schoonmaken | hygiëne
cosmetica | wellness | schoonheidsindustrie
Huis en tuin | Landbouw | Bouw

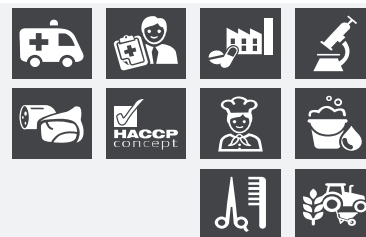

Gezondheidsinformatie

Bevat natuurlijk rubberlatex, dat allergieën van type IV en type I kan veroorzaken.

Bij huidirritatie of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken en een arts raadplegen.

Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende, mutagene of voor de reproductie giftige stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel.

Standards

CE-markering

Geneeskundig product dat behoort tot klasse I overeenkomstig EU 2017/745
Persoonlijke beschermingsbenodigdheden in de categorie III volgens (EU) 2016/425

SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

CE-markering

De CE-markering garandeert het vrije verkeer van producten en goederen binnen de Europese Economische Gemeenschap. Het CE-gemarkeerde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde Europese verordeningen.



EN ISO 21420:2020

Norm voor beschermhandschoenen - algemene eisen en testmethoden

Test	Resultaat
pH-waarde	Doorstaan
Beweeglijkheid	5
Minimum lengte	Lengte
Maat 7: 230 mm	≈ 240 mm
Maat 8: 240 mm	≈ 240 mm
Maat 9: 250 mm	≈ 240 mm
Maat 10: 260 mm	≈ 240 mm

Informatie

De productinformatie en gebruiksaanwijzing dienen in acht te worden genomen.



EN 455-1:2022

Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten

Waterdichtheidstest	Resultaat
Dichtheid	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 2: Eisen en beproeving voor fysische eigenschappen

Minimum lengte	Lengte
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Resultaat
Scheurkracht	Doorstaan





EN 455-3:2015

Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie

Test	Resultaat
Poederresiduen	< 2 mg
Extraheerbare proteïnen	< 50 µg/g



Informatie

i* Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties of anafylactische reacties kan uitlokken.

Een duidelijke aanduiding of de handschoen gepoederd of poedervrij is, is verplicht.

EN 455-4:2009

Medische handschoenen voor eenmalig gebruik - Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag

Test	Resultaat
Houdbaarheid	3

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Norm over beschermhandschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - deel 1: Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico's.



Proefchemicalie	Level
K Natriumhydroxide 40%	4
P Waterstofperoxide 30%	2
T Formaldehyde 37%	3

Informatie

Doorbreektijd: Level 1 > 10 min. | Level 2 > 30 min. | Level 3 > 60 min. | Level 4 > 120 min. | Level 5 > 240 min. | Level 6 > 480 min.

Deze informatie doet geen mededelingen over de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en over het verschil tussen gemengde en zuivere chemicaliën.

Het weerstandsvermogen tegen chemicaliën is in een laboratorium aan de hand van monsters beoordeeld, die alleen van de binnenkant van de hand genomen zijn (met uitzondering van handschoenen van 400 mm of langer - in dat geval wordt ook de kap getest) en is alleen van toepassing op de geteste chemicaliën. Het weerstandsvermogen kan anders zijn als de chemicaliën in een mengsel worden gebruikt.

Wij raden aan om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het geplande gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie kunnen afwijken van de handschoenen uit de test.

Als de beschermhandschoenen al eerder zijn gebruikt, is het mogelijk dat de bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën op grond van veranderingen in de fysische eigenschappen is afgenomen. Door bij aanraking met chemicaliën veroorzaakte degradatie, bewegingen, draderig worden, wrijving enz. kan de werkelijke gebruiksperiode wezenlijk worden gereduceerd. Bij agressieve chemicaliën kan de degradatie de belangrijkste factor zijn die bij de keuze van tegen chemicaliën bestendige handschoenen in aanmerking moet worden genomen.

Voor gebruik dienen de handschoenen op mogelijke fouten of gebreken te worden gecontroleerd.

Uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken.

EN ISO 374-2:2019

Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 2: Bepaling van de bestandheid tegen permeatie

Test	Resultaat
Luchttestcontrole	Doorstaan

EN ISO 374-4:2019

Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen degradatie door chemicaliën

Proefchemicalie	Degradatie in procenten
K Natriumhydroxide 40%	-32,8
P Waterstofperoxide 30%	-6,5
T Formaldehyde 37%	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Norm over beschermhandschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - deel 5: Terminologie en prestatie-eisen voor risico's door micro-organismen



Test	Resultaat
Bescherming tegen bacteriën en schimmels	Doorstaan
Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen	Doorstaan

Informatie

De weerstand tegen doordringing is in een laboratorium beoordeeld en heeft uitsluitend betrekking op de geteste monsters.

VO (EU) 2023/988

Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid

VO (EG) 1935/2004

Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen.



VO (EU) 10/2011

Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen

Gebruik

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik

Let op: dit product bevat latex. Zorg ervoor dat u het passende product heeft gekozen voor uw behoeften en toepassingsgebieden en houd u aan de aangegeven normen. Bij vragen kunt u zich richten tot de leveranciers van uw beschermende wegwerphandschoenen.

Draag de wegwerphandschoenen niet als ze onvolkomenheden vertonen of al een keer zijn gebruikt. Beschermende wegwerphandschoenen kunnen slechts korte tijd worden gebruikt bij werkzaamheden met lichte chemicaliën.

Gebruik

Gebruik de voor u passende maat.

De beschermende wegwerphandschoenen beschermt de afgedekte huid. Indien persoonlijke bescherming van andere lichaamsdelen of van de luchtwegen nodig is, vormen ze een aanvulling op andere PSA-producten; gebruik alleen PSA die voor het geplande gebruik ter beschikking zijn gesteld. Indien medische bescherming van andere lichaamsdelen of van de luchtwegen nodig is, vormen ze een aanvulling op andere medische producten; gebruik alleen medische producten die voor het geplande gebruik ter beschikking zijn gesteld. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste combinatie van extra PSA-producten of extra medische producten en dient zich aan de voor het gebruiksdoel noodzakelijke richtlijnen van de normen te houden. U bepaalt op eigen verantwoording de gebruiksduur bij het desbetreffende gebruik, met inachtneming van de beschermende werking en het draagcomfort. Voor medisch gebruik is het gebruik begrenst tot 1 patiënt. Na contaminatie kan een verandering van de aangegeven prestatieniveaus niet worden uitgesloten. Controleer ook tijdens het gebruik regelmatig of het artikel niet is beschadigd. Ruil een beschadigde beschermende wegwerphandschoen om tegen een onbeschadigde. Bij verontreiniging of beschadigingen dient de beschermende handschoen te worden uitgetrokken en volgens de voorschriften te worden verwijderd.

Let op: Bij mogelijke allergische reacties het gebruik van het product direct stoppen. Was uw handen zorgvuldig en raadpleeg indien nodig een arts.

Veiligheidsvoorschriften

Het bevat natuurlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.

Verwijdering

Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.

Houdbaarheid

3 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.

Opslag

Beschermen tegen hitte, direct zonlicht, vorst, vocht, ozon, röntgenstralen en ultraviolet licht.

Droog bewaren

Opslagtemperatuur tussen 10 °C en 40 °C.

Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.



Traceerbaarheid

Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering

Productgegevensformulier Versie 3 geldig vanaf charge 2617 +

Verpakking

Recycling

Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322.

Recycle de verpakking.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/>

Variant 1

Verkoopenheid

1000 Stuks/Doos

Verpakkingslaag 1

100 Stuks/dispenserdoos

Minimum

1 Doos

bestelhoeveelheid



Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Grootte (breedte x lengte)	Tolerantie
	40351401	wit	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	wit	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	wit	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	wit	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpakkingsniveau 1 UDI	Verpakkingsniveau 2 UDI	Doos UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden. Invoerfouten en vergissingen voorbehouden.

De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.





Fiche produit

wiroMICROGRIP PF



GANTS EN LATEX

Non poudrés | Microtexturé

i* Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant déclencher des réactions allergiques, y compris des réactions anaphylactiques.



PREMIUM





Fabricant

Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
SRN	DE-MF-000004956
Marque commerciale	care & serve®

Procurations

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suisse
--------	---

Description du produit

Catégorie	PREMIUM
Désignation du produit	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Gants en latex Non poudrés Microtexturé i* Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant déclencher des réactions allergiques, y compris des réactions anaphylactiques.
Caractéristiques du produit	Non poudrés Microtexturé



Matériau

Matériau	Latex naturel
Épaisseur du matériau	Doigts: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Paume: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Bordure: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Poids des matériaux	taille M $\approx 5,8$ g/p. ($\pm 0,2$ g)

Utilisation

Usage prévu	Gant de protection à usage unique pour éviter les contaminations croisées entre les utilisateurs et les patients lors de la conduite d'examen médicaux et pour éviter que les mains entrent en contact avec des substances et des mélanges dangereux ou des substances biologiques nocives. Le degré de protection et la durée maximale de port résultent du niveau de performance défini selon la matière testée.
Contact avec les aliments	Un contact indirect de courte durée avec les aliments est autorisé.
Champ d'application	Les gants sont utilisés pour éviter la contamination des mains du personnel médical.
Groupe d'application	L'utilisation est réservée aux professionnels de santé dûment formés. Ne convient pas aux utilisateurs allergiques au latex.
Groupe de patients	Ne convient pas aux patients souffrant d'une allergie au latex. L'utilisation de gants en latex dans les soins néonataux n'est pas recommandée afin d'éviter les sensibilisations.
Indication	Des gants sont utilisés pour éviter la contamination des mains du personnel médical, 1) en contact direct avec du sang ou des liquides organiques, des muqueuses, une peau non intacte et d'autres matières potentiellement infectieuses 2) en contact direct avec des patients colonisés ou infectés par des agents pathogènes transmis par la voie de contact, par ex. B. ERV, SARM, RSV ou 3) lors de la manipulation ou du contact de l'équipement de soins du patient visiblement ou potentiellement contaminé et des surfaces environnantes.
Contre-indication	Le latex peut provoquer des réactions allergiques et des phénomènes de sensibilisation.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique Non stérile





limitation	L'utilisateur est seul responsable quant à l'adéquation des produits care & serve® avec leur utilisation. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation inadéquate des produits care & serve®. N'utilisez pas ce produit en cas d'allergie connue au latex. Si une analyse des risques a montré que la protection proposée n'est PAS suffisante, il convient d'utiliser des vêtements de protection offrant un niveau de protection plus élevé. N'est pas adapté à l'utilisation avec des substances contenant du pétrole ou de l'huile. Déconseillé pour l'emballage et le stockage d'aliments		
Remarque	Tous les incidents graves directement liés à ce produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes.		
Domaines d'utilisation	Hôpital maison de retraite autres groupes spécialisés Cabinets médicaux Industrie Industrie pharmaceutique Laboratoires Traitement des aliments HACCP Service Restauration HoReCa Nettoyage Hygiène Cosmétologie Bien être Industrie de la beauté Maison + jardin Agriculture Bâtiment		
Conseils en matière de santé	Contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des allergies de type IV et de type I. En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et demander conseil à un médecin. Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène, mutagène ou nocive pour la reproduction lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu.		

standards

Marquage CE

SRN

Basis UDI DI

Dispositif médical de classe 1 selon la norme EU 2017/745

Équipement de protection individuelle de catégorie III selon (UE) 2016/425

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

Marquage CE

Le marquage CE garantit la libre circulation des produits et des marchandises au sein de la Communauté économique européenne. Le produit marqué CE est conforme aux exigences essentielles des directives européennes spécifiées.

EN ISO 21420:2020

Norme sur les gants de protection - Exigences générales et procédures d'essai

Test	Résultat
Valeur pH	Réussi
Mobilité	5
Longueur minimale	Longueur
Taille 7 : 230 mm	≈ 240 mm
Taille 8 : 240 mm	≈ 240 mm
Taille 9 : 250 mm	≈ 240 mm
Taille 10 : 260 mm	≈ 240 mm

Informations

Respecter les informations sur le produit ainsi que le mode d'emploi.

EN 455-1:2022

Gants médicaux à usage unique - Partie 1 : Exigences et tests d'étanchéité

Test de rétention d'eau	Résultat
Étanchéité	AQL 1.5

AQL

1.5

EN 455-2:2015

Gants médicaux à usage unique - Partie 2 : Exigences et essais relatifs aux propriétés physiques

Longueur minimale	Longueur
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Résultat
Résistance à la déchirure	Réussi





EN 455-3:2015

Gants médicaux à usage unique - Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique

Test	Résultat
Résidus de poudre	< 2 mg
Protéines extractibles	< 50 µg/g



Informations

i* Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant déclencher des réactions allergiques, y compris des réactions anaphylactiques.

Un étiquetage clair indiquant si le gant est poudré ou non est obligatoire.

EN 455-4:2009

Gants médicaux à usage unique - Partie 4 : Exigences et essais pour la détermination de la durabilité minimale

Test	Résultat
Durabilité	3

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Norme sur les gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques



Substance chimique de test	Niveau
K Hydroxyde de sodium 40 %	4
P Peroxyde d'hydrogène 30 %	2
T Formaldéhyde 37 %	3

Informations

Temps de passage : Niveau 1 > 10 min | Niveau 2 > 30 min | Niveau 3 > 60 min | Niveau 4 > 120 min | Niveau 5 > 240 min | Niveau 6 > 480 min

Ces informations ne fournissent pas d'indications sur la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et sur la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs.

La résistance aux produits chimiques a été évaluée en laboratoire sur des échantillons prélevés uniquement dans la paume de la main (sauf dans le cas d'un gant de 400 mm ou plus - dans ce cas la manchette est également testée) et concerne uniquement les produits chimiques analysés. La résistance peut être différente si le produit chimique est utilisé dans un mélange.

Il est recommandé de vérifier si les gants conviennent à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation.

Si des gants de protection ont déjà été utilisés, ils peuvent en raison des modifications de leurs propriétés physiques offrir une moindre résistance aux produits chimiques dangereux. Les dégradations, modifications arrachements de fils, frottements, etc. causés par le contact avec des produits chimiques peuvent réduire considérablement la durée réelle d'utilisation. En cas d'utilisation de produits chimiques agressifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en considération dans le choix de gants devant résister aux produits chimiques.

Avant toute utilisation, les gants doivent être vérifiés pour détecter d'éventuels défauts ou imperfections.

Réservé à un usage unique, ne pas réutiliser.

EN ISO 374-2:2019

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration

Test	Résultat
Essais de fuite à l'air	Réussi

EN ISO 374-4:2019

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par les produits chimiques

Substance chimique de test	Dégradation %
K Hydroxyde de sodium 40 %	-32,8
P Peroxyde d'hydrogène 30 %	-6,5
T Formaldéhyde 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Norme sur les gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes



Test	Résultat
Protection contre les bactéries et les champignons	Réussi
Protection contre les bactéries, les champignons et les virus	Réussi

Informations

La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que les échantillons testés.

VO (EU) 2023/988

Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits



VO (EG) 1935/2004

Ordonnance relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.



VO (EU) 10/2011

Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Utilisation

Mode d'emploi

Avant utilisation

Attention : ce produit contient du latex. Assurez-vous d'avoir choisi le produit adapté à vos besoins et à vos domaines d'utilisation et de respecter les exigences des normes en vigueur. Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser au fournisseur de vos gants de protection à usage unique.

Veuillez ne pas porter les gants de protection à usage unique s'ils sont défectueux ou s'ils ont déjà été utilisés. Pour les travaux avec des produits chimiques légers, les gants de protection à usage unique ne sont prévus que pour une courte période d'utilisation.

Utilisation

Veuillez choisir la taille qui vous convient.

Les gants de protection à usage unique protègent la zone qu'ils couvrent. Si la protection personnelle d'autres parties du corps ou des voies respiratoires est nécessaire, il convient d'ajouter d'autres EPI et d'utiliser uniquement des EPI approuvés pour l'usage prévu. Si une protection médicale d'autres parties du corps ou des voies respiratoires est nécessaire, il convient d'ajouter d'autres dispositifs médicaux et d'utiliser uniquement des produits médicaux approuvés pour l'usage prévu. L'utilisateur est seul responsable de la bonne association d'EPI supplémentaires ou de produits médicaux supplémentaires et du respect des exigences nécessaires des normes selon l'utilisation. Vous assumez seul la responsabilité de déterminer la durée d'utilisation pour l'usage concerné, en tenant compte de l'action protectrice et du confort de port. Dans le domaine médical, l'utilisation est limitée à un(e) seul(e) patient(e). Après une contamination, une modification des niveaux de performance indiqués n'est pas à exclure. Vérifiez en outre régulièrement pendant l'utilisation que l'article est bien intact. Remplacez immédiatement des gants de protection à usage unique endommagés par des gants intacts. En cas de contamination ou de dégradation, les gants de protection à usage unique doivent être retirés et éliminés de manière appropriée.

Attention : Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de réaction allergique. Lavez-vous soigneusement les mains et consultez un médecin si nécessaire.

Consigne de sécurité

Le latex naturel qu'il contient peut provoquer des réactions allergiques.

Élimination

Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.

Durabilité

3 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.

Stockage

Protéger de la chaleur intense, du soleil, du gel, de l'humidité, de l'ozone, des rayons X et des rayons ultraviolets.

Stocker à sec.

Température de stockage entre 10 °C et 40 °C.

Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.



Traçabilité

Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock.

Fiche produit Version 3 valable à partir du lot 2617 +

Emballage

Recyclage

Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322.

Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/>

Variante 1

Unité de vente

1000 pièce/Carton

Niveau d'emballage 1

100 pièce/Distributeur

Quantité minimale commandée

1 Carton



Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Taille (l x L)	Tolérance
	40351401	blanc	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	blanc	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	blanc	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	blanc	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm

GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.



wiroMICROGRIP PF

GUANTES DE LÁTEX

Sin polvo | Microtexturado

i* Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas reacciones anafilácticas.



PREMIUM





Fabricante

Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
SRN	DE-MF-000004956
Marca registrada	care & serve®

Autorizaciones

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suiza
--------	--

Descripción del producto

Categoría	PREMIUM
Denominación del producto	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Guantes de látex Sin polvo Microtexturado i* Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas reacciones anafilácticas.
Características del producto	Sin polvo Microtexturado



Material

Material	Látex natural
Grosor del material	dedo: ≈ 0,13 mm (± 0,01 mm) palma: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm) borde: ≈ 0,08 mm (± 0,01 mm)
Peso del material	tamaño M ≈ 5,8 g/St. (± 0,2 g)

Uso

Finalidad	Guantes de protección de un solo uso para evitar la contaminación cruzada entre el usuario y el paciente al realizar exámenes médicos, como también para evitar que la superficie de las manos entre en contacto con sustancias y mezclas peligrosas para la salud o con agentes biológicos nocivos. La capacidad de protección y el tiempo de uso máximo se basan en el nivel de rendimiento evaluado según el material examinado.
Contacto con alimentos	Se admite un contacto indirecto a corto plazo con alimentos.
Campo de aplicación	Los guantes se utilizan para evitar la contaminación de las manos del personal médico.
Grupo de aplicaciones	Su uso está restringido a profesionales debidamente formados. No apto para usuarios con alergia al látex.
Grupo de pacientes	No apropiado para pacientes con alergia al látex. Se desaconseja la utilización de guantes de látex en la atención neonatal a fin de evitar una sensibilización.
Indicación	Los guantes se utilizan para evitar la contaminación de las manos del personal médico. 1) en contacto directo con sangre o fluidos corporales, membranas mucosas, piel no intacta y otros materiales potencialmente infecciosos 2) en contacto directo con pacientes colonizados o infectados con patógenos que se transmiten a través de la ruta de contacto, p. Ej. B. VRE, MRSA, RSV o 3) al manipular o tocar equipo de atención al paciente visible o potencialmente contaminado y superficies circundantes.
Contraindicación	El látex puede provocar reacciones alérgicas y sensibilidad.
Información de uso	Producto desechable sin esterilizar



Hoja de datos del producto

wiroMICROGRIP PF



Limitación	El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos care & serve®. El fabricante no asume responsabilidad alguna por el uso incorrecto de los productos care & serve®. No usar este producto si se conoce la existencia de alergia al látex. Siempre que un análisis de riesgos concluya que la protección indicada NO es suficiente, deberá utilizarse ropa de protección con mayor grado de protección. No es apto para su uso con sustancias que contengan petróleo o aceites. No es apto para empaquetar y almacenar alimentos.		
Nota	Todos los incidentes graves relacionados directamente con este producto deben informarse al fabricante y a las autoridades responsables.		
Campos de aplicación	Hospital Residencia de ancianos Otros grupos especialistas Consultas médicas Industria Industria farmacéutica Laboratorio Procesamiento de alimentos HACCP Servicio Gastronomía HoReCa Limpieza Higiene Cosméticos Bienestar Sector de la belleza Hogar + jardín Agricultura Construcción		
Mensaje de carácter sanitario	Contiene látex de caucho natural, que puede provocar alergias de tipo IV y I. En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, interrumpir inmediatamente el uso y consultar a un médico. Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista.		

Normas

Marcado CE

SRN

Basis UDI DI

Producto sanitario de clase I según UE 2017/745

Equipo de protección individual de la categoría III según UE 2016/425

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

Marcado CE

El marcado CE garantiza la libre circulación de productos y mercancías en la Comunidad Económica Europea. El producto con marcado CE cumple con los requisitos esenciales de la normativa europea especificada.

EN ISO 21420:2020

Normativa sobre guantes de protección: Requisitos generales y métodos de ensayo

Prueba	Resultado
pH	Superada
Movilidad	5
Longitud mínima	Longitud
Tamaño 7: 230 mm	≈ 240 mm
Tamaño 8: 240 mm	≈ 240 mm
Tamaño 9: 250 mm	≈ 240 mm
Tamaño 10: 260 mm	≈ 240 mm

Información

Observar las instrucciones de uso y la información del producto.

www.wiro.de/IFI

EN 455-1:2022

Guantes médicos para un solo uso - Parte 1: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros

Prueba de estanqueidad al agua	Resultado
impermeabilidad	AQL 1.5

AQL

1.5

EN 455-2:2015

Guantes médicos para un solo uso - Parte 2: Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas

Longitud mínima	Longitud
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Prueba	Resultado
Fuerza de desgarro	Superada





EN 455-3:2015

Guantes médicos para un solo uso - Parte 3: Requisitos y ensayos para la evaluación biológica

Prueba	Resultado
Restos de polvo	< 2 mg
Proteínas extraíbles	< 50 µg/g



Información

¡* Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas reacciones anafilácticas.

Es obligatorio que los guantes adviertan claramente si tienen talco o no.

EN 455-4:2009

Guantes médicos para un solo uso - Parte 4: Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil

Prueba	Resultado
Durabilidad	3

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Normativa sobre guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos - Parte 1: Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos químicos

Sustancia probada	Nivel
K Hidróxido de sodio 40 %	4
P Peróxido de hidrógeno 30 %	2
T Formaldehído 37 %	3



Información

Tiempo de penetración: Nivel 1 > 10 min. | Nivel 2 > 30 min. | Nivel 3 > 60 min. | Nivel 4 > 120 min. | Nivel 5 > 240 min. | Nivel 6 > 480 min.

Esta información no proporciona datos sobre la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni sobre la distinción entre mezclas y productos químicos puros.

La resistencia a los productos químicos se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas exclusivamente en la palma de la mano (excepto en los casos en los que el guante era de 400 mm o más largo, donde también se comprobó el puño) y se refiere únicamente a los productos químicos probados. La resistencia puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla.

Se recomienda comprobar si los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las del ensayo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación.

Si ya se han utilizado los guantes de protección, puede disminuir la resistencia a los productos químicos peligrosos debido a cambios en sus propiedades físicas. La degradación, los movimientos, la formación de hebras, la fricción, etc. derivadas del contacto con productos químicos pueden reducir significativamente el tiempo de aplicación real. En el caso de los productos químicos agresivos, puede que la degradación sea el factor que más se deba tener en cuenta al seleccionar los guantes resistentes a los productos químicos.

Los guantes deben revisarse antes de su uso para detectar cualquier defecto o fallo.

Diseñado únicamente para un solo uso, no reutilizar.

EN ISO 374-2:2019

Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos peligrosos. Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración

Prueba	Resultado
Prueba de fuga de aire	Superada

EN ISO 374-4:2019

Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos peligrosos. Parte 4: Determinación de la resistencia frente a la degradación por productos químicos

Sustancia probada	Degradación en %
K Hidróxido de sodio 40 %	-32,8
P Peróxido de hidrógeno 30 %	-6,5
T Formaldehído 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Normativa sobre guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos - Parte 5: Terminología y requisitos de rendimiento sobre riesgos derivados de microorganismos

Prueba	Resultado
Protección frente a bacterias y hongos	Superada
Protección frente a bacterias, virus y hongos	Superada



Información

La resistencia a la penetración se evaluó en condiciones de laboratorio y hace referencia únicamente a las muestras analizadas.

VO (EU) 2023/988

Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos

VO (EG) 1935/2004

Reglamento relativo a materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos.





VO (EU) 10/2011

Reglamento sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos

Uso

Instrucciones de uso

Antes del uso

Tenga en cuenta que este producto contiene látex. Asegúrese de que ha seleccionado el producto adecuado para sus necesidades y áreas de aplicación y respete los requisitos de las normas aplicables. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el proveedor de los guantes de protección de un solo uso. No use los guantes de protección de un solo uso si están defectuosos o ya se han utilizado. Los guantes de protección de un solo uso están diseñados para trabajar con químicos suaves solo brevemente.

Manejo

Selección su talla.

Los guantes de protección de un solo uso protegen el área que cubren. Si fuera necesaria la protección individual de otras partes del cuerpo o de las vías respiratorias, añada otros productos EPI y utilice exclusivamente EPI aprobados para el uso previsto. Si fuera necesaria una protección sanitaria de otras partes del cuerpo o de las vías respiratorias, añada otros productos sanitarios y utilice exclusivamente productos sanitarios aprobados para el uso previsto. El usuario será el único responsable de combinar correctamente los EPI o productos sanitarios adicionales y de cumplir las prescripciones de las normas según la finalidad. Usted es el único responsable de decidir el tiempo de uso en cada caso teniendo en cuenta el efecto de protección y la comodidad. En el sector sanitario, su uso está limitado a un solo paciente. Tras la contaminación, no se puede descartar que se produzcan cambios en los niveles de rendimiento especificados. Durante el uso, deberá comprobar también regularmente que el artículo continúa intacto. En caso de que los guantes de protección de un solo uso estén dañados, deberá sustituirlos inmediatamente por otros en perfecto estado. En caso de contaminación o daños, quítese los guantes de protección de un solo uso y elimínelos adecuadamente.

Atención: Interrumpa inmediatamente su uso en caso de reacciones alérgicas. Lávese las manos minuciosamente y, en caso necesario, solicite asistencia médica.

Indicación de seguridad

El látex natural contenido puede provocar reacciones alérgicas.

Eliminación

Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.

Durabilidad

3 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.

Almacenamiento

Proteger del calor intenso, la radiación solar, el hielo, la humedad, el ozono, los rayos X y la luz ultravioleta.

Almacenar siempre secos.

Temperatura de almacenamiento entre 10 °C y 40 °C.

La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.



Trazabilidad

Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía.

Hoja de datos del producto Versión 3 válido a partir de lote 2617 +

Embalaje

Reciclaje

Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322.

Rogamos que recicle el embalaje.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/>

Variante 1

Unidad de venta

1000 Unidad/Cartón

Nivel de embalaje 1

100 Unidad/Caja expendedora

Cantidad mínima de pedido

1 Cartón



Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Tamaño (An. x L.)	Tolerancia
	40351401	blanco	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	blanco	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	blanco	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	blanco	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm

GTINs	Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.

La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.

Reservado el derecho a errores y omisiones.

Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.





Scheda prodotto

wiroMICROGRIP PF



GUANTI IN LATTICE

Senza talco | Microtesturizzato

i* Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche tra cui reazioni anafilattiche.



PREMIUM





Produttore

Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marchio commerciale	care & serve®

Autorizzazioni

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Svizzera
--------	---

Descrizione del prodotto

Categoria	PREMIUM
Descrizione del prodotto	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Guanti in lattice Senza talco Microtesturizzato i* Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche tra cui reazioni anafilattiche.
Caratteristiche del prodotto	Senza talco Microtesturizzato



Materiale

Materiale	Lattice naturale
Spessore del materiale	Dito: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Superficie mano: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Bordo: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Peso del materiale	Misura M $\approx 5,8$ g/St. ($\pm 0,2$ g)

Utilizzo

Scopo dell'utilizzo	Guanto protettivo monouso per impedire la contaminazione incrociata tra utenti e pazienti durante le visite mediche nonché per impedire che la superficie delle mani sia esposta a sostanze e miscele pericolose o ad agenti biologici dannosi. Il livello di protezione e il tempo di utilizzo massimo derivano dal livello di prestazione determinato per materiale testato.
Contatto con gli alimentari	È consentito un contatto indiretto di breve durata con gli alimenti.
Campo di applicazione	I guanti sono usati per prevenire la contaminazione delle mani del personale medico.
Gruppo di applicazione	L'uso è limitato a professionisti debitamente formati. Non adatto a chi è allergico al lattice.
Gruppo di pazienti	Non adatto a pazienti con un'allergia al lattice. L'uso di guanti in lattice nelle cure neonatali non è raccomandato per prevenire la sensibilizzazione.
Indicazione	I guanti sono usati per prevenire la contaminazione delle mani del personale medico, 1) a diretto contatto con sangue o fluidi corporei, membrane mucose, pelle non intatta e altro materiale potenzialmente infettivo 2) a diretto contatto con pazienti colonizzati o infettati da agenti patogeni che vengono trasmessi attraverso la via di contatto, ad es. B. VRE, MRSA, RSV o 3) quando si maneggiano o si toccano apparecchiature per la cura del paziente visibilmente o potenzialmente contaminate e le superfici circostanti.
Controindicazione	Il lattice può causare reazioni allergiche e sensibilizzazione.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso non sterile





Limitazione	Il prodotto non è progettato per l'uso in ambienti estremi e non deve essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive o in eventuale possibilità di deflagrazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti care & serve®. In caso di allergia nota al lattice, non utilizzare questo prodotto. Se un'analisi dei rischi ha portato alla conclusione che la protezione citata NON è sufficiente, è necessario utilizzare indumenti con una protezione più elevata. Non adatto all'uso con sostanze contenenti petrolio o olio. Non adatto all'imballaggio e alla conservazione di alimenti.		
Nota	Tutti gli incidenti gravi in connessione diretta con questo prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità responsabili.		
Campi di applicazione	Ospedale Casa di riposo Altri gruppi specializzati Studi medici Industria Industria farmaceutica Laboratorio Trattamento di prodotti alimentari HACCP Assistenza Gastronomia HoReCa Pulizia Igiene Cosmetici Wellness Industria della bellezza Casa + giardino Agricoltura Edilizia		
Indicazioni sulla salute	Contiene lattice di gomma naturale, in grado di scatenare allergie di tipo IV e di tipo I. In caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso.		

Standard

Marchio CE

SRN

Basis UDI DI

Dispositivo medico della classe I secondo EU 2017/745

Dispositivi di protezione individuale di categoria III in conformità a UE 2016/425

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

Marchio CE

La marcatura CE garantisce la libera circolazione dei prodotti e delle merci all'interno della Comunità Economica Europea. Il prodotto con marchio CE è conforme ai requisiti essenziali dei regolamenti europei indicati.

CE

2777

MD

CLASS I

PPE

CAT. III

EN ISO 21420:2020

Norma sui guanti protettivi - Requisiti generali e metodo di collaudo

Prova	Risultato
Valore pH	Superata
Mobilità	5
Lunghezza minima	Lunghezza
Misura 7: 230 mm	≈ 240 mm
Misura 8: 240 mm	≈ 240 mm
Misura 9: 250 mm	≈ 240 mm
Misura 10: 260 mm	≈ 240 mm

Informazioni

Rispettare le informazioni di prodotto e le istruzioni per l'uso.

www.wiros.de/IFU

EN 455-1:2022

Guanti medicali monouso - Parte 1: requisiti e prove per la tenuta

Test di ritenzione dell'acqua	Risultato
Tenuta	AQL 1.5

AQL

1.5

EN 455-2:2015

Guanti medicali monouso - Parte 2: requisiti e prove per le proprietà fisiche

Lunghezza minima	Lunghezza
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Prova	Risultato
Carico di rottura	Superata



EN 455-3:2015

Guanti medicali monouso - Parte 3: requisiti e prove per la valutazione biologica

Prova	Risultato
Residui di talco	< 2 mg
Proteine estraibili	< 50 µg/g



Informazioni

i* Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche tra cui reazioni anafilattiche.

È obbligatorio indicare chiaramente se il guanto è in polvere o senza polvere.

EN 455-4:2009

Guanti medicali monouso - Parte 4: requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione

Prova	Risultato
Durata	3

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Norma sui guanti protettivi contro agenti chimici e microrganismi pericolosi - parte 1: Terminologia e requisiti di prestazione per rischi chimici.

Agenti chimici di controllo	Livello
K Idrossido di sodio 40 %	4
P Perossido di idrogeno 30 %	2
T Formaldeide 37 %	3



Informazioni

Tempo di passaggio: Livello 1 > 10 min. | Livello 2 > 30 min. | Livello 3 > 60 min. | Livello 4 > 120 min. | Livello 5 > 240 min. | Livello 6 > 480 min.

Questa informazione non fornisce indicazioni sull'effettivo periodo di protezione sul posto di lavoro e sulla distinzione tra miscele e sostanze chimiche pure.

La resistenza contro gli prodotti chimici è stata valutata in condizioni di laboratorio su campioni prelevati solo dal palmo della mano (tranne nel caso in cui il guanto sia più lungo di 400 mm - in questo caso viene testato anche il risvolto) e si applica esclusivamente agli agenti chimici testati. La resistenza può essere diversa se l'agente chimico viene utilizzato in una miscela.

Si consiglia di verificare se i guanti sono adatti all'uso previsto, poiché le condizioni sul posto di lavoro possono differire da quelle del controllo del tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e del degrado.

Se sono già stati utilizzati guanti protettivi, questi possono offrire meno resistenza contro gli agenti chimici pericolosi a causa dei cambiamenti nelle loro proprietà fisiche. Il degrado, i movimenti, i fili tirati, l'abrasione causati dal contatto con gli agenti chimici possono ridurre significativamente il tempo di applicazione effettivo. Con agenti chimici aggressivi, il degrado può essere il fattore più importante da considerare quando si scelgono guanti resistenti agli agenti chimici.

Prima dell'utilizzo, è necessario controllare se sui guanti ci sono difetti o imperfezioni.

Previsto esclusivamente come monouso, non riutilizzare.

EN ISO 374-2:2019

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione

Prova	Risultato
Verifica della tenuta dell'aria	Superata

EN ISO 374-4:2019

Guanti protettivi contro agenti chimici e microrganismi pericolosi - Parte 4: Determinazione della resistenza al degrado causato da agenti chimici

Agenti chimici di controllo	Degrado %
K Idrossido di sodio 40 %	-32,8
P Perossido di idrogeno 30 %	-6,5
T Formaldeide 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Norma sui guanti protettivi contro agenti chimici e microrganismi pericolosi - parte 5: Terminologia e requisiti di prestazione per rischi causati da microrganismi.

Prova	Risultato
Protezione da batteri e funghi	Superata
Protezione da batteri, funghi e virus	Superata



Informazioni

La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce esclusivamente ai campioni testati.

VO (EU) 2023/988

Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto

VO (EG) 1935/2004

Regolamento sui materiali e sugli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti.



VO (EU) 10/2011

Regolamento relativo alle materie e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Utilizzo

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso

Tenere presente che questo prodotto contiene lattice. Assicurarsi di aver selezionato il prodotto adeguato alle proprie esigenze e ai campi di applicazione e di osservare le specifiche delle norme pertinenti. In caso di dubbi contattare il fornitore del proprio guanto protettivo monouso.

Non indossare il guanto protettivo monouso se presenta difetti o se è stato già utilizzato. I guanti protettivi monouso sono destinati solo all'utilizzo temporaneo durante i lavori con agenti chimici leggeri.

Utilizzo

Selezionare la misura adeguata.

Il guanto protettivo monouso protegge nella zona da esso coperta. Qualora fosse necessaria una protezione personale di altre parti del corpo o delle vie respiratorie, aggiungere ulteriori prodotti DPI, utilizzando solo DPI approvati per l'uso previsto. Qualora fosse necessaria una protezione medica di altre parti del corpo o delle vie respiratorie, aggiungere ulteriori dispositivi medici, utilizzando solo dispositivi medici approvati per l'uso previsto. L'utente è l'unico responsabile per la combinazione corretta di DPI supplementari o dispositivi medici aggiuntivi e della conformità ai requisiti necessari delle norme per ogni scopo d'uso. L'utente è l'unico responsabile per la durata di utilizzo del prodotto tenendo conto dell'effetto protettivo e del comfort. In campo medico, l'uso è limitato a un solo paziente. Dopo una contaminazione non è possibile escludere una modifica dei livelli di prestazione specificati. Anche durante l'utilizzo è necessario controllare regolarmente se l'articolo è intatto. In caso di guanto protettivo monouso danneggiato, questo va immediatamente sostituito con uno intatto. In caso di contaminazione o danneggiamento, il guanto protettivo monouso va rimosso e smaltito correttamente.

Attenzione: interrompere immediatamente l'utilizzo in caso di possibili reazioni allergiche. Lavare accuratamente le mani e, se necessario, consultare un medico.

Avvertenza di sicurezza

Il lattice naturale può causare reazioni allergiche.

Smaltimento

I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.

Durata

3 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.

Conservazione

Proteggere da calore intenso, luce solare, gelo, umidità, ozono, raggi X e luce ultravioletta.

Conservare all'asciutto.

Temperatura di conservazione tra 10 °C e 40 °C.

La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.



Tracciabilità

Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino.

Scheda prodotto Versione 3 valido da lotto 2617 +

Confezionamento

Riciclaggio

Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322.

Portare l'imballaggio al riciclaggio.


www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/>

Variante 1

Unità di vendita

1000 Pezzo/Cartone

Livello di imballaggio 1

100 Pezzo/Scatola dispenser

Unità minima di ordine

1 Cartone



wiroMICROGRIP PF

Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (L x l)	Tolleranza
	40351401	bianco	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	bianco	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	bianco	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	bianco	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate. Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroMICROGRIP PF



ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ

Χωρίς πούδρα | Με αντιολισθητική (micro-textured) υφή

i* Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φυσικό λατέξ καουτσούκ, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένων αναφυλακτικών αντιδράσεων.



PREMIUM



Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
SRN	DE-MF-000004956
Εμπορικό σήμα	care & serve®

Πληρεξουσιότητες

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Ελβετία
--------	--

Περιγραφή προϊόντος

Κατηγορία	PREMIUM
Ονομασία προϊόντος	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Γάντια λατέξ Χωρίς πούδρα Με αντιολισθητική (micro-textured) υφή i* Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φυσικό λατέξ καουτσούκ, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένων αναφυλακτικών αντιδράσεων.
Ιδιότητες προϊόντος	Χωρίς πούδρα Με αντιολισθητική (micro-textured) υφή



Υλικό

Υλικό	Φυσικό λατέξ
Πάχος υλικού	Δάχτυλο: $\approx 0,13 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Παλάμη: $\approx 0,10 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Άκρο μανσέτας: $\approx 0,08 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$)
Βάρος υλικού	Μέγεθος M $\approx 5,8 \text{ g/τμχ.}$ ($\pm 0,2 \text{ g}$)

Χρήση

Ενδεδειγμένη χρήση	Γάντι προστασίας μιας χρήσης προς αποφυγή διασταυρούμενων επιμολύνσεων μεταξύ χρηστών και ασθενών κατά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων καθώς και την αποτροπή επαφής της παλάμης του χεριού με επικίνδυνες για την υγεία ουσίες και μείγματα ή με επιβλαβείς βιολογικές δραστικές ουσίες. Το ύψος της προστασίας καθώς και η μέγιστη διάρκεια χρήσης προκύπτουν από το υπολογισμένο επίπεδο απόδοσης του υποβληθέντος σε δοκιμή υλικού.
Επαφή με τρόφιμα	Επιτρέπεται η σύντομη, έμμεση επαφή με τρόφιμα.
Πεδίο εφαρμογής	Τα γάντια χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της μόλυνσης των χεριών του ιατρικού προσωπικού.
Ομάδα εφαρμογής	Η χρήση περιορίζεται στα ειδικά καταρτισμένα άτομα. Ακατάλληλο για χρήστες με αλλεργία στο λατέξ.
Ομάδα ασθενών	Ακατάλληλο για ασθενείς με αλλεργία στο λατέξ. Η χρήση γαντιών λατέξ στη φροντίδα νεογνών δεν συνιστάται προς αποτροπή πιθανής ευαισθητοποίησης.
Ενδειξη	Τα γάντια χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της μόλυνσης των χεριών του ιατρικού προσωπικού, 1) σε άμεση επαφή με αίμα ή σωματικά υγρά, βλεννογόνους, μη ανέπαφο δέρμα και άλλο δυνητικά μολυσματικό υλικό 2) σε άμεση επαφή με ασθενείς που έχουν αποικιστεί ή μολυνθεί με παθογόνα που μεταδίδονται μέσω της οδού επαφής, π.χ. B. VRE, MRSA, RSV ή 3) όταν χειρίζεστε ή αγγίζετε ορατά ή ενδεχομένως μολυσμένο εξοπλισμό φροντίδας ασθενών και τις γύρω επιφάνειες.
Αντένδειξη	Το λατέξ μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και ευαισθητοποίηση.
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης μη αποστειρωμένα



Περιορισμός	Η εξακρίβωση της καταλληλότητας χρήσης των προϊόντων care & serve® συνιστά αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης ή ορθής χρήσης i των προϊόντων care & serve®. Σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας στο λατέξ μην χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν. Εφόσον η ανάλυση επικινδυνότητας κατέληξε στο συμπέρασμα πως η αναφερόμενη προστασία ΔΕΝ επαρκεί, επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας με υψηλότερο δείκτη προστασίας. Ακατάλληλο για χρήση με ουσίες που περιέχουν πετρέλαιο ή έλαια. Δεν είναι κατάλληλο για συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.		
Σημείωση	Όλα τα σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται άμεσα με αυτό το προϊόν πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες αρχές.		
Τομείς χρήσης	Νοσοκομείο Οίκος ευγηρίας κ.α. κύκλοι ειδικών Ιδιωτικά ιατρεία Βιομηχανία Φαρμακευτική βιομηχανία Εργαστήριο Επεξεργασία τροφίμων HACCP Υπηρεσίες Εστίαση HoReCa Καθαρισμός Υγιεινή Κοσμετολογία Ευεξία Βιομηχανία ομορφιάς Σπίτι + Κήπος Γεωργία Οικοδομή	         	
Υπόδειξη σχετικά με την υγεία	Περιέχει φυσικό λατέξ καουτσούκ, που μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες των τύπων IV και I. Σε περίπτωση δερματικών ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων σταματήστε αμέσως τη χρήση να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή. Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους.		

Πρότυπα

Σήμανση CE

SRN

Basis UDI DI

Ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας I σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2017/745

Μέσα ατομικής προστασίας της κατηγορίας III σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 2016/425

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

Σήμανση CE

Η σήμανση CE διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Το προϊόν που φέρει τη σήμανση CE πληροί τις βασικές απαιτήσεις των αναφερόμενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

EN ISO 21420:2020

Πρότυπο γαντιών προστασίας - Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου

Δοκιμή	Αποτέλεσμα
Τιμή pH	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
Ευκινησία	5
Ελάχιστο μήκος	Μήκος
Μέγεθος 7: 230 mm	≈ 240 mm
Μέγεθος 8: 240 mm	≈ 240 mm
Μέγεθος 9: 250 mm	≈ 240 mm
Μέγεθος 10: 260 mm	≈ 240 mm

Πληροφορίες

Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες του προϊόντος και το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

www.wirotech.gr

www.wirotech.gr

EN 455-1:2022

Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 1: Απαιτήσεις και δοκιμές απουσίας οπών

Δοκιμή υδατοστεγανότητας	Αποτέλεσμα
Απουσία οπών	AQL 1.5

AQL

1.5

EN 455-2:2015

Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές φυσικών ιδιοτήτων

Ελάχιστο μήκος	Μήκος
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Δοκιμή	Αποτέλεσμα
Αντίσταση στη διάσχιση	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία

EN 455-3:2015

Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 3: Απαιτήσεις και δοκιμές βιολογικής αξιολόγησης

Δοκιμή	Αποτέλεσμα
Υπολείμματα πούδρας	< 2 mg
Εκχυλίσιμες πρωτεΐνες	< 50 µg/g



Πληροφορίες

i* Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φυσικό λατέξ καουτσούκ, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένων αναφυλακτικών αντιδράσεων.

Η σαφής σήμανση για το εάν το γάντι είναι με ή χωρίς πούδρα είναι υποχρεωτική.

EN 455-4:2009

Ιατρικά γάντια μιας χρήσης - Μέρος 4: Απαιτήσεις και δοκιμές για προσδιορισμό χρόνου ζωής

Δοκιμή	Αποτέλεσμα
Διάρκεια ζωής	3

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Πρότυπο γαντιών προστασίας έναντι επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 1: Ορολογία και απαιτήσεις επίδοσης για χημικούς κινδύνους.

Χημική ουσία δοκιμής	Επίπεδο
K Υδροξείδιο του νατρίου 40%	4
P Υπεροξείδιο υδρογόνου 30%	2
T Φορμαλδεΰδη 37%	3



Πληροφορίες

Χρόνος διαπερατότητας: Επίπεδο 1 > 10 λεπτά | Επίπεδο 2 > 30 λεπτά | Επίπεδο 3 > 60 λεπτά | Επίπεδο 4 > 120 λεπτά | Επίπεδο 5 > 240 λεπτά | Επίπεδο 6 > 480 λεπτά.

Η παρούσα πληροφορία δεν περιέχει καμία αναφορά ως προς τον πραγματικό χρόνο προστασίας στον χώρο εργασίας και στη διαφοροποίηση μεταξύ μειγμάτων και καθαρών χημικών ουσιών.

Η αντοχή έναντι των χημικών ουσιών αξιολογήθηκε υπό εργαστηριακές συνθήκες σε δείγματα που λήφθηκαν αποκλειστικά από την εσωτερική επιφάνεια του χεριού (εξαιρουμένης της περιπτώσεως στην οποία το γάντι έχει μήκος 400 mm ή μεγαλύτερο, οπότε υποβλήθηκε σε δοκιμή και η μανσέτα) και αφορά αποκλειστικά στη χημική ουσία της δοκιμής. Η αντίσταση ενδέχεται να διαφέρει εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μείγμα.

Συνιστάται να ελέγχεται η καταλληλότητα του γαντιού για την προοριζόμενη χρήση, εφόσον οι συνθήκες στον χώρο εργασίας μπορεί να παρουσιάζουν αποκλίσεις από αυτές της δοκιμής τύπου σε συνάρτηση της θερμοκρασίας, της τριβής και της υποβάθμισης.

Εάν τα γάντια προστασίας έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, ενδέχεται να παρέχουν μικρότερη αντίσταση έναντι των επικίνδυνων χημικών ουσιών λόγω μεταβολής των φυσικών τους ιδιοτήτων. Η υποβάθμιση που προκαλείται από την επαφή με χημικές ουσίες, από κινήσεις, το τράβηγμα των νημάτων, την τριβή κτλ. μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του πραγματικού χρόνου χρήσης. Σε διαβρωτικές χημικές ουσίες η υποβάθμιση μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή ανθεκτικών στις χημικές ουσίες γαντιών.

Πριν τη χρήση τα γάντια πρέπει να ελέγχονται για ελαττώματα ή φθορές.

Προορίζεται για μία χρήση, να μην επαναχρησιμοποιείται.

EN ISO 374-2:2019

Γάντια προστασίας έναντι επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 2: Προσδιορισμός αντίστασης στη διείσδυση

Δοκιμή	Αποτέλεσμα
Δοκιμή διαρροής αέρα	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία

EN ISO 374-4:2019

Γάντια προστασίας έναντι επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 4: Προσδιορισμός αντοχής στη χημική αποικοδόμηση

Χημική ουσία δοκιμής	Υποβάθμιση %
K Υδροξείδιο του νατρίου 40%	-32,8
P Υπεροξείδιο υδρογόνου 30%	-6,5
T Φορμαλδεΰδη 37%	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Πρότυπο γαντιών προστασίας έναντι επικίνδυνων χημικών ουσιών και μικροοργανισμών - Μέρος 5: Ορολογία και απαιτήσεις επίδοσης για κινδύνους από μικροοργανισμούς

Δοκιμή	Αποτέλεσμα
Προστασία από βακτήρια και μύκητες	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
Προστασία από βακτήρια, μύκητες και ιούς	Ολοκληρώθηκε με επιτυχία



Πληροφορίες

Η αντίσταση έναντι διείσδυσης αξιολογήθηκε υπό εργαστηριακές συνθήκες και αφορά αποκλειστικά στα δείγματα της δοκιμής.

VO (EU) 2023/988

Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων

VO (EG) 1935/2004

Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα από πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.



VO (EU) 10/2011

Κανονισμός σχετικά με τα υλικά & αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Πριν τη χρήση
Λάβετε υπόψη πως το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει λατέξ. Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το σωστό για τις ανάγκες σας και τους τομείς χρήσης προϊόν και τηρείτε τις απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρμοστέων προτύπων. Εάν έχετε ερωτήσεις απευθυνθείτε στον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε τα γάντια προστασίας μιας χρήσης. Μην φορέσετε το γάντι προστασίας μίας χρήσης εφόσον παρουσιάζει ελαττώματα ή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Τα γάντια προστασίας μίας χρήσης προορίζονται για εργασίες με ελαφρές χημικές ουσίες μόνο για βραχυπρόθεσμη διάρκεια χρήσης.

Χρήση

Επιλέξτε το κατάλληλο για εσάς μέγεθος.

Το γάντι προστασίας μίας χρήσης προστατεύει την περιοχή που καλύπτεται από αυτό. Εάν απαιτείται η ατομική προστασία άλλων μερών του σώματος ή των αναπνευστικών οδών, προσθέστε προϊόντα ΜΑΠ και χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την προοριζόμενη χρήση ΜΑΠ. Εάν απαιτείται η ιατρική προστασία άλλων μερών του σώματος ή των αναπνευστικών οδών, προσθέστε προϊόντα ιατρικής προστασίας και χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την προοριζόμενη χρήση ιατρικά προϊόντα. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά ο ίδιος υπεύθυνος για τον σωστό συνδυασμό ΜΑΠ ή πρόσθετων ιατρικών προϊόντων και την τήρηση των υποχρεωτικών για κάθε χρήση απαιτήσεων των προτύπων. Εσείς καθορίζετε με αποκλειστικά δική σας ευθύνη τη διάρκεια χρήσης στα πλαίσια της εκάστοτε χρήσης λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της προστασίας και την άνεση χρήσης. Στον ιατρικό τομέα η χρήση περιορίζεται σε έναν/μία ασθενή. Μετά από επιμόλυνση δεν μπορεί να αποκλειστεί ενδεχόμενη μεταβολή των αναφερόμενων επιπέδων επιδόσεων. Ελέγχετε τακτικά και κατά τη διάρκεια της χρήσης εάν το προϊόν παραμένει σε άρτια κατάσταση. Αντικαταστήστε αμέσως ένα γάντι προστασίας μίας χρήσης που έχει υποστεί φθορά με ένα άλλο που βρίσκεται σε άρτια κατάσταση. Εφόσον επιμολυνθεί ή υποστεί φθορές, το γάντι προστασίας μίας χρήσης πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται στα πλαίσια της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Προσοχή: Σταματήστε αμέσως τη χρήση σε περίπτωση πιθανών αλλεργικών αντιδράσεων. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας και ζητήστε ιατρική βοήθεια εφόσον χρειαστεί.

Υπόδειξη ασφαλείας

Το περιεχόμενο φυσικό λατέξ ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Απορρίψη

Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίνονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κλιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της επιμόλυνσης.

Διάρκεια ζωής

3 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.

Αποθήκευση

Να προστατεύεται από την έκθεση σε έντονη θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία, παγετό, υγρασία, όζον, ακτίνες Χ και το υπεριώδες.
Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος.
Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 10 °C και 40 °C.
Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.



Ιχνηλασιμότητα

Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη.
Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 3 Ισχύει από παρτίδα 2617 +

Συσκευασία

Ανακύκλωση

Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322.
Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.



www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/>

Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης

1000 Τεμάχιο/Κουτί

Επίπεδο συσκευασίας 1

100 Τεμάχιο/Κουτί διανομέα

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 Κουτί

Κωδικοί είδους

Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Διαστάσεις (Π x Μ)	Ανοχή
40351401	λευκό	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
40351402	λευκό	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
40351403	λευκό	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
40351404	λευκό	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm

GTINs

Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI
40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.

Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν επιτρέπεται

LATEKS ELDIVENLER

Pudrasız | Mikro dokulu

i* Bu ürün, anafilaktik reaksiyonlar dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlara neden olabilen doğal kauçuk lateks içerir.



PREMIUM

Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
SRN	DE-MF-000004956
Ticari marka	care & serve®

Yetkilendirmeler

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, İsviçre
--------	--

Ürün açıklaması

Kategori	PREMIUM
Ürün tanımı	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Lateks eldivenler Pudrasız Mikro dokulu İ* Bu ürün, anafilaktik reaksiyonlar dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlara neden olabilen doğal kauçuk lateks içerir.
Ürün özellikleri	Pudrasız Mikro dokulu



Malzeme

Malzeme	Doğal lateks
Malzeme kalınlığı	Parmak: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) El yüzeyi: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Kenar: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Malzeme ağırlığı	Beden M $\approx 5,8$ g/St. ($\pm 0,2$ g)

Kullanım

Kullanım amacı	Tıbbi muayeneler yaparken kullanıcılar ve hastalar arasında çapraz bulaşmayı önleyen ve ellerin yüzeylerinin sağlığa zararlı veya zararlı biyolojik ajanların ve zararlı maddelerin temas etmesini önlenmesini sağlayan tek kullanımlık koruyucu eldiven. Koruma düzeyi ve maksimum aşınma süresi test edilen her madde için belirlenen performans seviyesinden kaynaklanır.
Gıda teması	Gıdalarla kısa süreli dolaylı temasa izin verilir.
Uygulama alanı	Sağlık personelinin ellerine bulaşmasını önlemek için eldiven kullanılmaktadır.
Uygulama grubu	Kullanım, uygun şekilde eğitim almış uzmanlarla sınırlıdır. Lateks alerjisi olan kullanıcılar için uygun değildir.
Hasta grubu	Lateks alerjisi olan hastalar için uygun değildir. Duyarlandırmayı önlemek için yenidoğan bakımında lateks eldiven kullanılması tavsiye edilmez.
İndikasyon	Sağlık personelinin ellerine bulaşmasını önlemek için eldiven kullanılır, 1) kan veya vücut sıvıları, mukoza zarları, sağlam olmayan deri ve diğer potansiyel olarak bulaşıcı malzemelerle doğrudan temas halinde 2) temas yoluyla bulaşan patojenlerle kolonize olan veya enfekte olan hastalarla doğrudan temas halinde, örn. B. VRE, MRSA, RSV veya 3) gözle görülür veya potansiyel olarak kontamine olmuş hasta bakım ekipmanını ve çevresindeki yüzeyleri tutarken veya dokunurken.
Kontrendikasyon	Lateks, alerjik reaksiyonlara ve hassasiyete neden olabilir.
Kullanım İle ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün steril değil
Kısıtlama	care & serve® ürünlerinin uygunluğunun belirlenmesi bizzat kullanıcının sorumluluğundadır. Üretici, care & serve® ürünlerinin yanlış kullanımında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bilinen bir lateks alerjisi durumunda, lütfen bu ürünü kullanmayın. Eğer bir risk analizi, listelenen korumanın yeterli OLMADIĞINI ortaya koyması durumunda, daha yüksek koruyucu davranışa sahip koruyucu kıyafet kullanılmalıdır. Petrol veya yağ içeren maddelerle kullanım için uygun değildir. Gıda maddelerinin paketlenmesi ve depolanması için uygun değildir.
Açıklama	Bu ürünle doğrudan bağlantılı tüm ciddi olaylar üreticiye ve sorumlu yetkililere bildirilmelidir.




Ürün Bilgi Formu

wiroMICROGRIP PF



Kullanım alanları

Hastane | Yaşlı Bakım Evleri | ve diğer Uzman Kurumlar
Doktor muayenehaneleri
Sanayi | İlaç endüstrisi
Laboratuvar
Gıda işleme
HACCP
Hizmet | Gastronomi | HoReCa
Temizlik | Hijyen
Kozmetik | Sağlık | Güzellik Endüstrisi
Ev + Bahçe | Tarım | İnşaat sektörü

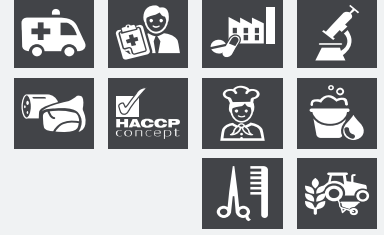

Sağlık ile ilgili uyarı

Tip IV ve Tip I alerjilere neden olabilecek doğal kauçuk lateksi içerir.
Cilt tahrişlerinde veya alerjik reaksiyonlarda kullanımı hemen bırakın ve bir hekime danışın.
Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen, mutajenik veya teratojenik maddeler içermemektedir.

Standartlar

CE işareti

AB 2017/745 uyarınca I sınıfı medikal üründür.
AB 2016/425 uyarınca III. kategori kişisel koruyucu ekipman
DE-MF-000004956
4051642-wiroMICROGRIP-7N



SRN

Basis UDI DI

CE işareti
CE işareti, ürünlerin ve malların Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde serbest dolaşımını garanti eder. CE işaretli ürün, belirtilen Avrupa yönetmeliklerinin temel taleplerini karşılar.

EN ISO 21420:2020

Koruyucu eldivenlerde standart - Genel şartlar ve test yöntemleri

Test	Sonuç
pH değeri	Geçildi
Manevra yeteneği	5
minimum uzunluk	Uzunluk
Beden 7: 230 mm	≈ 240 mm
Beden 8: 240 mm	≈ 240 mm
Beden 9: 250 mm	≈ 240 mm
Beden 10: 260 mm	≈ 240 mm

Bilgiler
Ürün bilgilerini ve kullanım kılavuzunu dikkate alın.



EN 455-1:2022

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 1: Gereksinimler ve sızdırmazlık testi

Su tutma testi	Sonuç
Sızdırmazlık	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 2: Gereksinimler ve fiziksel özellikler testi

minimum uzunluk	Uzunluk
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Sonuç
Yırtılma kuvveti	Geçildi

EN 455-3:2015

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 3: Biyolojik değerlendirme için gereksinimler ve testler

Test	Sonuç
Pudra kalıntısı	< 2 mg
Ekstrakte edilebilir proteinler	< 50 µg/g



Bilgiler
i* Bu ürün, anafilaktik reaksiyonlar dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlara neden olabilen doğal kauçuk lateks içerir.
Eldivenin pudralı mı yoksa pudrasız mı olduğuna dair net bir işaretleme zorunludur.

EN 455-4:2009

Tek kullanımlık tıbbi eldivenler - Bölüm 4: Minimum dayanıklılığı belirlemek için gereksinimler ve testler

Test	Sonuç
Kullanım Süresi	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Tehlikeli kimyasallara ve mikro organizmalara karşı koruyucu eldivenlerde standart - Bölüm 1: Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereksinimleri.

Test edilen kimyasal	Seviye
K Sodyum hidroksit %40	4



Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wirosMICROGRIP PF | Version 3 | 27.05.2026

P	Hidrojen peroksit 30 %	2
T	Formaldehit 37 %	3

Bilgiler

Kırılma süresi: Seviye 1 > 10 Dk. | Seviye 2 > 30 Dk. | Seviye 3 > 60 Dk. | Seviye 4 > 120 Dk. | Seviye 5 > 240 Dk. | Seviye 6 > 480 Dk.

Bu bilgi işyerindeki fiili koruma süresine ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki ayrımlara dair bir gösterge sağlamamaktadır.

Kimyasal maddelere direnç laboratuvar koşullarında yalnızca avuç içinden alınmış numunelerde değerlendirilmiştir (eldivenin 400 mm veya daha uzun olduğu durumlar hariç - bu durumda manşet de test edilir) ve sadece test edilen kimyasallar ile ilgilidir. Kimyasal, bir karışım halinde kullanıldığında direnç farklı olabilir.

İşyeri koşulları sıcaklık, aşınma ve degradasyona bağlı olarak tip testinden farklı olabileceğinden, eldivenleri kullanım amacına uygun olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir.

Koruyucu eldivenler kullanılırsa, fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle tehlikeli kimyasallara karşı daha az direnç sağlayabilirler. Kimyasallarla temastan kaynaklanan degradasyon, hareket, liflenme, sürtünme ve benzerleri uygulama süresini önemli ölçüde azaltabilir. Agresif kimyasallar için, kimyasallara dayanıklı eldivenler seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör degradasyon olabilir.

Eldivenler, kullanılmadan önce herhangi bir hata veya kusura karşı kontrol edilmelidir.

Sadece tek kullanım içindir, tekrar kullanmayın.

EN ISO 374-2:2019

Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 2: Sızma direncinin belirlenmesi

Test	Sonuç
Hava kaçışı testi	Geçildi

EN ISO 374-4:2019

Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 4: Kimyasallardan kaynaklanan ayrışmaya karşı direncin belirlenmesi

Test edilen kimyasal	Degradasyon %
K Sodyum hidroksit %40	-32,8
P Hidrojen peroksit 30 %	-6,5
T Formaldehit 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenlerde standart - Bölüm 5: Mikroorganizma riskleri için terminoloji ve performans gereksinimleri

Test	Sonuç
Bakteri ve mantar koruması	Geçildi
Bakteri, mantar ve virüs koruması	Geçildi



Bilgiler

Penetrasyon direnci laboratuvar koşullarında değerlendirildi ve yalnızca test edilen numuneler ile ilgilidir.

VO (EU) 2023/988

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988

VO (EG) 1935/2004

Gıda maddeleriyle temas etmek için olan plastikten üretilmiş malzemeler ve cisimlerle ilgili düzenleme.



VO (EU) 10/2011

Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve eşyalarla ilgili düzenleme

Kullanım

Kullanım Kılavuzu

Kullanmadan önce

Bu ürünün lateks içerdiğini lütfen unutmayın. Lütfen ihtiyaçlarınızı ve uygulama alanlarınızı için doğru ürünü seçtiğinizden emin olun ve ilgili standartların talimatlarına uyun. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen tek kullanımlık koruyucu eldiven tedarikçinize başvurun.

Kusurlu veya daha önce kullanılmış tek kullanımlık koruyucu eldivenleri lütfen kullanmayın. Tek kullanımlık koruyucu eldivenler, yalnızca hafif kimyasallarla çalışmalarda kısa süreli kullanım için öngörülmüştür.

Kullanım

Lütfen sizin için doğru bedeni seçin.

Tek kullanımlık koruyucu eldiven, kapladığı bölgeyi korur. Vücudun diğer bölümlerinin veya solunum yollarının korunması gerektiği durumlarda, diğer KKE ürünleri ile tamamlayın, yalnızca kullanım amacı için onaylanmış KKE'leri kullanın. Vücudun diğer bölümlerinin veya solunum yollarının tıbbi korunması gerektiği durumlarda, diğer tıbbi ürünler ile tamamlayın, yalnızca kullanım amacı için onaylanmış tıbbi ürünler kullanın. Kullanıcı, ilave KKE veya ek tıbbi ürünlerin doğru kombinasyonundan ve her uygulama için gerekli standartlara uyulmasından tek başına sorumludur. Koruyucu etkiyi ve rahatlığı dikkate alarak, ilgili kullanımın hizmet ömrünü belirlemekten yalnızca kullanıcı sorumludur. Tıbbi alanda kullanım bir hasta ile sınırlıdır. Kirilenmeden sonra, belirtilen performans seviyelerinde oluşabilecek değişiklikler göz ardı edilmemelidir. Ayrıca kullanım sırasında ürünün sağlam olup olmadığını da düzenli olarak kontrol edin. Hasar görmüş bir tek kullanımlık koruyucu eldiveni hemen sağlam bir eldiven ile değiştirin. Tek kullanımlık koruyucu eldiven, kirlenme veya hasar durumunda çıkarılmalı ve düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Dikkat: Olası alerjik reaksiyonlarda uygulama hemen durdurulmalı. Ellerini iyice yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.

Güvenlik Uyarısı

İçerdiği doğal lateks alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Ürün Bilgi Formu

wiroMICROGRIP PF



Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Kullanım Süresi	3 yıl, üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.
Saklama	Aşırı ısıdan, güneş ışığından, dondan, nemden, ozondan, X ışınlarından ve ultraviyole ışıktan koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Depolama sıcaklığı 10°C ile 40°C arasında. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 3 Geçerli parti başlangıcı 2617 +



Ambalaj

Gerici Dönüşüm	VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322. Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.
----------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Varyant 1

Satış birimi	1000 Adet/Karton
Ambalaj düzeyi 1	100 Adet/Dispenser kutu
Minimum sipariş miktarı	1 Karton

Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Boyutu (G x U)	Tolerans
	40351401	beyaz	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	beyaz	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	beyaz	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	beyaz	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm

GTINs	Ürün numarası	Unit of Use UDI	Ambalaj seviyesi 1 UDI	Ambalaj seviyesi 2 UDI	Karton UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışa haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetindedir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.



Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wiromicrogrip PF | Version 3 | 27.05.2026



ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ

Неопудренные | Микротекстурированный

i* Данное изделие содержит латекс на основе натурального каучука, способный вызывать аллергические реакции, включая анафилактический шок.



PREMIUM





Производитель

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Торговая марка	care & serve®

Полномочия

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцария
--------	--

Описание изделия

Категория	PREMIUM
Обозначение продукции	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Перчатки латексные Неопудренные Микротекстурированный i* Данное изделие содержит латекс на основе натурального каучука, способный вызывать аллергические реакции, включая анафилактический шок.
Характеристики продукции	Неопудренные Микротекстурированный



Материал

Материал	Натуральный латекс
Толщина материала	Пальцы: ≈ 0,13 мм (± 0,01 мм) Ладонь: ≈ 0,10 мм (± 0,01 мм) Манжета: ≈ 0,08 мм (± 0,01 мм)
Вес материала	Размеры M ≈ 5,8 г/шт. (± 0,2 г)

Использование

Назначение	Перчатки одноразового применения для защиты от перекрестной контаминации между медицинским сотрудником и пациентом во время проведения медицинских исследований, а также во избежание контакта кожи рук с опасными для здоровья веществами и смесями или вредными биологически активными веществами. Степень защиты и максимальный срок использования определяется исходя из уровня эффективности защиты испытанного материала.
Контакт с пищевыми прод	Допускается кратковременный непрямой контакт с продуктами питания.
Область применения	Перчатки используются для предотвращения загрязнения рук медицинского персонала.
Группа применения	Использование разрешено только специально обученному персоналу. Не подходит для лиц с аллергией на латекс.
Группа пациентов	Не подходит для пациентов с аллергией на латекс. Во избежание сенсибилизации не рекомендуется использовать латексные перчатки при уходе за новорожденными.
Показание	Перчатки используются для предотвращения загрязнения рук медперсонала, 1) в прямом контакте с кровью или биологическими жидкостями, слизистыми оболочками, поврежденной кожей и другим потенциально инфекционным материалом 2) в прямом контакте с пациентами, которые колонизированы или инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем, например B. VRE, MRSA, RSV или 3) при обращении или прикосновении к явно или потенциально загрязненному оборудованию для ухода за пациентами и окружающим поверхностям.
Противопоказание	Латекс может вызывать аллергические реакции и сенсибилизацию.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт нестерильные
Ограничения	Определение пригодности изделий care & serve® возлагается исключительно на пользователя. Производитель не берет на себя никакой ответственности за неправильное использование средств care & serve®. Не используйте это изделие, если у вас есть аллергия на латекс. Если анализ риска выявил, что приведенной защиты НЕДОСТАТОЧНО, следует применять защитную одежду с более высокими защитными характеристиками. Не подходит для использования с веществами, содержащими нефтепродукты или масло.




не предназначено для упаковки и хранения пищевых продуктов.

Примечание Обо всех серьезных инцидентах, непосредственно связанных с этим продуктом, необходимо сообщать производителю и ответственным органам.

Области применения

Больница | Дом престарелых | в том числе группы специалистов
 Врачебные практики
 Промышленность | фармацевтическая промышленность
 Лаборатории
 Пищевая промышленность
 HACCP
 Сервис | Гастрономия | HoReCa
 Уборка | гигиена
 Косметика | Велнес | Индустрия красоты
 Дом + сад | Сельское хозяйство | Строительное дело

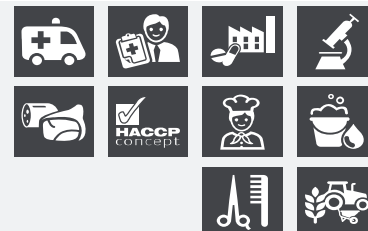

Предупреждение о возмоз Содержит натуральный каучуковый латекс, способный вызывать аллергические реакции I и IV типов.
 При раздражении кожи или аллергических реакциях необходимо немедленно прекратить использование и обратиться к врачу.
 На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных, мутагенных или репродуктивно токсичных веществ, если используются по назначению.

Стандарты

CE-маркировка Медицинское изделие класса I согласно ЕС 2017/745
 Индивидуальное защитное средство категории III в соответствии с ЕС 2016/425
SRN DE-MF-000004956
Basis UDI DI 4051642-wiroMICROGRIPP-7N



CE-маркировка
 Маркировка CE гарантирует свободное обращение изделий и товаров на территории
 ЕЭС. Изделие с маркировкой CE соответствует основным требованиям указанных европейских регламентов.

EN ISO 21420:2020 Стандарт для защитных перчаток - Общие требования и методы испытаний

Тест	Результат
pH-показатель	Испытание успешно
Подвижность	5
Минимальная длина	Длина
Размер 7: 230 мм	≈ 240 mm
Размер 8: 240 мм	≈ 240 mm
Размер 9: 250 мм	≈ 240 mm
Размер 10: 260 мм	≈ 240 mm

Информация
 Обращайте внимание на информацию о продукции и выполняйте инструкции по использованию.



EN 455-1:2022 Перчатки медицинские одноразовые – Часть 1: Требования и испытания на герметичность

Проверка водонепроницаемости	Результат
Плотность	AQL 1.5



EN 455-2:2015 Перчатки медицинские одноразовые – Часть 2: Требования и испытания физических свойств

Минимальная длина	Длина
XS - XL ≈ 240 мм	≈ 240 mm
Тест	Результат
Растягивающее усилие	Испытание успешно

EN 455-3:2015 Перчатки медицинские одноразовые – Часть 3: Требования и испытания для биологической оценки

Тест	Результат
Остатки порошка	< 2 mg
Извлекаемые белки	< 50 µg/g



Информация
 i* Данное изделие содержит латекс на основе натурального каучука, способный вызывать аллергические реакции, включая анафилактический шок.

Необходимо четкое указание того, обработана ли перчатка порошком для посыпки или нет.

EN 455-4:2009 Перчатки медицинские одноразовые – Часть 4: Требования и испытания для определения минимального срока хранения

Тест	Результат								
Срок службы	3								
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	Стандарт для защитных перчаток для защиты от опасных химикатов и микроорганизмов - часть 1: Терминология и требования к рабочим характеристикам для химических рисков. <table> <tr> <th>Химикалии для испытания</th><th>Уровень</th></tr> <tr> <td>K Гидроксид натрия 40%</td><td>4</td></tr> <tr> <td>P Перекись водорода 30%</td><td>2</td></tr> <tr> <td>T Формальдегид 37%</td><td>3</td></tr> </table> Информация Время прорыва: Уровень 1 > 10 мин. Уровень 2 > 30 мин. Уровень 3 > 60 мин. Уровень 4 > 120 мин. Уровень 5 > 240 мин. Уровень 6 > 480 мин. Эта информация не предоставляет сведений о фактической продолжительности защиты на рабочем месте и о разнице между смесями и чистыми химическими веществами. Устойчивость к химическим веществам оценивалась в лабораторных условиях на образцах, взятых только с участка материала на ладони (кроме случаев, когда перчатка составляет 400 мм или длиннее – в этом случае также проверяется манжета) и касается только проверенных химикалий. Устойчивость может отличаться, если химическое средство используется в смеси. Рекомендуется проверять, подходят ли перчатки для предусмотренного применения, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться от условий типового испытания в зависимости от температуры, износа и деградации. Если защитными перчатками уже пользовались, они могут обеспечивать меньшую устойчивость к опасным химическим веществам вследствие изменения их физических характеристик. В результате деградации, движений, растяжения, трения и т.п. при контакте с химическими веществами, может значительно сократиться фактическое время использования. При работе с агрессивными химическими веществами важнейшим фактором, который следует учитывать при выборе химически стойких перчаток, может быть деградация. Перед использованием необходимо проверить перчатки на наличие недостатков или дефектов. Предназначено для однократного применения, не использовать повторно.	Химикалии для испытания	Уровень	K Гидроксид натрия 40%	4	P Перекись водорода 30%	2	T Формальдегид 37%	3
Химикалии для испытания	Уровень								
K Гидроксид натрия 40%	4								
P Перекись водорода 30%	2								
T Формальдегид 37%	3								
EN ISO 374-2:2019	Защитные перчатки против опасных химикатов и микроорганизмов - часть 2: Определение сопротивления проникновению <table> <tr> <th>Тест</th><th>Результат</th></tr> <tr> <td>Проверка на герметичность с помощью воздуха</td><td>Испытание успешно</td></tr> </table>	Тест	Результат	Проверка на герметичность с помощью воздуха	Испытание успешно				
Тест	Результат								
Проверка на герметичность с помощью воздуха	Испытание успешно								
EN ISO 374-4:2019	Защитные перчатки против опасных химикатов и микроорганизмов - часть 4: Определение устойчивости к разрушению химическими <table> <tr> <th>Химикалии для испытания</th><th>Деградация %</th></tr> <tr> <td>K Гидроксид натрия 40%</td><td>-32,8</td></tr> <tr> <td>P Перекись водорода 30%</td><td>-6,5</td></tr> <tr> <td>T Формальдегид 37%</td><td>-13,7</td></tr> </table>	Химикалии для испытания	Деградация %	K Гидроксид натрия 40%	-32,8	P Перекись водорода 30%	-6,5	T Формальдегид 37%	-13,7
Химикалии для испытания	Деградация %								
K Гидроксид натрия 40%	-32,8								
P Перекись водорода 30%	-6,5								
T Формальдегид 37%	-13,7								
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Стандарт для защитных перчаток для защиты от опасных химикатов и микроорганизмов - часть 5: Терминология и технические требования к рискам из-за микроорганизмов <table> <tr> <th>Тест</th><th>Результат</th></tr> <tr> <td>Защита от бактерий и грибов</td><td>Испытание успешно</td></tr> <tr> <td>Защита от бактерий, грибов и вирусов</td><td>Испытание успешно</td></tr> </table> Информация Устойчивость к проникновению оценивалась в лабораторных условиях и относится исключительно к исследуемым образцам.	Тест	Результат	Защита от бактерий и грибов	Испытание успешно	Защита от бактерий, грибов и вирусов	Испытание успешно		
Тест	Результат								
Защита от бактерий и грибов	Испытание успешно								
Защита от бактерий, грибов и вирусов	Испытание успешно								
VO (EU) 2023/988	Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции								
VO (EG) 1935/2004	Регламент о материалах и изделиях из пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами.								
VO (EU) 10/2011	Распоряжение о материалах и изделиях из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами								

Использование

Инструкция по использованию	Перед использованием Обратите внимание, что этот продукт содержит латекс. Убедитесь, что выбрали правильное изделие для своих потребностей и сфер применения, и следуйте критериям соответствующих стандартов. При возникновении вопросов свяжитесь с поставщиком одноразовых защитных перчаток. Ни в коем случае не носите одноразовые защитные перчатки, в которых были обнаружены дефекты или которыми уже пользовались. Одноразовые защитные перчатки предназначены только для кратковременного использования при работе с легкими химическими веществами. Применение Выберите подходящий вам размер
-----------------------------	---

выберите подходящий вам размер.

Одноразовые перчатки защищают покрытую ими область. Если необходимо защитить другие части тела или дыхательные пути, используйте дополнительные средства индивидуальной защиты, применяя наиболее подходящие для данной цели изделия. Если необходима медицинская защита других частей тела или дыхательных путей, используйте дополнительные медицинские средства защиты, применяя только подходящие для данной цели медицинские изделия. Ответственность за правильное сочетание дополнительных средств индивидуальной защиты или дополнительных медицинских изделий, а также соблюдение критериев соответствующих стандартов возлагается исключительно на пользователя. Вы под личную ответственность определяете продолжительность использования для конкретного применения, учитывая защитный эффект и комфорт ношения. При использовании перчаток в медицинских целях меняйте их после каждого пациента. Не исключено, что после загрязнения изделие не будет обеспечивать указанный уровень защиты. При использовании также регулярно проверяйте изделие, чтобы убедиться, что оно не повреждено. В случае повреждения одноразовых защитных перчаток немедленно замените их на новые. При загрязнении или повреждении одноразовых защитных перчаток их следует снять и утилизировать должным образом.

Внимание: Немедленно прекратите использование в случае возникновения аллергических реакций. Тщательно вымойте руки и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Инструкция по технике безопасности	Натуральный латекс может вызывать аллергические реакции.
Утилизация	Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.
Срок службы	3 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.
Хранение	Беречь от чрезмерного тепла, солнечного света, мороза, влаги, озона, рентгеновских лучей и ультрафиолета. Хранить сухим. Температура хранения от 10°C до 40°C. Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.
Прослеживаемость	Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада. Техническая спецификация Версия 3 действительный, начиная с партии 2617 +



Упаковка

Переработка	Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322. Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.	
-------------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Вариант 1

Торговая единица	1000 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	100 шт./коробка диспенсера				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размер (Ш x Д)	допустимое отклонение
	40351401	белый	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	белый	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	белый	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	белый	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265



Техническая спецификация

wiroMICROGRIP PF



Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний. Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно. Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями WIROS.





Karta produktu

wiroMICROGRIP PF



RĘKAWICE LATEKSOWE

Bez pudru | Mikro-teksturowane

i* Produkt zawiera lateks z kauczuku naturalnego, który może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne.



PREMIUM





Producent

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
SRN	DE-MF-000004956
Znak towarowy	care & serve®

Upoważnienia

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Szwajcaria
--------	---

Opis produktu

Kategoria	PREMIUM
Nazwa produktu	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Rękawice lateksowe Bez pudru Mikro-teksturowane i* Produkt zawiera lateks z kauczuku naturalnego, który może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne.
Właściwości produktu	Bez pudru Mikro-teksturowane



Materiał

Materiał	Naturalny lateks
Grubość materiału	Palce: $\approx 0,13 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Powierzchnia dłoni: $\approx 0,10 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Brzeg: $\approx 0,08 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$)
Waga materiału	Rozmiar M $\approx 5,8 \text{ g/szt.}$ ($\pm 0,2 \text{ g}$)

Zastosowanie


Zamierzone przeznaczenie	Jednorazowe rękawice ochronne są przeznaczone do zapobiegania kontaminacji pomiędzy ich użytkownikami a pacjentami podczas badań lekarskich oraz do uniknięcia kontaktu skóry dłoni z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi dla zdrowia lub ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Wysokość ochronna i maksymalny czas noszenia wynikają z określonego poziomu wydajności dla każdej badanej substancji.
Kontakt z żywnością	Dopuszczony krótkotrwały, pośredni kontakt z produktami spożywczymi.
Zakres zastosowania	Rękawiczki służą do zapobiegania zanieczyszczeniu rąk personelu medycznego.
Grupa zastosowania	Użytkowanie jest ograniczone do grupy odpowiednio przeszkolonego personelu specjalistycznego. Produkt nieodpowiedni dla osób uczulonych na lateks.
Grupa pacjentów	Nie nadaje się dla pacjentów uczulonych na lateks. Nie zaleca się stosowania rękawiczek lateksowych podczas opieki nad noworodkami, aby zapobiec uczuleniom.
Wskazania	Rękawiczki służą do zapobiegania zanieczyszczeniu rąk personelu medycznego, 1) w bezpośrednim kontakcie z krwią lub płynami ustrojowymi, błonami śluzowymi, nieuszkodzoną skórą i innym potencjalnie zakaźnym materiałem 2) w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, którzy są skolonizowani lub zakażeni patogenami przenoszonymi drogą kontaktową, np. B. VRE, MRSA, RSV lub 3) podczas obsługi lub dotykania w sposób widoczny lub potencjalnie zanieczyszczony sprzęt do opieki nad pacjentem i otaczających powierzchni.
Przeciwwskazania	Lateks może wywoływać reakcje alergiczne i uczulenia.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku niesterylne
Zastrzeżenia	Za właściwe określenie spektrum zastosowania produktów care & serve® odpowiada wyłącznie użytkownik. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktów care & serve®. W przypadku zdiagnozowanej alergii na lateks nie należy stosować tego produktu. Jeżeli analiza ryzyka dowodzi, że powyższe środki ochrony NIE są wystarczające, należy zastosować odzież ochronną o wyższym stopniu ochrony. Nieprzystosowane do użytku przy substancjach zawierających naftę lub olej. Nie nadaje się do pakowania i przechowywania żywności.
Informacja	Wszystkie poważne incydenty związane bezpośrednio z tym produktem należy zgłaszać producentowi i odpowiednim władzom.





Obszary zastosowania

Szpital | Domy opieki | w tym Ośrodki specjalistyczne
 Gabinety lekarskie
 przemysł | przemysł farmaceutyczny
 laboratorium
 przygotowanie produktów spożywczych
 HACCP
 Usługi | Gastronomia | HoReCa
 sprzątanie | higiena
 Salony urody | Wellness | Przemysł kosmetyczny
 dom i ogród | rolnictwo | budownictwo

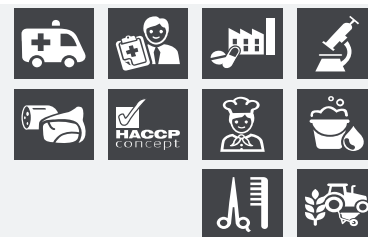

Wskazówki dotyczące zdrowia

Zawiera lateks kauczuku naturalnego, który może wywoływać alergię typu IV i I.
 W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
 Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych, mutagennych ani szkodliwych dla rozrodczości, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Standardy

Oznakowanie CE

Wyrób medyczny klasy I zgodny z normą UE 2017/745
 Środki ochrony indywidualnej III kategorii zgodnie z normą UE 2016/425



SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE gwarantuje swobodny przepływ produktów i towarów w obrębie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Produkt oznaczony znakiem CE spełnia zasadnicze wymagania określone w przepisach europejskich.

EN ISO 21420:2020

Norma dotycząca rękawic ochronnych - ogólne wymagania i metody badań

Test	Wynik
Wartość pH	Zaliczony
Zakres ruchu	5
Minimalna długość	Długość
Rozmiar 7: 230 mm	≈ 240 mm
Rozmiar 8: 240 mm	≈ 240 mm
Rozmiar 9: 250 mm	≈ 240 mm
Rozmiar 10: 260 mm	≈ 240 mm



Informacje

Należy zaznajomić się z informacjami o produkcie i przestrzegać instrukcji obsługi.

EN 455-1:2022

Rękawice medyczne jednorazowego użytku - część 1: Wymagania i badanie szczelności

Test odporności na przepuszczalność wody	Wynik
Szczelność	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Rękawice medyczne jednorazowego użytku - część 2: Wymagania i badanie właściwości fizycznych

Minimalna długość	Długość
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Wynik
Siła rozrywająca	Zaliczony

EN 455-3:2015

Rękawice medyczne jednorazowego użytku - część 3: Wymagania i badania do oceny biologicznej

Test	Wynik
Pozostałości pudru	< 2 mg
Białka dające się wyekstrahować	< 50 µg/g



Informacje

i* Produkt zawiera lateks z kauczuku naturalnego, który może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne.
 Wyraźne wskazanie, czy rękawice są pudrowane, czy nie, jest obowiązkowe.

EN 455-4:2009

Rękawice medyczne jednorazowego użytku - część 4: Wymagania i badania w celu ustalenia minimalnej trwałości

Test	Wynik
Trwałość	3

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Norma dotycząca rękawic ochronnych, chroniących przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami - część 1: Wymagania w zakresie eksploatacji i terminologii dotyczącej zagrożeń chemicznych.

Test chemiczny	Stopień
K wodorotlenek sodu 40 %	4





P	nadtlenek wodoru 30 %	2
T	formaldehyd 37 %	3

Informacje

Czas przebicia: stopień 1 > 10 Min. | stopień 2 > 30 Min. | stopień 3 > 60 Min. | stopień 4 > 120 Min. | stopień 5 > 240 Min. | stopień 6 > 480 Min.

Niniejsze informacje nie odzwierciedlają rzeczywistego okresu ochrony w danym miejscu pracy, a także nie biorą pod uwagę różnicy między mieszaninami i czystymi chemikaliami.

Odporność na chemikalia została przetestowana w warunkach laboratoryjnych, na podstawie próbek pobranych z wewnętrznej strony dłoni (z wyjątkiem rękawic o minimalnej długości 400 mm, w których testowany był też mankiet) i odnosi się wyłącznie do przetestowanych chemikaliów. Odporność może ulec zmianie, jeśli stosowane są chemikalia w formie mieszaniny.

Każdorazowo należy przetestować, czy rękawice nadają się do stosowania na danym stanowisku pracy, ponieważ warunki na stanowisku mogą odbiegać od warunków panujących podczas testów pod względem temperatury, ścieralności i degradacji.

Rękawice, które były już wcześniej użytkowane, mogą posiadać inne właściwości fizyczne, a w konsekwencji niższą odporność na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych. Rekomendowany okres użytkowania może zostać znacznie skrócony przez czynniki spowodowane kontaktem z chemikaliami, takie jak degradacja, rozciągnięcie, zmiana elastyczności lub przetarcie. W przypadku pracy z agresywnymi chemikaliami, degradacja może być najważniejszym czynnikiem do rozważenia podczas wyboru odpowiednich rękawic ochronnych.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy rękawice nie posiadają wad i uszkodzeń.

Przeznaczony do użytku jednorazowego, nie używać ponownie.

EN ISO 374-2:2019

Rękawice ochronne, chroniące przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami – część 2: Oznaczanie odporności na penetrację

Test	Wynik
Test na przepuszczalność powietrza	Zaliczony

EN ISO 374-4:2019

Rękawice ochronne, chroniące przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami – część 4: Oznaczenie odporności na degradację wywołaną przez chemikalia

Test chemiczny	Degradacja %
K wodorotlenek sodu 40 %	-32,8
P nadtlenek wodoru 30 %	-6,5
T formaldehyd 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Norma dotycząca rękawic ochronnych, chroniących przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami - część 5: Wymagania w zakresie eksploatacji i terminologii dotyczącej zagrożeń wywołanych przez mikroorganizmy.

Test	Wynik
Ochrona przed bakteriami i grzybami	Zaliczony
Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami	Zaliczony



Informacje

Odporność na penetrację została przetestowana w warunkach laboratoryjnych i dotyczy jedynie przebadanych próbek.

VO (EU) 2023/988

Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

VO (EG) 1935/2004

Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.



VO (EU) 10/2011

Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością

Stosowanie

Instrukcja obsługi

Przed zastosowaniem

Należy pamiętać, że produkt zawiera lateks. Przed zastosowaniem produktu należy upewnić się, że jest on dostosowany do potrzeb oraz obszarów zastosowania, a także zaleceń podanych w normach. W razie pytań należy skontaktować się z dostawcą jednorazowych rękawic ochronnych.

Nie należy stosować jednorazowych rękawic ochronnych, jeśli wykazują one wady lub ślady wcześniejszego zastosowania. Jednorazowe rękawice ochronne są przeznaczone wyłącznie do krótkotrwałej pracy z lekkimi chemikaliami.

Użytkowanie

Należy wybrać odpowiedni rozmiar.

Jednorazowe rękawice ochronne chronią jedynie obszar skóry zakryty przez nie. Jeśli podczas pracy wymagana jest ochrona innych części ciała lub dróg oddechowych, należy zastosować dalsze środki ochrony indywidualnej. Należy stosować jedynie środki ochrony indywidualnej zatwierdzone do konkretnego zastosowania. Jeśli podczas pracy wymagana jest ochrona medyczna innych części ciała lub dróg oddechowych, należy zastosować dalsze produkty medyczne. Należy stosować jedynie produkty medyczne dopuszczone do konkretnego zastosowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe dobranie dodatkowych środków ochrony indywidualnej lub dodatkowych produktów medycznych oraz za ich zgodność z normami, dotyczącymi danego zastosowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie okresu przydatności do użytku konkretnych środków ochrony indywidualnej, przy uwzględnieniu ich działania ochronnego oraz komfortu użytkowania. Przy



zastosowaniach medycznych należy używać produktu jedynie w kontakcie z jednym pacjentem/pacjentką. Jeśli wystąpiła kontaminacja środków nie można wykluzywać zmiany lub zmniejszenia ich działania ochronnego. Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać czy produkt nie został uszkodzony. W przypadku uszkodzenia należy natychmiast zmienić jednorazowe rękawice ochronne na nieuszkodzone. W przypadku uszkodzenia lub kontaminacji należy natychmiast zdjąć jednorazowe rękawice ochronne i zutylizować je w sposób zgodny z przepisami.

Uwaga: w przypadku pojawienia się ewentualnych reakcji alergicznych należy natychmiast zaprzestać stosowania. Umyć dokładnie ręce i zastosować odpowiednie środki medyczne.

Wskazówka bezpieczeństwa	Naturalny lateks może powodować reakcje alergiczne.
Utylizacja	Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.
Trwałość	3 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany
Przechowywanie	Chronić przed gorącem, światłem słonecznym, mrozem, wilgocią, ozonem, promieniami rentgenowskimi i ultrafioletowymi. Przechowywać w suchym miejscu. Temperatura przechowywania powinna wynosić pomiędzy 10 °C a 40 °C. Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.
Identyfikowalność	Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu. Karta produktu Wersja 3 ważne od partii 2617 +



Opakowanie

Recykling	Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322. Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Wariant 1

jednostka sprzedaży	1000 sztuka/karton				
Poziom pakowania 1	100 sztuka/Dozownik				
Minimalna ilość zamówienia	1 karton				
Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	rozmiar (S x D)	tolerancja
	40351401	biały	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	biały	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	biały	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	biały	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.

Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do używania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.



LATEX-HANDSKER

Puderfri | Mikrotexturovaná úprava

i* Dette produkt indeholder latex af naturkautsjuk, hvilket kan forårsage allergiske reaktioner inklusive anafylaktiske reaktioner.



PREMIUM





Producent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmærke	care & serve®

Fuldmagter

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

Produktbeskrivelse

Kategori	PREMIUM
Produktbetegnelse	care & serve® PREMIUM wiroMICROGRIP PF Latex-handsker Puderfri Mikrotexturovaná úprava i* Dette produkt indeholder latex af naturkautsjuk, hvilket kan forårsage allergiske reaktioner inklusive anafylaktiske reaktioner.
Produktegenskaber	Puderfri mikro-tekstureret



Materiale

Materiale	Naturlatex
Materialetykkelse	Finger: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Håndflade: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Kant: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Materialets vægt	Størrelse M $\approx 5,8$ g/St. ($\pm 0,2$ g)

Anvendelse

Anvendelsesformål	Beskyttelseshandske til engangsbrug til at forhindre krydskontaminationer mellem brugere og patienter under gennemførelse af medicinske undersøgelser, samt til at forhindre at hændernes overflade kommer i berøring med sundhedsskadelige stoffer og blandinger eller biologiske virkestoffer. Beskyttelsesgraden samt den maksimale anvendelsestid kan udledes af det angivne beskyttelsesniveau i forhold til det testede stof.
Fødevarekontakt	Kortvarig, indirekte kontakt med fødevarer er tilladt.
Anvendelsesområde	Handsker bruges til at forhindre forurening af hænderne på medicinsk personale.
Applikationsgruppe	Brugen er begrænset til dertil uddannede fagfolk. Ikke egnet til brugere med latexallergi.
Patientgruppe	Ikke egnet til patienter med latexallergi. Brug af latexhandsker til neonatal pleje anbefales ikke for at forhindre sensibilisering.
Indikation	Handsker bruges til at forhindre forurening af hænderne på medicinsk personale, 1) i direkte kontakt med blod eller kropsvæsker, slimhinder, ikke-intakt hud og andet potentielt infektiøst materiale 2) i direkte kontakt med patienter, der er koloniseret eller inficeret med patogener, der overføres via kontaktvejen, f.eks. B. VRE, MRSA, RSV eller 3) ved håndtering eller berøring af synligt eller potentielt forurenet udstyr til patientpleje og omgivende overflader.
Kontraindikation	Latex kan forårsage allergiske reaktioner og sensibilisering.
Anvendeshensvisning	Engangsprodukt ikke steril
Begrænsning	Det er alene brugerens ansvar at vurdere, om care & serve® produkterne egner sig til anvendelsen. Producenten påtager sig ikke noget ansvar for ukorrekt anvendelse af care & serve® produkterne. Anvend ikke produktet ved kendt allergi over for latex. Såfremt en risikoenalyse har ført til det resultat, at den anførte beskyttelse IKKE er tilstrækkelig, skal der anvendes en beskyttelsesbeklædning med en højere beskyttende effekt. Ikke egnet til brug sammen med petroleums- eller olieholdige substanser. Ikke egnet til indpakning og opbevaring af fødevarer.
Bemærk	Alle alvorlige hændelser i direkte forbindelse med dette produkt skal rapporteres til producenten og de ansvarlige myndigheder.





Anvendelsesområder	Hospital Plejehjem herunder faggrupper Lægeklinikker Industri farmaindustri Laboratorium Levnedsmiddelforarbejdning HACCP Service Gastronomi HoReSta Rengøring Hygiejne Kosmetik Wellness Skønhedsindustri Hus + have Landbrug Byggeri	
--------------------	---	--

Sundhedshenvisning	Indeholder naturgummilætex, som kan forårsage type IV- og type I-allergi. Hvis der opstår hudirritation eller allergiske reaktioner, skal du straks afbryde brugen og søge læge. Så vidt det er kendt i henhold til den aktuelle teknik, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse.
--------------------	---

Standarder

CE-mærkning

SRN

Basis UDI DI

Medicinsk produkt klasse I i henhold til EU 2017/745

Personligt værneudstyr i kategori III i henhold til EU 2016/425

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

CE-mærkning

CE-mærkningen garanterer fri bevægelighed for produkter og varer inden for det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Det CE-mærkede produkt opfylder de grundlæggende krav i de angivne europæiske regulativer.

EN ISO 21420:2020

EU-standard vedrørende beskyttelseshandsker - almene krav og testprocedurer

Test	Resultat
ph-værdi	Bestået
Bevægelighed	5
Minimumslængde	Længde
Størrelse 7: 230 mm	≈ 240 mm
Størrelse 8: 240 mm	≈ 240 mm
Størrelse 9: 250 mm	≈ 240 mm
Størrelse 10: 260 mm	≈ 240 mm

Informationer

Vær opmærksom på produktoplysningerne og følg brugsanvisningen.

EN 455-1:2022

Medicinske engangshandsker - del 1: Krav til og test af tæthed

vandtæthedstest	Resultat
Tæthed	AQL 1.5

EN 455-2:2015

Medicinske engangshandsker - del 2: Krav til og test af de fysiske egenskaber

Minimumslængde	Længde
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Resultat
Rivstyrke	Bestået

EN 455-3:2015

Medicinske engangshandsker - del 3: Krav til og test af biologisk evaluering

Test	Resultat
Pudderrester	< 2 mg
Ekstraherbare proteiner	< 50 µg/g

Informationer

i* Dette produkt indeholder latex af naturkautsjuk, hvilket kan forårsage allergiske reaktioner inklusive anafylaktiske reaktioner.

En klar indikation af, om handsken er pudret eller pulverfri, er obligatorisk.

EN 455-4:2009

Medicinske engangshandsker - del 4: Krav til og test af mindste holdbarhed

Test	Resultat
Holdbarhed	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Standard vedrørende handsker til beskyttelse mod farlige kemikalier og mikroorganismer - del 1: Terminologi og præstationskrav i forhold til kemiske risici.

Teststof	Level
----------	-------

CE

2777

MD

CLASS I

PPE

CAT. III

www.wiros.de/IFI

AQL

1.5

LATEX

i*

KPT

K	Natriumhydroxid 40 %	4
P	Brintoverilte 30 %	2
T	Formaldehyd 37 %	3

Informationer

Gennembrudstid: Level 1 > 10 min. | Level 2 > 30 min. | Level 3 > 60 min. | Level 4 > 120 min. | Level 5 > 240 min. | Level 6 > 480 min.

Denne information siger intet om varigheden af den faktiske beskyttelse ude på selve arbejdspladsen eller om forskellen mellem blandede og rene kemikalier.

Modstandsdygtigheden over for kemikalier er blevet testet under laboratoriebetingelser og ud fra prøver, der kun er blevet taget fra området på indersiden af hånden (undtagen i tilfælde hvor handsken er 400 mm er længere – i dette tilfælde er handskens krave også blevet testet) og resultatet vedrører udelukkende de kemikalier, der specifikt er testet for. Modstandsdygtigheden kan forandre sig, hvis det pågældende kemikalie indgår i en blanding.

Det anbefales at teste, hvorvidt handskerne egner sig til den tiltænkte anvendelse, eftersom betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra testbetingelserne hvad angår temperatur, slid og nedbrydning.

Hvis beskyttelseshandskerne allerede har været anvendt, kan de grundet forandringer i de fysiske egenskaber udvise en lavere modstandsdygtighed over for farlige kemikalier. Den faktiske anvendelsestid kan forringes betragteligt som følge af berøringen med kemikalier og deraf følgende nedbrydning, form-ændring, optrevling, slitage osv. Ved aggressive kemikalier kan nedbrydningen være den vigtigste faktor at tage hensyn til, når der skal træffes valg af kemikaliebestandige handsker.

Inden anvendelsen skal handskerne kontrolleres for fejl eller mangler af enhver art.

Er kun beregnet til at bruge én gang, må ikke genbruges.

EN ISO 374-2:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer - del 2: Bestemmelse af modstand mod penetration

Test	Resultat
Luft-lækage-test	Bestået

EN ISO 374-4:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer - del 4: Bestemmelse af modstand mod kemisk nedbrydning

Teststof	Nedbrydning %
K Natriumhydroxid 40 %	-32,8
P Brintoverilte 30 %	-6,5
T Formaldehyd 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Direktiv vedrørende handsker til beskyttelse mod farlige kemikalier og mikroorganismer - del 5: Terminologi og præstationskrav i forhold til risici fra mikroorganismer

Test	Resultat
Bakterie- og svampebeskyttelse	Bestået
Bakterie-, svampe- og virusbeskyttelse	Bestået



Informationer

Modstandsdygtigheden over for indtrængning er testet under laboratoriebetingelser og vedrører udelukkende de testede prøver.

VO (EU) 2023/988

Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed

VO (EG) 1935/2004

Forordning vedrørende materialer og genstande af kunststof, som er tiltænkt kontakt med levnedsmidler.



VO (EU) 10/2011

Forordning om plastmaterialer- og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

Anvendelse

Brugsanvisning

Inden brug

Vær opmærksom på, at dette produkt indeholder latex. Inden brug skal du sikre dig, at du har valgt det passende produkt i forhold til dine behov og det tiltænkte anvendelsesområde. Vær opmærksom på bestemmelser i de relevante standarder. Kontakt venligst leverandøren af dine engangshandsker i tilfælde af spørgsmål. Brug aldrig engangshandskerne, hvis de udviser mangler eller allerede er blevet brugt. Engangshandskerne er kun tiltænkt kortvarig brug i forbindelse med milde kemikalier.

Anvendelse

Vælg den passende størrelse.

Engangshandskerne beskytter det område, handskerne dækker. Hvis andre kropsdele eller luftvejene kræver personlig beskyttelse, skal du supplere med yderligere personlige værnemidler. Anvend altid kun personlige værnemidler, der er godkendte til det pågældende anvendelsesområde. Hvis luftvejene eller andre kropsdele også kræver medicinsk beskyttelse, skal du supplere med yderligere medicinske produkter. Anvend altid kun medicinske produkter godkendt til det pågældende anvendelsesområde. Brugeren er alene ansvarlig for at vælge den rigtige kombination af yderligere værneudstyr eller yderligere medicinske produkter, samt overholdelsen af alle nødvendige normstandarder i henhold til anvendelsesformålet.

Du analyserer og fastsætter egenhændigt varigheden af anvendelsen ved hvert brugsstillede. Dette under hensyntagen til beskyttelsesvirkning og anvendelseskomfort.



wiroMICROGRIP PF

Inden for det medicinske område er brugen begrænset til en enkelt patient. Efter kontamination kan en ændring af de angivne præstationsniveauer ikke udelukkes. Kontrollér også regelmæssigt under anvendelsen, at produktet er ubeskadiget. Udskift omgående beskadigede engangshandsker med et nyt og intakt par. Ved urenheder eller skader skal engangshandsken tages af og bortskaffes på korrekt vis.

OBS!: Stands omgående anvendelsen ved mulig allergiske reaktioner. Vask hænderne grundigt, og søg lægehjælp ved behov.

Sikkerhedshenvisning	Naturlatex kan fremkalde allergiske reaktioner.
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.
Holdbarhed	3 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.
Opbevaring	Beskyt mod stærk varme, sollys, frost, fugt, ozon, røntgenstråler og ultraviolet lys. Skal opbevares tørt. Opbevaringstemperaturer mellem 10 °C og 40 °C. Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 3 øvdiq fra charge 2617 +

Emballage

Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.	 \$VerpackG
---------	---	---

www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/>

Variant 1

Salgsenhed	1000 Styk/Kasse				
Emballageniveau 1	100 Styk/Dispenserboks				
Minimumsbestillingsmængde	1 Kasse				
Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (B x L)	Tolerance
	40351401	hvid	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	hvid	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	hvid	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	hvid	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Talangerne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.

Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte produkttegenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.

Med forbehold for fejl.

Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsretteligheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktoagrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.





LATEXHANDSKAR

Puderfri | Mikrotexturerad

i* Denna produkt innehåller naturgummilatex som kan utlösa allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner.



PREMIUM





Tillverkare

Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varumärke	care & serve®

Tillstånd

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

Produktbeskrivning

Kategori	PREMIUM
Produktbeteckning	care & serve® PREMIUM wiroMICROGRIP PF Latexhandskar Pudelfri Mikrotexturerad i* Denna produkt innehåller naturgummilates som kan utlösa allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner.
Produkttegenskaper	Pudelfri Mikrotexturerad



Material

Material	Naturlates
Materialtjocklek	Finger: $\approx 0,13 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Handflata: $\approx 0,10 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Kant: $\approx 0,08 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$)
Materiallets vikt	Storlek M $\approx 5,8 \text{ g/st.}$ ($\pm 0,2 \text{ g}$)


Användning

Användningsområde	Engångsskyddshandske avsedd att förhindra korskontamination mellan användare och patienter vid medicinska undersökningar samt att förhindra att händernas ytskikt kommer i beröring med hälsovådliga ämnen eller blandningar eller med andra skadliga biologiska aktiva substanser. Skyddsnivå och maximal användningstid framgår av den fastställda prestandanivån för varje kontrollerat ämne.
Kontakt med livsmedel	Kortvarig indirekt kontakt med livsmedel är tillåten.
Användningsområde	Handske används för att förhindra kontaminering av medicinsk personal.
Användningsgrupp	Användning inom vården är begränsad till utbildad personal. Inte lämplig för användare med latexallergi.
Patientgrupp	Inte lämpligt för patienter med latexallergi. Användning av latexhandske vid neonatalvård rekommenderas inte för att förhindra sensibilisering.
Indikation	Handske används för att förhindra kontaminering av läkarpersonalens händer, 1) i direkt kontakt med blod eller kroppsvätskor, slemhinnor, icke-intakt hud och annat potentiellt smittsamt material 2) i direktkontakt med patienter som är koloniserade eller infekterade med patogener som överförs via kontaktvägen, t.ex. B. VRE, MRSA, RSV eller 3) vid hantering eller beröring av synlig eller potentiellt kontaminerad utrustning för patientvård och omgivande ytor.
Kontraindikation	Latex kan orsaka allergiska reaktioner och sensibilisering.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk ej steril
Begränsning	Fastläggandet av huruvida plagget är lämpligt för care & serve®-produkter ligger uteslutande på användarens ansvar. Tillverkaren tar inget som helst ansvar för felaktig användning av care & serve®-produkter. Använd inte produkten vid känd latexallergi. Om en riskanalys ådagalägger att det anförda skyddet INTE är tillräckligt, bör skyddskläder med än bättre skyddsegenskaper användas. Inte lämplig för användning med ämnen innehållande petroleum eller olja. Inte lämpligt för packning och förvaring av livsmedel.
Obs	Alla allvarliga händelser i direkt anslutning till denna produkt måste rapporteras till tillverkaren och de ansvariga myndigheterna.
Användningsområden	Sjukhus Äldershem inkl. Expertkretsar





Läkarpraxis
Industrin | Läkemedelsindustrin
Laboratorier
Livsmedelsförädling
HACCP
Service | Gastronomi | HoReCa
Rengöring | Hygien
Kosmetik | Wellness | Skönhetsindustri
Hus + trädgård | Jordbruk | Byggbranschen

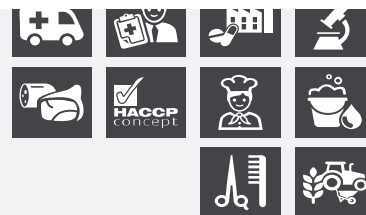

Hälsovarningar

Innehåller naturgummilates, som kan orsaka allergier typ IV och typ I.
Om hudirritation eller allergiska reaktioner uppstår, avbryt användningen omedelbart och uppsök läkare.
Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen när de används i enlighet med avsedd användning.

Standarder

CE-märkning

SRN

Basis UDI DI

Medicinsk produkt av klass I enligt förordning (EU) 2017/745

Personlig skyddsutrustning i kategori III enligt EU 2016/425

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

CE-märkning

CE-märkningen garanterar fri handel med produkter och varor inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den CE-märkta produkten uppfyller de grundläggande kraven i de angivna europeiska förordningarna.

EN ISO 21420:2020

Standard för skyddshandskar – Allmänna krav och testmetoder

Test	Resultat
pH-värde:	Godkänd
Rörlighet	5
Minsta längd	Längd
Storlek 7: 230 mm	≈ 240 mm
Storlek 8: 240 mm	≈ 240 mm
Storlek 9: 250 mm	≈ 240 mm
Storlek 10: 260 mm	≈ 240 mm

Information

Beakta bruksanvisningen och produktinformationen.

EN 455-1:2022

EN 1 Engångshandskar för sjukvård – Del 1: Krav samt provning av hållförmåga

Vattentättestad	Resultat
Täthet	AQL 1.5

AQL

1.5

EN 455-2:2015

EN 2 Engångshandskar för sjukvård – Del 2: Krav på och provning av fysikaliska egenskaper

Minsta längd	Längd
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Resultat
Rivhållfasthet	Godkänd

EN 455-3:2015

EN 3 Engångshandskar för sjukvård – Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering

Test	Resultat
Puderrester	< 2 mg
extraherbara proteiner	< 50 µg/g

Information

i* Denna produkt innehåller naturgummilates som kan utlösa allergiska reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner.

En tydlig indikation på om handsken är pulveriserad eller pulverfri är obligatorisk.

EN 455-4:2009

EN 4 Engångshandskar för sjukvård – Del 4: Krav och provningsmetoder för lagringsegenskaper

Test	Resultat
Hållbarhet	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Standard för skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer – del 1: Terminologi och prestandakrav för kemiska risker

Testkemikalie	Nivå
K Natriumhydroxid 40 %	4
P Väteperoxid 30 %	2

KPT

CE

2777

MD

CLASS I

PPE

CAT. III

www.wiro.do/UFU

LATEX

i*



T Formaldehyd 37 %

3

Information

Genombrottsstid: Nivå 1 > 10 min | Nivå 2 > 30 min | Nivå 3 > 60 min | Nivå 4 > 120 min | Nivå 5 > 240 min | Nivå 6 > 480 min

Denna information upplyser inte om den verkliga skyddsperioden på arbetsplatsen eller skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier.

Beständighet mot kemikalier har utvärderats under laboratorieförhållanden på prover som endast togs från handflatan (utom i det fall då handsken är 400 mm eller längre – i detta fall testas även manschetten) och gäller endast de testade kemikalierna. Beständigheten kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning.

Det rekommenderas att det kontrolleras om handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från dem i typprovet beroende på temperatur, nötning och försämring.

Om skyddshandskar redan har använts kan de erbjuda mindre beständighet mot farliga kemikalier på grund av förändringar i deras fysikaliska egenskaper. Försämring, rörelser, nedbrytning, friktion, etc. som orsakas av kontakt med kemikalier kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För aggressiva kemikalier kan försämringen vara den viktigaste faktorn att beakta när man väljer kemikaliebeständiga handskar.

Före användning måste handskarna kontrolleras avseende eventuella fel eller defekter.

Endast för engångsbruk, ska inte återanvändas.

EN ISO 374-2:2019

Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer – Del 2: Bestämning av penetrationsmotstånd

Test	Resultat
Lufttätetsprovning	Godkänd

EN ISO 374-4:2019

Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer – Del 4: Bestämning av beständighet mot försämring genom kemikalier

Testkemikalie	Försämring %
K Natriumhydroxid 40 %	-32,8
P Väteperoxid 30 %	-6,5
T Formaldehyd 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Standard för skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer – del 5: Terminologi och prestandakrav för risker till följd av mikroorganismer

Test	Resultat
Bakterie- och svampskydd	Godkänd
Bakterie-, svamp- och virussydd	Godkänd

Information

Penetrationsmotståndet har bedömts under laboratorieförhållanden och gäller endast de testade proverna.



VO (EU) 2023/988

EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet

VO (EG) 1935/2004

Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel



VO (EU) 10/2011

Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Användning

Bruksanvisning

Före användning

Observera att produkten innehåller latex. Se till att du har valt rätt produkt för dina behov och användningsområden och följ riktlinjerna i relevanta standarder. Om du har några frågor, kontakta leverantören av din engångsskyddshandske.

Använd inte engångsskyddshandsken ifall den uppvisar några defekter eller redan har använts. Engångsskyddshandskar är, när det gäller arbete med lätta kemikalier, endast avsedda för kortvarigt bruk.

Hantering

Välj rätt storlek för dig.

Engångsskyddshandsken skyddar det område som den täcker. Om det är nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning för att skydda andra kroppsdelar eller luftvägar, komplettera med andra PPE-produkter. Använd endast PPE som godkänts för avsedd användning. Om ett medicinskt skydd av andra kroppsdelar eller luftvägar är nödvändigt, komplettera med andra medicinska produkter. Använd endast medicinska produkter som godkänts för avsedd användning. Användaren är ensamt ansvarig för att kompletterande PPE-produkter eller kompletterande medicinska produkter kombineras på rätt sätt och för att de obligatoriska riktlinjerna i standarderna för varje användningsområde följs. Det är ditt eget ansvar att bestämma användningstiden för respektive användning med hänsyn till skyddseffekten och bärkomforten. Inom sjukvården får produkten inte användas för behandling av mer än en patient. Efter kontaminering kan en förändring av de angivna prestandanivåerna inte uteslutas. Kontrollera även regelbundet under användningen att produkten är intakt. Byt omedelbart ut en skadad engångsskyddshandske mot en intakt. Om engångsskyddshandsken är kontaminerad eller skadad ska den tas av och avfallshanteras korrekt.

Varning: Avbryt genast användningen vid en eventuell allergisk reaktion. Tvätta händerna noggrant och kontakta läkare vid behov.

Säkerhetsanvisning

Naturlatex kan orsaka allergiska reaktioner.



Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshandteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshandteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.
Hållbarhet	3 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.
Förvaring	Skydda mot stark värme, solljus, frost, fukt, ozon, röntgenstrålar och ultraviolett ljus. Förvaras torrt. Lagringstemperatur mellan 10 °C och 40 °C. Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 3 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +



Förpackning

Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.
-------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Varianter 1

Försäljningsenhet	1000 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	100 Antal/Dispenserbox				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (B x L)	Tolerans
	40351401	vit	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	vit	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	vit	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	vit	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.

Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkring om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år. Inmatningsfel och fel förbehållna.

De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.





LATEX-HANSKER

Pudderfritt | Mikro-tekstureert

i* Dette produktet inneholder naturgummilateks, som kan forårsake allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske reaksjoner.



PREMIUM





Produsent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varemerke	care & serve®

Autorisasjoner

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Sveits
--------	---

Produktbeskrivelse

Kategori	PREMIUM
Produktnavn	care & serve® PREMIUM wiroMICROGRIP PF Latex-hansker Pudderfritt Mikro-teksturert i* Dette produktet inneholder naturgummilateks, som kan forårsake allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske reaksjoner.

Produkttegenskaper	Pudderfritt Mikro-teksturert
--------------------	---------------------------------



Materiale

Materiale	Naturlig lateks
Materialstyrke	Finger: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Håndflate: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Rand: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Materialvekt	Størrelse M $\approx 5,8$ g/St. ($\pm 0,2$ g)

Bruk

Bruksområde	Engangs-vernehanske for å unngå kryssforurensning mellom brukere og pasienter ved utførelse av medisinske undersøkelser, samt for å forhindre at hendenes overflate kommer i kontakt med stoffer og blandinger som er helsefarlige eller med skadelige biologiske virkestoffer. Beskyttelseshøyden, så vel som maksimal brukstid, er gitt gjennom det fastsatte ytelsesnivået for hvert enkelt testet stoff.
Matkontakt	Kortvarig indirekte kontakt med matvarer er tillatt.
Bruksområde	Hansker brukes for å forhindre forurensning av hendene til medisinsk personell.
Anvendelsesgruppe	Anvendelse er forbeholdt kvalifisert fagpersonell. Ikke egnet for brukere med latexallergi.
Pasientgruppe	Ikke egnet for pasienter med lateksallergi. For å forhindre sensibilisering, anbefales ikke bruk av latekshansker i nyfødtsykepleien.
Indikasjon	Hansker brukes til å forhindre forurensning av hendene til medisinsk personale, 1) i direkte kontakt med blod eller kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud og annet potensielt smittsomt materiale 2) i direkte kontakt med pasienter som er kolonisert eller smittet med patogener som overføres via kontaktveien, f.eks. B. VRE, MRSA, RSV eller 3) når du håndterer eller berører synlig eller potensielt forurenset pasientomsorgsutstyr og omkringliggende overflater.
Kontraindikasjon	Lateks kan forårsake allergiske reaksjoner og sensibilisering.
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt Ikke-sterile
Begrensning	Å fastslå hvorvidt care & serve®-produkter er egnet for brukerens formål er brukerens eneansvar. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for feil bruk av care & serve®-produkter. Ved latex-allergi vennligst ikke bruk dette produktet. Hvis en risikoanalyse har gitt det resultatet at den angitte beskyttelsen IKKE er tilstrekkelig, bør vernetøy med høyere grad av beskyttelse brukes. Skal ikke anvendes i kontakt med parafin- eller substanser som inneholder olje. Ikke egnet for pakking og oppbevaring av matvarer.
Merk	Alle alvorlige hendelser i direkte forbindelse med dette produktet må rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter.





Bruksområder	Sykehus Aldershjem Bl.a. spesialistgrupper Legekontorer Industri Farmasøytisk industri Laboratorier Bearbeiding av næringsmidler HACCP Service Gastronomi HoReCa Rengjøring Hygiene Kosmetikk Velvære Skjønnhetsindustri Hus & hage Landbruk Anleggsbransjen	
Veiledning ang. helse	Inneholder naturgummilateks, som kan forårsake allergier av type IV og type I. Hvis det oppstår hudirritasjon eller allergiske reaksjoner, må du umiddelbart avbryte bruken, og søke legehjelp. Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer når de brukes i samsvar med tiltenkt bruk.	

Standarder

CE-merking

SRN

Basis UDI DI

Medisinsk produkt av klasse I iht. EU 2017/745

Personlig verneutstyr i kategori III i henhold til EU-forordning 2016/425

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

CE-merking

CE-merkingen garanterer fri bevegelighet av produkter og varer innenfor Det europeiske økonomiske fellesskapet. Det CE-merkede produktet oppfyller de grunnleggende kravene i de europeiske bestemmelsene som er oppgitt.

EN ISO 21420:2020

Standard for vernehansker - generelle krav og testprosedyrer

Test	Resultat
pH-verdi	Bestått
Mobilitet	5
Minimumslengde	Lengde
Størrelse 7: 230 mm	≈ 240 mm
Størrelse 8: 240 mm	≈ 240 mm
Størrelse 9: 250 mm	≈ 240 mm
Størrelse 10: 260 mm	≈ 240 mm

Informasjon

Les og følg informasjonen i produktinformasjonen og bruksanvisningen.

www.wiros.de/IFI

EN 455-1:2022

Medisinske hansker til engangsbruk – del 1: Krav og testing for tetthet

Vann tett	Resultat
Tetthet	AQL 1.5

AQL

1.5

EN 455-2:2015

Medisinske hansker til engangsbruk – del 2: Krav og testing av de fysiske egenskapene

Minimumslengde	Lengde
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Resultat
Rive-kraftige	Bestått

EN 455-3:2015

Medisinske hansker til engangsbruk – del 3: Krav og testing for biologisk evaluering

Test	Resultat
Pulverresistente	< 2 mg
Extraherbare protein	< 50 µg/g

Informasjon

i* Dette produktet inneholder naturgummilateks, som kan forårsake allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske reaksjoner.

Tydelig merking av hvorvidt hansken er pudret eller puddefri er obligatorisk.

LATEX

i*

EN 455-4:2009

Medisinske hansker til engangsbruk – del 4: Krav og testing for fastsettelse av minimal holdbarhet

Test	Resultat
Holdbarhet	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Standard for vernehansker som beskytter mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og ytelseskrav for kjemiske risikoer.

Testkjemikalie	Nivå
K Natriumhydroksyd 40 %	4

KPT



P	Hydrogenperoksyd 30 %	2
T	Formaldehyd 37 %	3

Informasjon

Gjennomsnittstid: Nivå 1 > 10 min. | Nivå 2 > 30 min. | Nivå 3 > 60 min. | Nivå 4 > 120 min. | Nivå 5 > 240 min. | Nivå 6 > 480 min.

Denne informasjonen er ingen angivelse av den faktiske beskyttelsesvarigheten på arbeidsplassen og heller ingen angivelse til bruk ved skille mellom kjemiske blandinger og rene kjemikalier.

Motstandsdyktigheten mot kjemikalier er testet under laboratoriebetingelser på prøver som er tatt fra innsiden av hånden (unntatt for hansker som er lengre enn 400 mm - i dette tilfellet er det også tatt prøver fra mansjetten), og resultatene gjelder utelukkende for de testede kjemikaliene. Motstandsdyktigheten kan avvike fra dette hvis kjemikaliene forekommer i blandinger.

Det anbefales å kontrollere om hanskene er egnet for den tiltenkte bruken, siden betingelsene på arbeidsplassen er avhengig av temperatur, slitasje og degenerering, og kan avvike fra betingelsene testene er utført under.

Hvis vernehanskene allerede er brukt, kan de ha mindre motstandsdyktighet mot farlige kjemikalier på grunn av endringer i de fysiske egenskapene. Degenerering, bevegelser i materialet, slitasje osv. som oppstår ved kontakt med kjemikalier, kan redusere den faktiske brukstiden vesentlig. For aggressive kjemikalier kan degenerering være den viktigste faktoren å ta hensyn til når man skal velge hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier.

Før bruk skal det kontrolleres om hanskene har feil eller mangler.

Er kun beregnet på engangsbruk, får ikke brukes gjentatte ganger.

EN ISO 374-2:2019

Beskyttelseshansker som beskytter mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - del 2: Fastsettelse av motstand mot gjennomtrengning

Test	Resultat
Kontroll av luftlekkasje	Bestått

EN ISO 374-4:2019

Beskyttelseshansker som beskytter mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - del 4: Bestemmelse av motstandsdyktighet mot degenerering på grunn av kjemikalier

Testkjemikalie	Degenerering %
K Natriumhydroksyd 40 %	-32,8
P Hydrogenperoksyd 30 %	-6,5
T Formaldehyd 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Standard for vernehansker som beskytter mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - Del 5: Terminologi og ytelseskrav for risikoer på grunn av mikroorganismer

Test	Resultat
Vern mot bakterier og sopp	Bestått
Vern mot bakterie, sopp og virus	Bestått



Informasjon

Motstandsdyktigheten mot penetrering er vurdert ved laboratoriebetingelser og gjelder utelukkende for de testede prøvene.

VO (EU) 2023/988

Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet

VO (EG) 1935/2004

Direktiv ang. plastmaterialer og -gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer.



VO (EU) 10/2011

Forordning om materialer og gjenstander av kunststoff, som er laget for å komme i kontakt med matvarer.

Bruk

Bruksanvisning

Før bruk

Vennligst vær oppmerksom på at dette produktet inneholder latex. Forsikre deg om at du har valgt riktig produkt for dine behov og bruksområder, og følg kravene i de respektive standarder. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte leverandøren av beskyttelseshanskene dine.

Ikke bruk engangs-beskyttelseshanskene hvis de er mangelfulle eller allerede er brukt. Engangs-beskyttelseshansker er kun beregnet for kortvarig bruk når du arbeider med lette kjemikalier.

Bruk

Velg en størrelse som passer til deg.

Engangs-beskyttelseshansker beskytter området som dekkes av hansken. Hvis personlig beskyttelse av andre deler av kroppen eller luftveiene er nødvendig, legg til ytterligere PSA-produkter. Bruk bare PSA som er godkjent for den tilskattede bruken. Hvis medisinsk beskyttelse av andre deler av kroppen eller luftveiene er nødvendig, må du legge til ekstra medisinsk utstyr. Bruk bare medisinsk utstyr som er godkjent for den tilskattede bruken. Brukeren er alene ansvarlig for riktig bruk av PSA eller medisinsk tilleggsutstyr og overholdelse av de nødvendige spesifikasjonene for hver applikasjon. Du er eneansvarlig for å bestemme varigheten av bruken for hver applikasjon, i hensyn til den beskyttende effekten og bærekraften. I det medisinske feltet er bruken begrenset til en pasient. Etter kontamineringer er det ikke utelukket at det angitte ytelsesnivået blir endret. Sjekk regelmessig under bruk om artikkelen er intakt. Bytt umiddelbart ut en ødelagt beskyttelseshanske med en intakt. I tilfelle forurensning eller skade bør engangshanskene fjernes og kastes på riktig måte.

Forsiktig: Stopp umiddelbart bruken av hanskene ved en allergisk reaksjon. I et slikt tilfelle, vask hendene grundig og søk eventuelt medisinsk hjelp om nødvendig.



Sikkerhetshenvisninger	Inneholder naturlateks som kan forårsake allergiske reaksjoner.
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lovverket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.
Holdbarhet	3 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.
Oppbevaring	Beskyttes mot overdreven varme, sollys, frost, fuktighet, ozon, røntgen og ultrafiolett lys. Skal oppbevares tørt. Oppbevaringstemperatur mellom 10 °C og 40 °C. Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.
Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 3 gyldig fra batch 2617 +



Forpakning

Gjenvinning	Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322. Lever også forpakningen til gjenvinning.
-------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Variant 1

Salgsenhet	1000 Stk./Kartong				
Emballasjenivå 1	100 Stk./Dispenserese				
Minste bestillingsvolum	1 Kartong				
Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (B x L)	Toleranse
	40351401	hvit	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	hvit	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	hvit	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	hvit	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.

Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produkttegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.

Med forbehold om feil og mangler.

Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.

Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.





LATEXOVÉ RUKAVICE

Nepudrované | Mikrotexturovaná úprava

i* Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce včetně anafylaktických reakcí.



PREMIUM





Výrobce

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
SRN	DE-MF-000004956
Obchodní značka	care & serve®

Zmocnění

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švýcarsko
--------	--

Popis výrobku

Kategorie	PREMIUM
Označení výrobku	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Latexové rukavice Nepudrované Mikrotexturovaná úprava i* Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce včetně anafylaktických reakcí.
Vlastnosti výrobku	Nepudrované Mikrotexturovaná úprava



Materiál

Materiál	přírodní latex
Tloušťka materiálu	Prsty: ≈ 0,13 mm (± 0,01 mm) Dlaň: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm) Lem: ≈ 0,08 mm (± 0,01 mm)
Hmotnost materiálu	Velikost M ≈ 5,8 g/ks (±0,2 g)


Použití

Účel použití	Jednorázové ochranné rukavice k zabránění křížové kontaminaci mezi uživatelem a pacientem při provádění lékařských vyšetření a k vyloučení kontaktu povrchu rukou se zdravím ohrožujícími látkami a směsmi nebo se škodlivými biologickými účinnými látkami. Úroveň ochrany i maximální doba nošení vyplývají ze stanoveného výkonnostního stupně daného testovaného materiálu.
Styk s potravinami	Krátkodobý nepřímý styk s potravinami je povolen.
Oblast použití	Rukavice se používají k zabránění kontaminace rukou zdravotnického personálu.
Skupina použití	Použití je omezeno na řádně vyškolené odborníky. Nevhodné pro uživatele s alergií na latex.
Skupina pacientů	Není vhodné pro pacienty s alergií na latex. Používání latexových rukavic v neonatální péči se nedoporučuje, aby se zabránilo senzibilizaci.
Indikace	Rukavice se používají k zabránění kontaminace rukou zdravotnického personálu, 1) v přímém kontaktu s krví nebo tělními tekutinami, sliznicemi, neporušenou kůží a jiným potenciálně infekčním materiálem 2) v přímém kontaktu s pacienty, kteří jsou kolonizováni nebo infikováni patogeny, které se přenášejí kontaktní cestou, např. B. VRE, MRSA, RSV nebo 3) při manipulaci s viditelným nebo potenciálně kontaminovaným zařízením péče o pacienty a okolními povrchy nebo při dotyku s nimi.
Kontraindikace	Latex může způsobit alergické reakce a senzibilizaci.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek nesterilní
Omezení	Stanovení vhodnosti výrobků care & serve® pro použití spadá do výhradní odpovědnosti uživatele. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobků care & serve®. Máte-li alergii na latex, tento produkt prosím nepoužívejte. Pokud bylo na základě analýzy rizik zjištěno, že uvedená ochrana NENÍ dostačující, měl by být použit ochranný oděv s vyšším stupněm ochrany. Není vhodné pro použití s látkami obsahujícími petrolej nebo olej. Nevhodné pro balení a skladování potravin.
Informace	Všechny závažné nehody v přímé souvislosti s tímto výrobkem musí být nahlášeny výrobcí a odpovědným orgánům.
Oblasti použití	Nemocnice Domov důchodců a jiné odborné kruhy





Lékařské ordinace
Průmysl | Farmaceutický průmysl
Laboratoř
Zpracování potravin
HACCP
Služby | Gastronomie | HoReCa
Čištění | Hygiena
Kosmetika | Wellness | Estetický průmysl
Dům a zahrada | Zemědělství | Stavebnictví

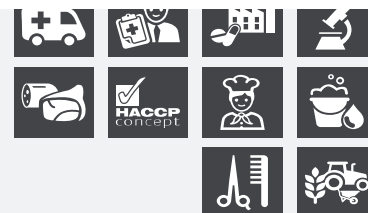

Informace týkající se zdraví Obsahuje přírodní kaučukový latex, který může vyvolat alergie typu IV a typu I.
V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
Podle současného stavu techniky výroby neobsahují žádné toxické, karcinogenní, mutagenní ani reprotoxické látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením.

Standardy

Označení CE

SRN

Basis UDI DI

Zdravotnický prostředek třídy I podle EU 2017/745

Osobní ochranné prostředky kategorie III dle nařízení (EU) č. 2016/425

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

Označení CE

Označení CE zaručuje volný pohyb výrobků a zboží v rámci Evropského hospodářského společenství. Výrobek s označením CE splňuje základní požadavky uvedených evropských nařízení.

EN ISO 21420:2020

Norma týkající se ochranných rukavic – Všeobecné požadavky a metody zkoušení

Test	Výsledek
Hodnota pH	Obstál
Übersetzung bitte noch eintragen	5
Minimální délka	Délka
Velikost 7: 230 mm	≈ 240 mm
Velikost 8: 240 mm	≈ 240 mm
Velikost 9: 250 mm	≈ 240 mm
Velikost 10: 260 mm	≈ 240 mm

Informace

Věnujte pozornost informacím o výrobku a návodu k použití.

EN 455-1:2022

Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 1: Požadavky a zkoušení nepropustnosti

zkouška nepropustnosti	Výsledek
Nepropustnost	AQL 1.5

AQL

1.5

EN 455-2:2015

Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností

Minimální délka	Délka
XS – XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Výsledek
pevnost v tahu	Obstál

EN 455-3:2015

Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení

Test	Výsledek
zbytky pudru	< 2 mg
Extrahovatelné bílkoviny	< 50 µg/g

Informace

i* Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce včetně anafylaktických reakcí.

Je povinné jednoznačné označení, zda je rukavice pudrovaná nebo nepudrovaná.

EN 455-4:2009

Lékařské rukavice pro jednorázové použití – Část 4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti

Test	Výsledek
Životnost	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Norma týkající se ochranných rukavic proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika.

Zkoušená chemická látka	Třída
K hydroxid sodný 40 %	4
P peroxid vodíku 30 %	2

KPT



T formaldehyd 37 %

3

Informace

Doba průniku: Třída 1 > 10 min. | Třída 2 > 30 min. | Třída 3 > 60 min. | Třída 4 > 120 min. | Třída 5 > 240 min. | Třída 6 > 480 min.

Tato informace nevyjadřuje skutečnou dobu trvání ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsí a čistými chemikáliemi.

Protichemická odolnost byla hodnocena v laboratorních podmínkách pouze na vzorcích odebraných z dlaně (s výjimkou případů, kdy je rukavice dlouhá alespoň 400 mm – v takovém případě je testována i manžeta) a vztahuje se pouze na zkoušené chemikálie. Tato odolnost se může lišit, pokud se použijí směsi chemikálií.

Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro předpokládané použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky vlivem teploty, oděru a degradace.

Pokud již byly ochranné rukavice použity, mohou poskytovat menší odolnost proti nebezpečným chemikáliím v důsledku změn fyzikálních vlastností. Degradace, pohyby, obrušování, odírání atd., způsobené kontaktem s chemikálií, mohou významně snížit skutečnou dobu použití. U agresivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem při výběru protichemicky odolných rukavic.

Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nemají vady nebo nedostatky.

Určeno pouze pro jednorázové použití. Nepoužívejte opakovaně.

EN ISO 374-2:2019

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

Test	Výsledek
Zkouška pronikání vzduchu	Obstál

EN ISO 374-4:2019

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi

Zkoušená chemická látka	% degradace
K hydroxid sodný 40 %	-32,8
P peroxid vodíku 30 %	-6,5
T formaldehyd 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Norma týkající se ochranných rukavic proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům – Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů

Test	Výsledek
Ochrana proti bakteriím a houbám	Obstál
Ochrana proti bakteriím, houbám a virům	Obstál



Informace

Odolnost proti penetraci byla hodnocena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na zkoušené vzorky.

VO (EU) 2023/988

Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

VO (EG) 1935/2004

Vyhláška o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami



VO (EU) 10/2011

Nařízení o materiálech a předmětech z plastu určených pro styk s potravinami

Použití

Návod k použití

Před použitím

Upozorňujeme, že tento produkt obsahuje latex. Ujistěte se prosím, že jste zvolili výrobek vhodný pro vaše potřeby a oblasti použití, a věnujte pozornost požadavkům jednotlivých norem. V případě dotazů se obraťte na svého dodavatele jednorázových ochranných rukavic.

Jednorázové ochranné rukavice prosím nenoste, pokud vykazují nedostatky nebo již byly použity. Jednorázové ochranné rukavice jsou určeny pouze pro krátkodobé použití při práci s neagresivními chemikáliemi.

Manipulace

Zvolte prosím vhodnou velikost.

Jednorázové ochranné rukavice chrání oblast, kterou pokrývají. Je-li nutné chránit i jiné části těla nebo dýchací cesty, použijte další OOP. Používejte pouze OOP, které byly schváleny pro daný způsob použití. Je-li nutné při práci ve zdravotnictví chránit i jiné části těla nebo dýchací cesty, použijte další zdravotnické prostředky. Používejte pouze zdravotnické prostředky, které byly schváleny pro daný způsob použití. Výhradně uživatel odpovídá za správnou kombinaci dalších OOP nebo dalších zdravotnických prostředků a za dodržování nezbytných požadavků norem pro daný účel použití. Na vlastní odpovědnost určujete dobu použitelnosti při daném použití s ohledem na účinnost ochrany a pohodlí při nošení. Ve zdravotnictví je použití omezeno na jednoho pacienta/pacientku. V případě kontaminace nelze vyloučit změnu uvedených výkonostních úrovní. Také během používání pravidelně kontrolujte, zda není výrobek poškozen. Poškozené jednorázové ochranné rukavice okamžitě vyměňte za nové. V případě znečištění nebo poškození je nutné jednorázové ochranné rukavice sundat a náležitým způsobem zlikvidovat.

Pozor: Okamžitě přestaňte používat při možných alergických reakcích. Důkladně si umyjte ruce a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní upozornění

Obsažený přírodní latex může způsobovat alergické reakce.



Likvidace	Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.
Životnost	3 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.
Skladování	Chraňte před příliš velkým horkem, slunečním zářením, mrazem, vlhkostí, ozonem, rentgenovými paprsky a ultrafialovým světlem. Skladujte v suchu. Skladovací teplota mezi 10 °C a 40 °C. Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.
Výsledovatelnost	Výsledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu. Informační list výrobku Verze 3 platí od šarže 2617 +



Obal

Recyklace	Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322. Obal prosím předejte k recyklaci.
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Varianta 1

Prodejní jednotka	1000 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	100 kus/Dávkovač				
Minimální objednávková množství	1 Kartón				
Číslo výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (Š × D)	Tolerance
	40351401	bílá	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	bílá	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	bílá	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	bílá	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.

Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.

Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.

Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a užívací práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.





Termékadatlap

wiroMICROGRIP PF



LATEX VÉDŐKESZTYŰ

Hintőpormentes | Érdesített

i* A termék természetes gumilatexet tartalmaz, amely allergiás reakciót, és akár anafilaxiás reakciót is okozhat.



PREMIUM



Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wirosMICROGRIP PF | Version 3 | 27.05.2026

80 / 134



Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
SRN	DE-MF-000004956
Márkanév	care & serve®

Meghatározások

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Svájc
--------	--

Termékleírás

Kategória	PREMIUM
Termék megnevezése	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Latex védőkesztyű Hintőpormentes Érdesített i* A termék természetes gumilátexet tartalmaz, amely allergiás reakciót, és akár anafilaxiás reakciót is okozhat.
Termékjellemzők	Hintőpormentes Érdesített



Anyaga

Anyaga	Természetes latex
Anyagvastagság	Ujjak: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Tenyér: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Él: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Anyag tömege	Pozmip M $\approx 5,8$ g/db ($\pm 0,2$ g)

Használat

Felhasználási cél	Egyszer használatos védőkesztyű a felhasználók és a páciensek közötti keresztszennyeződés megelőzése érdekében az orvosi vizsgálatok végzése során, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy a kézfelület ne érintkezzen egészségre veszélyes anyagokkal vagy keverékekkel, illetve káros hatású biológiai hatóanyagokkal. A védelmi szintet és a maximális viselési időt a vizsgált anyag meghatározott teljesítményszintje alapján határozzák meg.
Élelmiszerrel való érintkezés	Rövid ideig tartó közvetett érintkezés élelmiszerrel megengedett.
Alkalmazási terület	A kesztyűket az orvosi személyzet kezének szennyeződésének megakadályozására használják.
Alkalmazási csoport	A terméket kizárólag megfelelően képzett szakemberek használhatják. Latexallergiás felhasználók esetében a használat tilos.
Pácienscsoport	A latexre nem alkalmas az allergiás páciensek számára. A túlérzékenység elkerülése érdekében a latexkesztyűk használata az újszülöttek gondozása során nem ajánlott.
Indikáció	A kesztyűt az orvosi személyzet kezének szennyeződésének megelőzésére használják, 1) vérrel vagy testnedvekkel, nyálkahártyákkal, nem ép bőrrel és más potenciálisan fertőző anyagokkal közvetlenül érintkezve 2) közvetlen kapcsolatban áll a páciensekkel, akik gyarmatosítottak vagy fertőzöttek olyan kórokozók, amelyek kontakt módon jutnak el, pl. B. VRE, MRSA, RSV vagy 3) láthatóan vagy esetlegesen szennyezett betegellátó berendezés és a környező felületek kezelésekor vagy megérintésekor.
Ellenjavallat	A latex allergiás reakciókat és túlérzékenységet válthat ki.
Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék nem steril
Korlátozás	A care & serve®-termékek alkalmasságának megállapítása a felhasználó kizárólagos felelőssége. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a care & serve®-termékek nem rendeltetésszerű használatáért. Ismert latexallergia esetén ne használja a terméket. Amennyiben egy kockázatelemzés arra az eredményre vezetett, hogy a felhasznált védelem NEM elégséges, magasabb szintű védelmet nyújtó védőruházat használata szükséges. Nem alkalmas olaj- vagy olajtartalmú anyagokkal történő használatra. Nem alkalmas élelmiszer csomagolására és tárolására.



Megjegyzés	A termékkel közvetlenül kapcsolatos minden súlyos eseményről jelenteni kell a gyártónak és a felelős hatóságoknak.									
Felhasználási területek	Kórház időotthon többek között szakmai körök Orvosi rendelők Ipar gyógyszeripar Labor Élelmiszer-feldolgozás HACCP-rendszer Szervizelés gasztronómia HORECA Tisztítás higiénia Szépségápolás wellness szépségipar Ház + kert mezőgazdaság építőipar				         					
Egészségügyi megjegyzés	Természetes kaucsuk-latexet tartalmaz, ami IV. és I. típusú allergiát válthat ki. Bőrirritáció vagy allergiás reakció esetén a használatot azonnal le kell állítani, és orvosi tanácsot kell kérni. A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő, mutagén vagy reprodukív toxicitású anyagokat.									

Szabványok

CE-megjelölés

SRN

Basis UDI DI

Az (EU) 2017/745 rendelet I. csoportjába tartozó orvostechnikai eszköz

III-as kategóriájú egyéni védőfelszerelés az (EU) 2016/425 rendeletének megfelelően

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

CE-megjelölés

A CE-jelölés garantálja a termékek és áruk szabad forgalmazását az Európai Gazdasági Közösségen belül. A CE-jelöléssel ellátott termék megfelel a mindenkor érvényes európai rendeletek alapvető követelményeinek.

EN ISO 21420:2020

Védőkesztyűkre vonatkozó szabvány - általános követelmények és vizsgálati módszerek

Teszt	Eredmény
pH-érték	Megfelelt
Mobilitás	5
Minimális hossz	Hossz
7-es méret: 230 mm	≈ 240 mm
8-as méret: 240 mm	≈ 240 mm
9-es méret: 250 mm	≈ 240 mm
10-es méret: 260 mm	≈ 240 mm

Információk

Vegye figyelembe a termékinformációkat és a használati utasításokat.

EN 455-1:2022

Egyszer használatos orvosi védőkesztyűk – 1. rész: Lyukmentességi követelmények és vizsgálatok

Vízállósági vizsgálat	Eredmény
Szivárgásvizsgálat	AQL 1.5

AQL

1.5

EN 455-2:2015

Egyszer használatos orvosi védőkesztyűk – 2. rész: A fizikai tulajdonságok követelményei és vizsgálata

Minimális hossz	Hossz
XS – XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Teszt	Eredmény
Húzóerő	Megfelelt

EN 455-3:2015

Egyszer használatos orvosi védőkesztyűk – 3. rész: Követelmények és vizsgálat a biológiai értékeléshez

Teszt	Eredmény
Púdermaradványok	< 2 mg
Kioldható proteinek	< 50 µg/g

Információk

i* A termék természetes gumilátxet tartalmaz, amely allergiás reakciót, és akár anafilaxiás reakciót is okozhat.

Kötelező egyértelműen jelezni, hogy a kesztyű hintőporos-e vagy sem.

EN 455-4:2009

Egyszer használatos orvosi védőkesztyűk – 4. rész: Követelmények és vizsgálatok az eltarthatósági időtartam meghatározásához

Teszt	Eredmény
Eltarthatóság	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

A veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok elleni védőkesztyűkre vonatkozó szabvány - 1. rész: A kémiai kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítménykövetelmények.

2777

MD

CLASS I

PPE

CAT. III

www.wiro.de(f)

LATEX

i*

	<table><tr><th>Vizsgálati vegyi anyag</th><th>Szint</th></tr><tr><td>K nátrium-hidroxid 40 %</td><td>4</td></tr><tr><td>P hidrogén-peroxid 30 %</td><td>2</td></tr><tr><td>T formaldehid 37 %</td><td>3</td></tr></table>	Vizsgálati vegyi anyag	Szint	K nátrium-hidroxid 40 %	4	P hidrogén-peroxid 30 %	2	T formaldehid 37 %	3	KPT
Vizsgálati vegyi anyag	Szint									
K nátrium-hidroxid 40 %	4									
P hidrogén-peroxid 30 %	2									
T formaldehid 37 %	3									
Információk Áttörési idő: 1. szint > 10 perc 2. szint > 30 perc 3. szint > 60 perc 4. szint > 120 perc 5. szint > 240 perc 6. szint > 480 perc Ez az információ nem utal a munkahelyi tényleges védelmi időtartamra, valamint a keverékek és a tiszta vegyszerek közötti különbségtételre. A vegyi anyagokkal szembeni ellenállást laboratóriumi körülmények között csak a tenyérrekből vett mintákban értékelték (kivéve azt a esetet, amikor a kesztyű 400 mm vagy annál hosszabb - ebben az esetben a mandzsettát is megvizsgálják), és az csak a vizsgált vegyi anyagokra vonatkozik. Az ellenállás eltérő lehet, ha a vegyi anyagot keverékekben használják. Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a kesztyű megfelel-e rendeltetészerű használatra, mivel a munkahelyi körülmények a lebomlás, a kopás és az elhasználódás függvényében eltérhetnek a típusvizsgálat körülményeitől. Ha már használtak védőkesztyűt, a fizikai tulajdonságaik megváltozása miatt kevésbé tudnak ellenállni a veszélyes vegyi anyagoknak. A vegyi anyagokkal történő érintkezés által okozott lebomlás, mozgás, szálhúzás, sűrűdés, stb. jelentősen csökkentheti a tényleges felhasználási időt. Agresszív vegyi anyagok esetén a lebomlás lehet a legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni, amikor vegyi anyagokkal szemben ellenálló kesztyűt választanak. Használat előtt a kesztyűt ellenőrizni kell, hogy nem áll-e fenn valamilyen hiba vagy hiányosság. Kizárólag egyszeri használatra, ne használja újra.										
EN ISO 374-2:2019	Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen - 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása <table><tr><th>Teszt</th><th>Eredmény</th></tr><tr><td>Levegő szivárgásvizsgálat</td><td>Megfelelt</td></tr></table>	Teszt	Eredmény	Levegő szivárgásvizsgálat	Megfelelt					
Teszt	Eredmény									
Levegő szivárgásvizsgálat	Megfelelt									
EN ISO 374-4:2019	Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen - 4. rész: A vegyszerek általi lebomlási ellenállás meghatározása <table><tr><th>Vizsgálati vegyi anyag</th><th>bomlási %</th></tr><tr><td>K nátrium-hidroxid 40 %</td><td>-32,8</td></tr><tr><td>P hidrogén-peroxid 30 %</td><td>-6,5</td></tr><tr><td>T formaldehid 37 %</td><td>-13,7</td></tr></table>	Vizsgálati vegyi anyag	bomlási %	K nátrium-hidroxid 40 %	-32,8	P hidrogén-peroxid 30 %	-6,5	T formaldehid 37 %	-13,7	
Vizsgálati vegyi anyag	bomlási %									
K nátrium-hidroxid 40 %	-32,8									
P hidrogén-peroxid 30 %	-6,5									
T formaldehid 37 %	-13,7									
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	A veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok elleni védőkesztyűkre vonatkozó szabvány - 5. rész: A mikroorganizmus-kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítménykövetelmények <table><tr><th>Teszt</th><th>Eredmény</th></tr><tr><td>Bakteriális és gombásodás elleni védelem</td><td>Megfelelt</td></tr><tr><td>Bakteriális és gombásodás és vírusok elleni védelem</td><td>Megfelelt</td></tr></table> Információk Az átjárhatósági ellenállást laboratóriumi körülmények között értékelték, és csak a vizsgált mintákra vonatkozik.	Teszt	Eredmény	Bakteriális és gombásodás elleni védelem	Megfelelt	Bakteriális és gombásodás és vírusok elleni védelem	Megfelelt	 VIRUS		
Teszt	Eredmény									
Bakteriális és gombásodás elleni védelem	Megfelelt									
Bakteriális és gombásodás és vírusok elleni védelem	Megfelelt									
VO (EU) 2023/988	988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet									
VO (EG) 1935/2004	Az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakraól szóló rendelet									
VO (EU) 10/2011	Rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakraól									

Alkalmazás

Használati utasítás

Használat előtt

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék latexet tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy az igényeinek és az alkalmazási körnek megfelelő terméket választotta ki, és tartsa be az alkalmazandó szabványok előírásait. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az egyszer használatos védőkesztyű szállítójával.

Ne viselje az egyszer használatos védőkesztyűt, ha hiányosságokat észlel rajta, vagy ha már használta egyszer. Az egyszer használatos védőkesztyűt könnyű vegyipari termékekkel történő, rövid ideig tartó munka során használja.

Kezelés

Válassza ki a megfelelő méretet.

Az egyszer használatos védőkesztyű a kesztyű által lefedett területen nyújt védelmet. Amennyiben egyéb testrészek vagy a légutak egyéni védelmére van szükség, használjon egyéb egyéni védőeszközöket. Az egyéni védőeszközöket kizárólag az előírt célra használja. Amennyiben egyéb testrészek vagy a légutak orvosi védelmére van szükség, használjon egyéb orvostechnikai eszközöket. Az orvostechnikai eszközöket kizárólag az előírt célra használja. Kizárólag a felhasználó felelős a kiegészítő egyéni védőeszközök megfelelő kombinációjáért és a szabványok felhasználási célhoz kapcsolódó szükséges előírásainak betartásáért. Kizárólag a felhasználó felelőssége a védőruházat adott időpontban történő alkalmazásának időtartama a védőhatás és a viselő kényelmének figyelembevételével. Orvosi területen a használat egyetlen



páciensre korlátozódik. Szennyeződés esetén nem zárható ki a megadott teljesítőképességi fokozatok módosulása. A használat során is rendszeresen ellenőrizze a termék épségét. A sérült egyszer használatos védőkesztyűt azonnal cserélje le érintetlenre. Szennyeződések vagy sérülések esetén vegye le az egyszer használatos védőkesztyűt, és az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Figyelem: Lehetséges allergiás reakciók esetén azonnal hagyja abba a termék használatát. Mossa meg alaposan a kezét, és adott esetben vegyen igénybe orvosi segítséget.

Biztonsági figyelmeztetés A benne levő természetes latex allergiás reakciót válthat ki.

Ártalmatlanítás A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.

Eltarthatóság 3 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.

Tárolás Túlzott hőtől, napfénytől, fagytól, nedvességtől, ózontól, röntgensugaraktól és ultraibolya sugárzástól távol tartandó. Száraz helyen tárolandó. Tárolási hőmérséklet 10 °C és 40 °C között. A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.



Visszakövethetőség A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig. Termékadatlap Verzió 3 érvényes ettől a tételtől 2617 +

Csomagolás

Recycling Engedélyezve a VerpackV szerint, licensz-szám: DE1618662887322. Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/>

Változatok 1

Eladási egység 1000 Darab/Karton

1. Csomagolási szint 100 Darab/Adagolódoboz

Minimális rendelési mennyiség 1 Karton

Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Méret (SZ x H)	Tűrés
	40351401	fehér	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	fehér	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	fehér	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	fehér	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm

GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésekre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.

LATEXOVÉ RUKAVICE

Nepúdrované | S mikrotextúrou

i* Tento výrobok obsahuje prírodný kaučuk, ktorý môže vyvolať alergické reakcie vrátane anafylaktických reakcií.

PREMIUM





Výrobca

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
SRN	DE-MF-000004956
Ochranná známka	care & serve®

Oprávnenia

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švajčiarsko
--------	--

Opis výrobku

Kategória	PREMIUM
Označenie výrobku	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Latexové rukavice Nepúdrované S mikrotextrúrou i* Tento výrobok obsahuje prírodný kaučuk, ktorý môže vyvolať alergické reakcie vrátane anafylaktických reakcií.
Vlastnosti výrobku	Nepúdrované S mikrotextrúrou



Materiál

Materiál	Prírodný latex
Hrúbka materiálu	Prsty: ≈ 0,13 mm (± 0,01 mm) Dlaň: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm) Okraj: ≈ 0,08 mm (± 0,01 mm)
Hmotnosť materiálu	Veľkosť M ≈ 5,8 g/ks (± 0,2 g)

Použitie

Účel použitia	Jednorazové ochranné rukavice na zamedzenie vzájomnej kontaminácie medzi používateľom/používateľkou a pacientom/pacientkou počas vykonávania lekárskeho vyšetrenia ako aj na zabránenie kontaktu povrchu ruky so zdravie škodlivými látkami a zmesami ako aj so škodlivými biologickými agensmi. Úroveň ochrany ako aj maximálna dĺžka použitia závisia od zisteného výkonnostného stupňa jednotlivých skúmaných materiálov.
Kontakt s potravinami	Krátkodobý nepriamy kontakt s potravinami je prípustný.
Oblasť použitia	Rukavice sa používajú na zabránenie kontaminácie rúk zdravotníckeho personálu.
Skupina použitia	Použitie je obmedzené na príslušne vyškolených odborníkov. Nevhodné pre používateľov s alergiou na latex.
Skupina pacientov	Nevhodné pre pacientov s alergiou na latex. Použitie latexových rukavíc sa neodporúča v neonatálnej starostlivosti, aby sa zabránilo senzibilizácii.
Indikácia	Rukavice sa používajú na zabránenie kontaminácie rúk zdravotníckeho personálu, 1) v priamom kontakte s krvou alebo telesnými tekutinami, sliznicami, neporušenou pokožkou a iným potenciálne infekčným materiálom 2) v priamom kontakte s pacientmi, ktorí sú kolonizovaní alebo infikovaní patogénmi, ktoré sa prenášajú kontaktnou cestou, napr. B. VRE, MRSA, RSV alebo 3) pri manipulácii s viditeľnými alebo potenciálne kontaminovanými zariadeniami starostlivosti o pacienta a okolitými povrchmi alebo ich dotykom.
Kontraindikácia	Latex môže spôsobiť alergické reakcie a senzibilizáciu.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok nesterilné
Obmedzenie	Za zistenie vhodnosti použitia výrobkov care & serve® je zodpovedný výhradne samotný používateľ. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za neodborné použitie výrobkov care & serve®. Pri známej alergii na latex výrobok, prosím, nepoužívajte. Pokiaľ sa na základe analýzy rizík zistilo, že uvedená ochrana NEPOSTAČUJE, mali by ste použiť ochranný odev s vyšším stupňom ochrany. Nevhodné na použitie s látkami obsahujúcimi petrolej a olej. Nevhodné na balenie a skladovanie potravín.
Upozornenie	Všetky vážne udalosti priamo súvisiace s týmto výrobkom musia byť hlásené výrobcovi a zodpovedným orgánom.
Oblasti použitia	Nemocnica domov dôchodcov a iné odborné odvetvia Lekárske praxe Priemysel Farmaceutický priemysel Laboratórium Spracovanie potravín HACCP



Služby | gastronómia | hotely, reštaurácie, kaviarne
Čistenie | Hygiena
Kozmetika | wellness | skrášovací priemysel
Domácnosť a záhrada | Poľnohospodárstvo | Stavebníctvo



Zdravotné upozornenie

Obsahuje prírodný kaučukový latex, ktorý môže spôsobiť alergie typu IV a typu I.
Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo alergickým reakciám, okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne a mutagénne látky ani látky toxické pre reprodukciu, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím.

Štandardy

Označenie CE

Zdravotnícky výrobok triedy I podľa EU 2017/745
Osobné ochranné prostriedky kategórie III podľa (EÚ) 2016/425



SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

Označenie CE

Označenie CE zaručuje voľný pohyb výrobkov a tovarov v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Výrobok s označením CE zodpovedá základným požiadavkám uvedených európskych nariadení.

EN ISO 21420:2020

Norma o ochranných rukaviciach - Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

Test	Výsledok
Hodnota pH	Vyhovel
Pohyblivosť	5
Minimálna dĺžka	Dĺžka
Veľkosť 7: 230 mm	≈ 240 mm
Veľkosť 8: 240 mm	≈ 240 mm
Veľkosť 9: 250 mm	≈ 240 mm
Veľkosť 10: 260 mm	≈ 240 mm



Informácie

Rešpektujte informácie o výrobku a návod na použitie.

EN 455-1:2022

Zdravotnícke rukavice na jedno použitie - časť 1: Požiadavky a skúšanie na nepremokavosť

Skúška zadržiavania vody	Výsledok
Nepriepustnosť	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Zdravotnícke rukavice na jedno použitie - časť 2: Požiadavky a skúšanie fyzikálnych vlastností

Minimálna dĺžka	Dĺžka
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Výsledok
Sila pretrhnutia	Vyhovel

EN 455-3:2015

Zdravotnícke rukavice na jedno použitie - časť 3: Požiadavky a skúšanie na biologické hodnotenie

Test	Výsledok
Zvyšky púdru	< 2 mg
Extrahovateľné proteíny	< 50 µg/g



Informácie

i* Tento výrobok obsahuje prírodný kaučuk, ktorý môže vyvolať alergické reakcie vrátane anafylaktických reakcií.
Je povinné jednoznačné označenie, či sú rukavice s púdom alebo bez púdu.

EN 455-4:2009

Zdravotnícke rukavice na jedno použitie - časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy minimálnej trvanlivosti

Test	Výsledok
Trvanlivosť	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Norma o ochranných rukaviciach proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom - časť 1: Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre chemické riziká.

Chemikália použitá pri skúške	Trieda
K Hydroxid sodný 40 %	4
P Peroxid vodíka 30 %	2
T Formaldehyd 37 %	3



Informácie

Doba prieniku: Trieda 1 > 10 min. | Trieda 2 > 30 min. | Trieda 3 > 60 min. | Trieda 4 > 120 min. | Trieda 5 > 240 min. | Trieda 6 > 480 min.

Táto informácia nevypovedá o skutočnú dobu trvania ochrany na pracovisku a rozlíšenie medzi zmesami a čistými chemikáliami.

Odolnosť proti chemikáliám bola posúdená v laboratórnych podmienkach na vzorkách odobraných iba z dlane (s výnimkou prípadu, v ktorom je rukavica dlhá 400 mm alebo viac - v tomto prípade bola testovaná aj manžeta) a vzťahuje sa výhradne na skúšané chemikálie. Odolnosť sa môže líšiť, keď sa použije zmes chemikálií.

Odporúčame skontrolovať, či sú rukavice vhodné na plánované použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typovej skúšky vplyvom teploty, oderu a degradácie.

Ak už boli ochranné rukavice použité, môžu poskytovať menšiu odolnosť proti nebezpečným chemikáliám v dôsledku zmien ich fyzikálnych vlastností. Degradácia,



pohyby, vytahovanie vlákien, trenie, atď. spôsobené kontaktom s chemikáliami môžu výrazne znížiť skutočnú dobu použitia. Pri agresívnych chemikáliách môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý musí zohľadnený pri výbere rukavíc odolných proti chemikáliám.
Pred použitím skontrolujte, či rukavice nevykazujú chyby alebo nedostatky.
Určené len na jednorazové použitie, nepoužívajte opakovane.

EN ISO 374-2:2019

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom – časť 2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii

Test	Výsledok
Skúška prieniku vzduchu	Vyhovel

EN ISO 374-4:2019

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom – časť 4: Stanovenie odolnosti proti degradácii chemikáliami

Chemikália použitá pri skúške	Degradácia %
K Hydroxid sodný 40 %	-32,8
P Peroxid vodíka 30 %	-6,5
T Formaldehyd 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Norma o ochranných rukavičkách proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom – časť 5: Terminológia a požiadavky na vyhotovenie pre mikrobiálne riziká

Test	Výsledok
Ochrana proti baktériám a hubám	Vyhovel
Ochrana proti baktériám, hubám a vírusom	Vyhovel

Informácie

Odolnosť proti penetrácii bola posúdená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa výhradne skúšané vzorky.



VO (EU) 2023/988

Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

VO (EG) 1935/2004

Nariadenie o materiáloch a predmetoch z plastu, ktoré sú určené na kontakt s potravinami



VO (EU) 10/2011

Nariadenie o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na styk s potravinami

Použitie

Návod na použitie

Pred použitím

Všimnite si, prosím, že tento výrobok obsahuje latex. Uistite sa, že ste zvolili výrobok vhodný na vaše potreby a oblasti použitia a rešpektujte zadania príslušných noriem. V prípade otázok sa obráťte na dodávateľa vašich jednorazových ochranných rukavíc. Jednorazové ochranné rukavice nepoužívajte, ak vykazujú nedostatky alebo už boli použité. Jednorazové ochranné rukavice sú určené na prácu s ľahkými chemikáliami len na krátkodobé použitie.

Manipulácia

Zvoľte si vhodnú veľkosť.

Jednorazové ochranné rukavice chránia oblasť, ktorú zakrývajú. Ak by bolo potrebné chrániť iné časti tela alebo dýchacie cesty, použite aj ďalšie OOPP. Používajte iba OOPP, ktoré boli schválené na daný účel použitia. Ak by bola potrebná zdravotnícka ochrana iných častí tela alebo dýchacích ciest, použite aj ďalšie zdravotnícke výrobky. Používajte iba zdravotnícke výrobky, ktoré boli schválené na daný účel použitia. Používateľ je sám zodpovedný za správnu kombináciu ďalších OOPP alebo ďalších zdravotníckych výrobkov a za dodržanie potrebných predpisov noriem v závislosti od účelu použitia. Na vlastnú zodpovednosť určujete dobu použitia pri príslušnom použití za zohľadnenia ochranného účinku a pohodlia pri nosení. V zdravotníckej oblasti je použitie obmedzené na jedného pacienta/jednu pacientku. Pri kontaminácii nie je možné vylúčiť zmenu uvedených výkonnostných tried. Aj počas používania pravidelne kontrolujte, či je výrobok nepoškodený. Poškodené jednorazové ochranné rukavice okamžite vymeňte za neporušené. V prípade znečistenia alebo poškodenia by ste mali jednorazové ochranné rukavice vyzliecť a riadne zlikvidovať.

Pozor: Okamžité prerušenie používania pri možných alergických reakciách. Dôkladne si umyte ruky a prípadne vyhľadajte lekársku pomoc.

Bezpečnostné upozornenie

Obsiahnutý prírodný latex môže spôsobiť alergické reakcie.

Likvidácia

Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.

Trvanlivosť

3 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.

Skladovanie

Chránite pred vysokými teplotami, slnečným žiarením, mrazom, vlhkom, ozónom, röntgenovými lúčmi a ultrafialovým svetlom.

Skladujte na suchom mieste.

Teplota skladovania medzi 10 °C a 40 °C.

Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.



Výsledovateľnosť

Výsledovateľnosť vzťahuje sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu.

Informačný list výrobku Verzia 3 platné od šarže 2617 +

Balenie

Recykliacia

Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322.

Obal odovzdajte na recykliáciu.





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/>

Variant 1

Predajná jednotka	1000 Kus/Kartón				
Úroveň balenia 1	100 Kus/Dávkovacia škatuľa				
Minimálne objednané množstvo	1 Kartón				
Číslo výrobkov	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Rozmer (š x d)	Tolerancia
	40351401	biely	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	biely	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	biely	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	biely	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.

Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nekladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.

Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.

Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.



Podatkovni list izdelka

wiroMICROGRIP PF



ROKAVICE IZ LATEKSA

Brez pudra | Z mikroteksturo

i* Ta izdelek vsebuje kavčuk iz naravnega lateksa, ki lahko sproži alergične reakcije, vključno z anafilaktičnimi reakcijami.



PREMIUM



Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wirosMICROGRIP PF | Version 3 | 27.05.2026

90 / 134





Proizvajalec

Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
SRN	DE-MF-000004956
Blagovna znamka	care & serve®

Pooblastila

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švica
--------	--

Opis izdelka

Kategorija	PREMIUM
Opis izdelka	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Rokavice iz lateksa Brez pudra Z mikroteksturo i* Ta izdelek vsebuje kavčuk iz naravnega lateksa, ki lahko sproži alergične reakcije, vključno z anafilaktičnimi reakcijami.
Lastnosti izdelka	Brez pudra Z mikroteksturo



Material

Material	Naravni lateks
Debelina materiala	Prst: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Dlan: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Obroba: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Teža materiala	Velikost M $\approx 5,8$ g/kos ($\pm 0,2$ g)

Uporaba

Namen uporabe	Zaščitna rokavica za enkratno uporabo za preprečevanje navzkrižne kontaminacije med uporabniki/uporabnicami in bolniki/bolnicami med opravljanjem zdravniških pregledov kot tudi za preprečitev stika površine rok z za zdravje škodljivimi snovmi in zmesmi ali škodljivimi biološkimi učinkovinami. Stopnja zaščite in najdaljši dovoljeni čas nošenja sta definirana prek ugotovljene stopnje zmogljivosti glede na preverjen material.
Stik z živili	Dovoljen je kratek posredni stik z živili.
Področje uporabe	Rokavice se uporabljajo za preprečevanje kontaminacije rok medicinskega osebja.
Skupina uporabe	Uporaba je omejena na ustrezno usposobljene strokovnjake. Ni primerno za uporabnike z alergijo na lateks.
Skupina pacientov	Ni primerno za paciente z alergijo na lateks. Uporaba rokavic iz lateksa pri oskrbi novorojenčkov ni priporočena, da se prepreči senzibilizacija.
Indikacija	Rokavice se uporabljajo za preprečevanje kontaminacije rok medicinskega osebja, 1) v neposrednem stiku s krvjo ali telesnimi tekočinami, sluznicami, neokrnjeno kožo in drugimi potencialno nalezljivimi snovmi 2) v neposrednem stiku z bolniki, ki so kolonizirani ali okuženi s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo po kontaktni poti, npr. B. VRE, MRSA, RSV ali 3) pri ravnanju z vidno ali potencialno kontaminirano opremo za nego pacientov ali okoliškimi površinami ali dotiku z njimi.
Kontraindikacija	Lateks lahko pripelje do alergijskih odzivov in senzibilizacije.
Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo nesterilno
Omejitev	Ugotavljanje ustreznosti za uporabo izdelkov care & serve® je v lastni odgovornosti uporabnika. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za neprimerno uporabo izdelkov care & serve®. Če imate alergijo na lateks, prosimo, da tega izdelka ne uporabljate. Če je analiza tveganja pripeljala do rezultata, da navedena zaščita NE zadostuje, potem je treba uporabljati zaščitna oblačila z višjim zaščitnim obnašanjem. Ni primerno za uporabo v kombinaciji s petrolejem ali snovmi, ki vsebujejo olja. Ni primerno za pakiranje in shranjevanje hrane.
Napotek	Vse resne nezgode v neposredni povezavi s tem izdelkom je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnim organom.



Področja uporabe

Bolnišnice | Domovi za ostarele | in druge strokovne ustanove
 Zdravniške ordinacije
 Industrija | Farmacevtska industrija
 Laboratorij
 Predelava živil
 HACCP
 Storitve | Gastronomija | HoReCa
 Čiščenje | Higiena
 Kozmetika | Dobro počutje | Lepotna industrija
 Hiša + vrt | Kmetijstvo | Gradbeništvo



Napotek za zdravje

Vsebuje lateks iz naravnega kavčuka, ki lahko sproži alergije tipa IV in tipa I.
 V primeru draženja kože ali alergijskih reakcij takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč.
 Kolikor je znano glede na trenutno stanje tehnike, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih, mutagenih ali za razmnoževanje strupenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom.

Standardi

Oznaka CE

Medicinski izdelek razreda I v skladu z 2017/745
 Oseba zaščitna oprema kategorije III v skladu z (EU) 2016/425
 DE-MF-000004956
 4051642-wiroMICROGRIPP-7N



SRN

Basis UDI DI

Oznaka CE
 Oznaka CE zagotavlja prost pretok izdelkov in blaga znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Z oznako CE označen izdelek ustreza osnovnim zahtevam navedene evropske uredbe.

EN ISO 21420:2020

Standard o zaščitnih rokavicah - Splošne zahteve in preskusne metode

Test	Rezultat
ph-vrednost	Opravljen
Giblјivost	5
Minimalna dolžina	Dolžina
Velikost 7: 230 mm	≈ 240 mm
Velikost 8: 240 mm	≈ 240 mm
Velikost 9: 250 mm	≈ 240 mm
Velikost 10: 260 mm	≈ 240 mm

Informacije

Upoštevajte informacije o izdelku in navodila za uporabo.



EN 455-1:2022

Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 1. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje tesnjenja

Preverjena odpornost na vodo	Rezultat
Tesnjenje	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 2. del: Zahteve in preskusi za ugotavljanje fizikalnih lastnosti

Minimalna dolžina	Dolžina
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Test	Rezultat
Odpornost proti trganju	Opravljen

EN 455-3:2015

Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 3. del: Zahteve in preskušanje za biološko ovrednotenje

Test	Rezultat
Ostanki pudra	< 2 mg
Proteini, ki jih je mogoče ekstrahirati	< 50 µg/g



Informacije

i* Ta izdelek vsebuje kavčuk iz naravnega lateksa, ki lahko sproži alergične reakcije, vključno z anafilaktičnimi reakcijami.
 Jasna oznaka tega ali je rokavica pudrana ali ne je obvezna.

EN 455-4:2009

Medicinske rokavice za enkratno uporabo - 4. del: Zahteve in preskusi za določanje roka uporabnosti

Test	Rezultat
Rok trajanja	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Standard o zaščitnih rokavicah proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom - del 1: Terminologija in standardi učinkovitosti za kemijska tveganja

Preskusna kemikalija	Stopnja
K Natrijev hidroksid 40 %	4





P	Vodikov peroksid 30 %	2
T	Formaldehid 37 %	3

Informacije

Čas preboja: Stopnja 1 > 10 min. | Stopnja 2 > 30 min. | Stopnja 3 > 60 min. | Stopnja 4 > 120 min. | Stopnja 5 > 240 min. | Stopnja 6 > 480 min.

Te informacije ne zagotavljajo podatkov o dejanskem trajanju zaščite na delovnem mestu in o razlikovanju zmesi in čistih kemikalij.

Odpornost proti kemikalijam je bil ocenjen v laboratorijskih pogojih na vzorcih, ki so bili vzeti zgolj z dlani (razen v primeru, kjer je rokavica dolga 400 mm ali daljša - v tem primeru se prav tako preizkuša tudi zavihek) in se nanaša izključno na preverjene kemikalije. Odpornost je lahko drugačne, če se kemikalija uporablja v zmesi.

Priporočamo preverjanje, če so rokavice primerne za načrtovano uporabo, saj lahko pogoji na delovnem mestu odstopajo glede na temperaturo, obrabo in razgradnjo od tistih pri preizkusu tipa.

Če so bile zaščitne rokavice že uporabljene, lahko na podlagi sprememb njenih fizikalnih lastnosti zagotavljajo nižjo odpornost proti nevarnim kemikalijam. Zaradi razgradnje, gibanja, povlečenih niti, trenja itd. ob dotiku s kemikalijami se lahko dejanski čas uporabe bistveno zniža. Pri agresivnih kemikalijah je lahko razgradnja pomemben dejavnik, katerega je treba upoštevati pri izbiri rokavic, ki so odporne na kemikalije.

Pred uporabo je treba preveriti, da rokavice nimajo napak ali pomanjkljivosti.

Namenjeno samo za enkratno uporabo, ne uporabljajte ponovno.

EN ISO 374-2:2019

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom - 2. del: Odpornost proti penetraciji

Test	Rezultat
Preskus puščanja zraka	Opravljen

EN ISO 374-4:2019

Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom - 4. del: Določilo o odpornosti proti razgradnji zaradi kemikalij

Preskusna kemikalija	Razgradnja %
K Natrijev hidroksid 40 %	-32,8
P Vodikov peroksid 30 %	-6,5
T Formaldehid 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Standard o zaščitnih rokavicah proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom - del 5: Terminologija in zahteve glede učinkovitosti za tveganja zaradi mikroorganizmov

Test	Rezultat
Zaščita pred bakterijami in glivicami	Opravljen
Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi	Opravljen



Informacije

Odpornost proti prodoru je bila preverjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša izključno na preverjene vzorce.

VO (EU) 2023/988

Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov

VO (EG) 1935/2004

Uredba o materialih in izdelkih iz plastike, namenjenih stiku z živili



VO (EU) 10/2011

Uredba o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili

Uporaba

Navodila za uporabo

Pred uporabo

Prosimo upoštevajte, da ta proizvod vsebuje lateks. Prosim, prepričajte se, da ste za vaše potrebe in področja uporabe izbrali primeren izdelek in upoštevajte določila ustreznih standardov. V primeru vprašanj se, prosimo, obrnite na dobavitelja vaših zaščitnih rokavic za enkratno uporabo.

Prosimo, da zaščitnih rokavic za enkratno uporabo ne nosite, če imajo napako ali pa so že bile uporabljene. Rokavice za enkratno uporabo so pri delih z lahкими kemikalijami predvidene samo za kratkotrajno uporabo.

Uporaba

Prosimo, izberite zase primerno velikost. Zaščitne rokavice za enkratno uporabo ščitijo področje, katerega pokrivajo. Če je potrebna zaščita drugih delov telesa ali dihalnih poti, potem uporabite še druge izdelke iz osebne zaščitne opreme in uporabite samo tisto osebno zaščitno opremo, ki je predvidena za predviden namen uporabe. Če je potrebna medicinska zaščita drugih delov telesa ali dihalnih poti, potem uporabite še druge medicinske izdelke, uporabite samo tiste medicinske izdelke, ki so predvideni za predviden namen uporabe. Odgovornost uporabnika je, da se odloči za pravilno kombinacijo dodatne osebne zaščitne opreme ali dodatnih medicinskih pripomočkov in upoštevanje nujnih določil standardov glede na namen uporabe. V lastni odgovornosti določate čas uporabe pri ustrezni uporabi z upoštevanjem zaščitnega učinka in udobja nošenja. Na področju medicinske uporabe, je ta omejena na enega bolnika/bolnico. Po kontaminaciji spremembe navedenih stopenj zmožljivosti ni mogoče izključiti. Tudi med uporabo redno preverjajte ali je izdelek nepoškodovan. Poškodovano rokavico za enkratno uporabo takoj zamenjajte z brezhibno rokavico. Če je umazana in poškodovana, je treba rokavico za enkratno uporabo sneti in jo pravilno odložiti med odpadke.

Pozor: Pri morebitnih alergičnih reakcijah, takoj prenehajte uporabljati. Roke temeljito operite in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Varnostni napotek

Naravni lateks lahko povzroči alergijske reakcije.



Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.
Rok trajanja	3 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.
Skladiščenje	Zaščititi pred vplivom močnega sonca, mrazom, vlago, ozonom, rentgenskimi žarki in ultravijolično svetlobo. Skladiščiti na suhem. Temperatura skladiščenja med 10 °C in 40 °C. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 3 veljavno od serije 2617 +



Embalaža

Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosimo, da embalažo oddate v recikliranje.
--------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Različica 1

Prodajna enota	1000 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	100 kos/Boks za razdeljevanje				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (Š x D)	Toleranca
	40351401	bela	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	bela	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	bela	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	bela	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvodov. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.



Fișa produsului

wiroMICROGRIP PF



MĂNUȘI DIN LATEX

Fără pudră | Mikrotexturovaná úprava

i* Acest produs conține latex din cauciuc natural care poate declanșa reacții alergice inclusiv reacții anafilactice.



PREMIUM





Producător

Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercială	care & serve®

Împuterniciri

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Elveția
--------	--

Descrierea produsului

Categorie	PREMIUM
Denumire produs	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Mănuși din Latex Fără pudră Mikrotexturovaná úprava i* Acest produs conține latex din cauciuc natural care poate declanșa reacții alergice inclusiv reacții anafilactice.
Proprietăți produs	Fără pudră Mikrotexturovaná úprava



Material

Material	Latex natural
Grosimea materialului	Deget: $\approx 0,13 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Suprafața mâinii: $\approx 0,10 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Marginea: $\approx 0,08 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$)
Greutate material	Mărime M $\approx 5,8 \text{ g/buc.}$ ($\pm 0,2 \text{ g}$)

Utilizare

Scopul utilizării	Mănuși de protecție de unică folosință pentru evitarea contaminărilor încrucișate între utilizatori și pacienți la realizarea consultațiilor medicale precum și pentru prevenirea intrării în contact a suprafeței mâinilor cu substanțele periculoase și amestecuri sau cu substanțe biologice dăunătoare. Înălțimea de protecție precum și durata maximă de purtare reies din treapta de eficiență pentru fiecare material testat.
Contactul cu alimentele	Este permis un contact indirect, de scurtă durată, cu produsele alimentare.
Domeniul de aplicare	Mănușile sunt utilizate pentru a preveni contaminarea mâinilor personalului medical.
Categoria de aplicare	Utilizarea este permisă doar pentru personalul instruit corespunzător. Nu este adecvată pentru persoane care suferă de alergii la latex.
Categorie pacienți	Nu este recomandată pentru pacienți cu alergii la latex. Utilizarea mănușilor din Latex în îngrijirea neonatală nu este recomandată pentru a preveni sensibilizarea.
Indicații	Mănușile sunt utilizate pentru a preveni contaminarea mâinilor personalului medical, 1) în contact direct cu sângele sau fluidele corpului, membranele mucoase, pielea neintactă și alte materiale potențial infecțioase 2) în contact direct cu pacienți colonizați sau infectați cu agenți patogeni care se transmit pe calea de contact, de ex. B. VRE, MRSA, RSV sau 3) atunci când manipulați sau atingeți echipamentele de îngrijire a pacientului vizibil sau potențial contaminate și suprafețele înconjurătoare.
Contraindicații	Latexul poate cauza reacții alergice și sensibilizare.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință nesteril
Limitare	Stabilirea caracterului adecvat al utilizării produselor care & serve® reprezintă responsabilitatea utilizatorului. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru o utilizare necorespunzătoare a produselor care & serve®. Măte-li alergii na latex, tento produkt prosim nepoužívejte. În măsura în care analiza riscului a dus la rezultatul potrivit căruia protecția descrisă NU este suficientă, îmbrăcămintea de protecție trebuie utilizată cu foarte mare precauție. Není vhodné pro použití s látkami obsahujícími petrolej nebo olej. Nu sunt adecvate pentru ambalarea și depozitarea alimentelor.
Indicație	Toate incidentele grave legate direct de acest produs trebuie raportate producătorului și autorităților responsabile.





Domenii de utilizare	Spital Azil de bătrâni și alte grupuri de specialitate Cabinete medicale Industrie Industria farmaceutică Laborator Prelucrarea alimentelor HACCP Service Gastronomie HoReCa Curățare Igienă Cosmetică Wellness Industria frumuseții Casa + Grădină Agricultură Construcții	
Indicații de sănătate	Conține latex din cauciuc natural ce poate declanșa alergii de tipul IV și de tipul I. Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice, opriți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului. Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut.	

Standarde

Marcaj CE	Produs medicinala clasa I conform UE 2017/745	CE2777 MDCLASS I PPECAT. III																
SRN	Echipament personal de protecție din categoria III conform standardelor armonizate (EU) 2016/425																	
Basis UDI DI	DE-MF-000004956																	
	4051642-wiroMICROGRIPP-7N																	
	Marcaj CE																	
	Marcajul CE garantează libera circulație a produselor și mărfurilor în interiorul Comunității Economice Europene. Produsul marcat cu CE respectă cerințele de bază ale reglementărilor europene menționate.																	
EN ISO 21420:2020	Norma privind mănușile de protecție - Cerințe generale și procedura de verificare	www.wiros.de/EU																
	<table><tr><th>Test</th><th>Rezultat</th></tr><tr><td>valoare pH</td><td>Promovat</td></tr><tr><td>Mobilitate</td><td>5</td></tr><tr><td>Lungimea minimă</td><td>Lungime</td></tr><tr><td>Mărimea 7: 230 mm</td><td>≈ 240 mm</td></tr><tr><td>Mărimea 8: 240 mm</td><td>≈ 240 mm</td></tr><tr><td>Mărimea 9: 250 mm</td><td>≈ 240 mm</td></tr><tr><td>Mărimea 10: 260 mm</td><td>≈ 240 mm</td></tr></table>	Test	Rezultat	valoare pH	Promovat	Mobilitate	5	Lungimea minimă	Lungime	Mărimea 7: 230 mm	≈ 240 mm	Mărimea 8: 240 mm	≈ 240 mm	Mărimea 9: 250 mm	≈ 240 mm	Mărimea 10: 260 mm	≈ 240 mm	
Test	Rezultat																	
valoare pH	Promovat																	
Mobilitate	5																	
Lungimea minimă	Lungime																	
Mărimea 7: 230 mm	≈ 240 mm																	
Mărimea 8: 240 mm	≈ 240 mm																	
Mărimea 9: 250 mm	≈ 240 mm																	
Mărimea 10: 260 mm	≈ 240 mm																	
	Informații																	
	Se vor respecta informațiile privind produsul și instrucțiunile de utilizare.																	
EN 455-1:2022	Mănuși medicinale de unică folosință - Partea 1: Cerințe și verificare cu privire la etanșeitate	AQL1.5																
	<table><tr><th>zkouška nepropustnosti</th><th>Rezultat</th></tr><tr><td>Etanșeitate</td><td>AQL 1.5</td></tr></table>	zkouška nepropustnosti	Rezultat	Etanșeitate	AQL 1.5													
zkouška nepropustnosti	Rezultat																	
Etanșeitate	AQL 1.5																	
EN 455-2:2015	Mănuși medicinale de unică folosință - Partea 2: Cerințe și verificări referitoare la caracteristicile fizice																	
	<table><tr><th>Lungimea minimă</th><th>Lungime</th></tr><tr><td>XS - XL ≈ 240 mm</td><td>≈ 240 mm</td></tr><tr><th>Test</th><th>Rezultat</th></tr><tr><td>pevnost v tahu</td><td>Promovat</td></tr></table>	Lungimea minimă	Lungime	XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm	Test	Rezultat	pevnost v tahu	Promovat									
Lungimea minimă	Lungime																	
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm																	
Test	Rezultat																	
pevnost v tahu	Promovat																	
EN 455-3:2015	Mănuși medicinale de unică folosință - Partea 3: Cerințe și verificare referitoare la evaluarea biologică	LATEXi*																
	<table><tr><th>Test</th><th>Rezultat</th></tr><tr><td>zbytky pudru</td><td>< 2 mg</td></tr><tr><td>Extrahovatelné bílkoviny</td><td>< 50 µg/g</td></tr></table>	Test	Rezultat	zbytky pudru	< 2 mg	Extrahovatelné bílkoviny	< 50 µg/g											
Test	Rezultat																	
zbytky pudru	< 2 mg																	
Extrahovatelné bílkoviny	< 50 µg/g																	
	Informații																	
	i* Acest produs conține latex din cauciuc natural care poate declanșa reacții alergice inclusiv reacții anafilactice.																	
	Este obligatorie o marcare clară dacă mănușa este pudrată sau fără pudră.																	
EN 455-4:2009	Mănuși medicinale de unică folosință - Partea 4: Cerințe și verificare pentru determinarea datei de valabilitate																	
	<table><tr><th>Test</th><th>Rezultat</th></tr><tr><td>Durată de valabilitate</td><td>3</td></tr></table>	Test	Rezultat	Durată de valabilitate	3													
Test	Rezultat																	
Durată de valabilitate	3																	
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	Norma privind mănușile de protecție împotriva riscurilor chimice și a microorganismelor - Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscuri chimice	KPT																
	<table><tr><th>Substanțe chimice de verificare</th><th>Nivel</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Substanțe chimice de verificare	Nivel															
Substanțe chimice de verificare	Nivel																	

wiroMICROGRIP PF

K	Hidroxid de sodiu 40%	4
P	Peroxid de hidrogen 30%	2
T	Formaldehidă 37%	3

Informații

Timp de performare: Nivel 1 > 10 Min. | Nivel 2 > 30 Min. | Nivel 3 > 60 Min. | Nivel 4 > 120 Min. | Nivel 5 > 240 Min. | Nivel 6 > 480 Min.

Aceste informații nu reprezintă date reale referitoare la durata de protecție la locul de muncă și diferențierea între amestecuri și substanțe chimice pure.

Rezistența împotriva substanțelor chimice a fost evaluată în condiții de laborator pe mostre, care au fost prelevate de pe suprafața interioară a palmei (excepția o face cazul în care mînușa are 400 mm sau este mai lungă - în acest caz se testează și de pe manșetă) și se referă exclusiv doar la substanțele chimice verificate. Rezistența poate fi diferită dacă substanțele chimice sunt folosite într-un amestec.

Se recomandă o verificare pentru a vedea dacă mînușile sunt adecvate pentru utilizarea prevăzută, deoarece condițiile la locul de muncă pot varia în funcție de temperatură, uzură și degradare și de verificarea tipului.

Dacă mînușile au fost deja folosite, acestea pot oferi o rezistență redusă datorită modificărilor caracteristicilor fizice împotriva substanțelor chimice periculoase.

Degradarea, mișcările, semnele de uzură frecarea etc. cauzate prin contactul cu substanțele chimice se poate reduce durata efectivă de utilizare. În cazul substanțelor chimice agresive, degradarea poate fi cel mai important factor care trebuie luat în considerare la alegerea mînușilor rezistente la substanțele chimice.

Înainte de utilizare mînușile trebuie verificate cu privire la orice tip de uzură sau deteriorări.

Doar de unică folosință, nu se reutilizează.

EN ISO 374-2:2019

Mînuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor – Partea 2: Determinarea rezistenței la penetrare

Test	Rezultat
Verificare scurgere aer	Promovat

EN ISO 374-4:2019

Mînuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor – Partea 4: Determinarea rezistenței la degradare cu produse chimice

Substanțe chimice de verificare	Degradarea %
K Hidroxid de sodiu 40%	-32,8
P Peroxid de hidrogen 30%	-6,5
T Formaldehidă 37%	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Norma privind mînușile de protecție împotriva riscurilor chimice și a microorganismelor - Partea 5: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscuri cauzate de microorganisme

Test	Rezultat
Protecția împotriva bacteriilor și a ciupercilor	Promovat
Protecția împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor	Promovat



Informații

Rezistența împotriva penetrării a fost evaluată în condiții de laborator și se referă în mod exclusiv la mostrele verificate.

VO (EU) 2023/988

Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului

VO (EG) 1935/2004

Regulament privind materialele și obiectele din plastic care sunt prevăzute pentru a intra în contact cu alimentele.



VO (EU) 10/2011

Regulament privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Utilizare

Instrucțiuni de utilizare

Před použitím

Upozorňujeme, že tento produkt obsahuje latex. Ujistěte se prosím, že jste zvolili výrobek vhodný pro vaše potřeby a oblasti použití, a věnujte pozornost požadavkům jednotlivých norem. V případě dotazů se obraťte na svého dodavatele jednorázových ochranných rukavic.

Jednorázové ochranné rukavice prosím nenoste, pokud vykazují nedostatky nebo již byly použity. Jednorázové ochranné rukavice jsou určeny pouze pro krátkodobé použití při práci s neagresivními chemikáliemi.

Manipulace

Zvolte prosím vhodnou velikost.

Jednorázové ochranné rukavice chrání oblast, kterou pokrývají. Je-li nutné chránit i jiné části těla nebo dýchací cesty, použijte další OOP. Používejte pouze OOP, které byly schváleny pro daný způsob použití. Je-li nutné při práci ve zdravotnictví chránit i jiné části těla nebo dýchací cesty, použijte další zdravotnické prostředky. Používejte pouze zdravotnické prostředky, které byly schváleny pro daný způsob použití. Výhradně uživatel odpovídá za správnou kombinaci dalších OOP nebo dalších zdravotnických prostředků a za dodržování nezbytných požadavků norem pro daný účel použití. Na vlastní odpovědnost určujete dobu použitelnosti při daném použití s ohledem na účinnost ochrany a pohodlí při nošení. Ve zdravotnictví je použití omezeno na jednoho pacienta/pacientku. V případě kontaminace nelze vyloučit změnu uvedených výkonostních úrovní. Také během používání pravidelně kontrolujte, zda není výrobek poškozen. Poškozené jednorázové ochranné rukavice okamžitě vyměňte za nové. V případě znečištění nebo poškození je nutné jednorázové ochranné rukavice sundat a náležitým způsobem zlikvidovat.

Pozor: Okamžitě přestaňte používat při možných alergických reakcích. Důkladně si umyjte ruce a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.



Indicație de siguranță	Latexul conținut în mod natural poate provoca reacții alergice.
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.
Durată de valabilitate	3 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.
Depozitare	A se proteja de căldura puternică, acțiunea razelor solare, îngheț, umiditate, ozon, raze Röntgen și lumină ultravioletă. Depozitare uscată Temperatura de depozitare între 10 °C și 40 °C. Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.
Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 3 valabil de la lotul 2617 +



Ambalaj

Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Variantă 1

Unitate de vânzare	1000 bucată/Carton				
Strat de ambalaj 1	100 bucată/Cutie de dozare				
Cantitate minimă de comandă	1 Carton				
Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Mărime (l x L)	Toleranță
	40351401	alb	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	alb	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	alb	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	alb	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.

Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.

Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.



wiroMICROGRIP PF

LUVAS DE LÁTEX

Sem pó | Micro-texturizada

i* Este produto contém látex de borracha natural, que pode causar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas.



PREMIUM



Fabricante

Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercial	care & serve®

Autorizações

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suíça
--------	--

Descrição do produto

Categoria	PREMIUM
Designação do produto	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Luvas de látex Sem pó Micro-texturizada i* Este produto contém látex de borracha natural, que pode causar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas.
Características do produto	Sem pó Micro-texturizada



Material

Material	Látex natural
espessura do material	Dedo: ≈ 0,13 mm (± 0,01 mm) Superfície da mão: ≈ 0,10 mm (± 0,01 mm) Orla: ≈ 0,08 mm (± 0,01 mm)
Peso do material	Rozmiar M ≈ 5,8 g/un. (± 0,2 g)


Utilização

Uso pretendido	Luva de proteção descartável para evitar a contaminação cruzada entre utilizadores e pacientes ao realizar exames médicos e impedir que a superfície das mãos entre em contacto com substâncias e misturas perigosas para a saúde ou com agentes biológicos nocivos. O nível de proteção e o tempo máximo de uso são determinados pelo nível de desempenho para cada substância testada.
Contacto com alimentos	É permitido um contacto indireto breve com os alimentos.
Área de aplicação	Luvas são usadas para evitar a contaminação das mãos do pessoal médico.
Grupo de aplicação	A utilização é restrita a profissionais devidamente formados. Não adequado para utilizadores com uma alergia ao látex.
Grupo de pacientes	Não é adequado para pacientes com uma alergia ao látex. O uso de luvas de látex nos cuidados neonatais não é recomendado para evitar uma sensibilização.
Indicação	Luvas são usadas para evitar a contaminação das mãos da equipe médica, 1) em contato direto com sangue ou fluidos corporais, membranas mucosas, pele não intacta e outro material potencialmente infeccioso 2) em contato direto com pacientes que são colonizados ou infectados com patógenos que são transmitidos através da rota de contato, por exemplo, B. VRE, MRSA, RSV ou 3) ao manusear ou tocar no equipamento de cuidado do paciente de forma visível ou potencialmente contaminada e nas superfícies ao redor.
Contraindicação	O látex pode provocar reações alérgicas e sensibilização.
Indicação de utilização	Produto descartável. não estéril
Limitação	A avaliação da adequabilidade dos produtos care & serve® é da inteira responsabilidade do utilizador. O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela utilização inadequada dos produtos care & serve®. Em caso de uma alergia conhecida ao latex, não utilize este produto. Se uma análise de risco chegar à conclusão que a proteção mencionada NÃO é suficiente, deve ser usado um vestuário de proteção com um comportamento de proteção superior. Não é apropriado à utilização com substâncias que contenham petróleo ou óleo. Não é adequado para embalar e armazenar alimentos.
Nota	Todos os incidentes graves em conexão direta com este produto devem ser relatados ao fabricante e às autoridades responsáveis.



Áreas de aplicação

Hospitais | lares da terceira idade | e outros meios profissionais
Consultórios médicos
Indústria | Indústria farmacêutica
Laboratório
Processamento de alimentos
HACCP
Serviços | gastronomia | HoReCa
Limpeza | Higiene
Cosmética | spas | indústria da beleza
Casa + Jardim | Agricultura | Construção civil

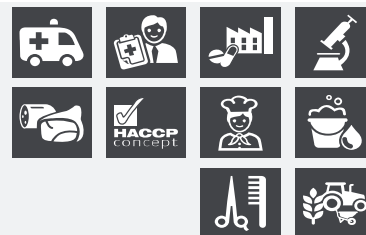

Indicação sobre a saúde

Contém látex de borracha natural, que pode causar alergias do tipo IV e do tipo I.
Se ocorrerem irritações cutâneas ou reações alérgicas, interrompa imediatamente a utilização e procure aconselhamento médico.
Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena, mutagénica ou reprodutivamente tóxica quando utilizados de acordo com a utilização prevista.

Normas

Marcação CE

Dispositivo médico de classe I de acordo com a norma UE 2017/745
Equipamento de proteção individual da categoria III de acordo com a resolução (UE) 2016/425

SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

Marcação CE

A marcação CE garante a livre circulação de produtos e mercadorias dentro da Comunidade Económica Europeia. O produto com a marca CE cumpre os requisitos essenciais dos regulamentos europeus especificados.



EN ISO 21420:2020

Norma sobre luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de teste

Teste	Resultado
Valor pH	Aprovado
Mobilidade	5
Comprimento mínimo	Comprimento
Tamanho 7: 230 mm	≈ 240 mm
Tamanho 8: 240 mm	≈ 240 mm
Tamanho 9: 250 mm	≈ 240 mm
Tamanho 10: 260 mm	≈ 240 mm

Informações

Observe as informações e instruções de uso do produto.



EN 455-1:2022

Luvas médicas para uso único - Parte 1: Requisitos e ensaio à estanquidade

Verificação de retenção de água	Resultado
Estanquidade	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Luvas médicas para uso único - Parte 2: Requisitos e ensaios às propriedades físicas

Comprimento mínimo	Comprimento
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Teste	Resultado
Resistência ao rasgo	Aprovado

EN 455-3:2015

Luvas médicas para uso único - Parte 3: Requisitos e ensaios para a avaliação biológica

Teste	Resultado
Resíduos de pó	< 2 mg
Proteínas extraíveis	< 50 µg/g



Informações

i* Este produto contém látex de borracha natural, que pode causar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas.
É obrigatória uma indicação explícita, se a luva possui pó ou é isenta de pó.

EN 455-4:2009

Luvas médicas para uso único - Parte 4: Requisitos e ensaios para determinação da validade mínima

Teste	Resultado
Validade	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Norma sobre luvas de proteção contra produtos químicos perigosos e microrganismos - Parte 1: Terminologia e requisitos de desempenho para riscos químicos.

Substância química de ensaio	Nível
------------------------------	-------



K	hidróxido de sódio 40%	4
P	peróxido de hidrogênio 30%	2
T	Formaldeído 37%	3

Informações

Tempo de avanço: Nível 1 > 10 Min. | Nível 2 > 30 Min. | Nível 3 > 60 Min. | Nível 4 > 120 Min. | Nível 5 > 240 Min. | Nível 6 > 480 Min.

Esta informação não especifica o tempo real de proteção no local de trabalho e a distinção entre misturas e produtos químicos puros.

A resistência a produtos químicos foi avaliada em condições de laboratório em amostras colhidas apenas na palma da mão (exceto no caso em que a luva é de 400 mm ou mais - nesse caso, o manguito também é testado) e refere-se exclusivamente a os produtos químicos testados. A resistência pode ser diferente se o produto químico for usado em uma mistura.

Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, pois as condições do local de trabalho podem diferir daquelas do teste de tipo, dependendo da temperatura, abrasão e degradação.

Se já foram usadas luvas de proteção, elas podem oferecer menos resistência a produtos químicos perigosos devido a alterações em suas propriedades físicas.

Degradação, movimento, arrasto, atrito, etc. causados pelo contato com produtos químicos podem reduzir significativamente a vida útil real. Com produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ser considerado na escolha de luvas resistentes a produtos químicos.

As luvas devem ser verificadas quanto a falhas ou defeitos antes do uso.

Concebido apenas para uma utilização única, não volte a utilizar.

EN ISO 374-2:2019

Luvas de proteção contra substâncias químicas e microrganismos - Parte 2: Determinação da resistência à penetração

Teste	Resultado
Teste de fuga de ar	Aprovado

EN ISO 374-4:2019

Luvas de proteção contra substâncias químicas e microrganismos - Parte 4: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos

Substância química de ensaio	Degradação %
K hidróxido de sódio 40%	-32,8
P peróxido de hidrogênio 30%	-6,5
T Formaldeído 37%	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Norma sobre luvas de proteção contra produtos químicos perigosos e microrganismos - Parte 5: Terminologia e requisitos de desempenho para riscos de microrganismos

Teste	Resultado
Proteção bacteriana e fúngica	Aprovado
Proteção bacteriana e fúngica e viral	Aprovado

**Informações**

A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e se aplica somente às amostras testadas.

VO (EU) 2023/988

Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos

VO (EG) 1935/2004

Regulamento relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios

**VO (EU) 10/2011**

Regulamento sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contato com alimentos

Utilização**Instruções de utilização****Antes da utilização**

Tenha em atenção, que este produto contém latex. Certifique-se de ter selecionado o produto certo para as suas necessidades e áreas de aplicação e cumpra as especificações das normas relevantes. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o fornecedor da sua luva de proteção descartável.

Não use a luva de proteção descartável se esta apresentar defeitos ou já tiver sido usada. As luvas de proteção descartáveis são destinadas apenas ao uso de curto prazo em trabalhos com produtos químicos leves.

Manipulação

Escolha o tamanho certo para si.

A luva de proteção descartável protege a área coberta com ela. Caso seja necessário proteger outras partes do corpo ou do trato respiratório, faça uso de EPIs adicionais e use apenas EPIs aprovados para o uso pretendido. Caso seja necessário proteger outras partes do corpo ou do trato respiratório, faça uso de outros dispositivos médicos e utilize apenas dispositivos médicos aprovados para o uso pretendido. O utilizador é o único responsável pela combinação correta de EPIs ou dispositivos médicos adicionais e pela conformidade com as especificações das normas exigidas para cada aplicação. É o único responsável por determinar a vida útil do respetivo uso, tendo em consideração o efeito protetor e o conforto. No campo da medicina, o uso é limitado a um paciente. Após a contaminação, uma alteração nos níveis de desempenho especificados não pode ser excluída. Além disso, verifique regularmente durante o uso se o item está intacto. Substitua imediatamente uma luva de proteção descartável danificada por uma luva intacta. Se contaminada ou danificada, a luva de proteção descartável deve ser removida e adequadamente eliminada.

Atenção: Interromper de imediato a utilização em caso de possíveis reações alérgicas. Lave muito bem as mãos e eventualmente recorra a ajuda médica.

Folha de dados do produto

wiroMICROGRIP PF



Nota de Segurança	O látex natural contido pode causar reações alérgicas.
Eliminação	Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.
Validade	3 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.
Armazenagem	Proteger contra o calor forte, radiação solar, geada, humidade ozono, raios X e luz ultravioleta. Armazenar a seco. Temperatura de armazenamento entre 10 °C e 40 °C. Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.
Rastreabilidade	Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém Folha de dados do produto Versão 3 Válido a partir do lote 2617 +



Embalagem

Reciclagem	Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322. Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.
------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Variante 1

Unidade de venda	1000 unidade/Cartão				
Nível de embalagem 1	100 unidade/Caixa dispensadora				
Quantidade mínima	1 Cartão				
Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (L x C)	Tolerância
	40351401	brancas	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	brancas	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	brancas	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	brancas	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.

As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei. Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.

Erros ortográficos e equívocos reservados.

As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.



Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wiromicrogrip PF | Version 3 | 27.05.2026



Gaminio duomenų lapas

wiroMICROGRIP PF



LATEKSO PIRŠTINĖS

Nepudruota | Mikro tekstūra

i* Šiame gaminyje yra natūralaus kaučiuko latekso, kuris gali sukelti alergines ir anafilaksines reakcijas.



PREMIUM





Gamintojas

Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
SRN	DE-MF-000004956
Prekiniai ženklai	care & serve®

Įgaliojimai

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveicarija
--------	---

Gaminio aprašymas

Kategorija	PREMIUM
Gaminio pavadinimas	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Latekso pirštinės Nepudruota Mikro tekstūra i* Šiame gaminyje yra natūralaus kaučiuko latekso, kuris gali sukelti alergines ir anafilaksines reakcijas.
Gaminio savybės	Nepudruota Mikro tekstūra



Medžiaga

Medžiaga	Natūralus lateksas
Medžiagos storis	Pirštas: $\approx 0,13 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Delnas: $\approx 0,10 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Kraštas: $\approx 0,08 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$)
Medžiagos svoris	M dydis $\approx 5,8 \text{ g/vnt.}$ ($\pm 0,02 \text{ g}$)

Naudojimas

Naudojimo paskirtis	Vienkartinė apsauginė pirštinė skirta tam, kad būtų išvengta kryžminės taršos tarp naudotojo / naudotojų ir paciento / pacienčių atliekant medicinines apžiūras taip pat siekiant išvengti, kad plaštakų paviršius nesiliestų prie sveikatai kenksmingų medžiagų ir mišinių arba prie kenksmingų biologiškai aktyvių medžiagų. Apsaugomo ploto aukštis ir ilgiausia dėvėjimo trukmė priklauso nuo bandytos medžiagos nustatyto veiksmingumo lygio.
Kontaktas su maisto produktais	Leidžiamas trumpalaikis, netiesioginis kontaktas su maisto produktais.
Naudojimo sritis	Pirštinės naudojamos siekiant užkirsti kelią medicinos personalo rankoms.
Naudojimo grupė	Naudoti gali tik tinkamai apmokyti specialistai. Netinka naudotojams, alergiškiems lateksui.
Pacientų grupė	Netinka, kai pacientai turi alergiją lateksui. Siekiant išvengti sujaudinimo latekso pirštinių nerekomenduojama naudoti prižiūrint naujagimius.
Indikacija	Pirštinės naudojamos siekiant užkirsti kelią medicinos personalo rankoms, 1) tiesiogiai liečiasi su krauju ar kūno skysčiais, gleivinėmis, nepažeista oda ir kita potencialiai infekcine medžiaga 2) tiesiogiai bendraujant su pacientais, kurie yra kolonizuoti arba užkrėsti kontakto keliu perduodamais patogenais, pvz. B. VRE, MRSA, RSV arba 3) dirbant ar liečiant matomą ar galimai užterštą paciento priežiūros įrangą ir aplinkinius paviršius.
Kontraindikacija	Lateksas gali sukelti alerginių reakcijų sujaudinti.
Naudojimo nurodymas	Vienkartinis gaminy nesterilus
Apribojimai	Už tinkamumą naudoti „care & serve®“ gaminius atsako tik naudotojas. Gamintojas jokiu būdu neprisima atsakomybės už netinkamą „care & serve®“ gaminių naudojimą. Jei žinote, kad esate alergiškas lateksui, gaminio geriau nenaudokite. Jei rizikos analizė parodė, kad nurodytos apsaugos NEPAKANKA, turėtumėte naudoti apsauginius drabužius su didesne apsauga. Netinka naudoti esant kontaktui su naftos ir alyvos turinčiomis substancijomis. Netinka pakuoti ir saugoti maisto produktus.
Nurodymas	Apie visus rimtus incidentus, susijusius su šiuo gaminiu, būtina pranešti gamintojui ir atsakingoms institucijoms.



Naudojimo sritys

Ligoninė | Slaugos namai | ir kiti specialistai
Gydytojų kabinetai
Gamtybos | farmacijos pramonė
Laboratorija
Maisto produktų apdorojimas
HACCP
Paslaugos | Gastronomija | HoReCa
Valymas | Higiena
Kosmetika | Sveikatingumas | Grožio pramonė
Buitis + sodas | žemės ūkis | statybos sektorius



Nurodymai dėl sveikatos

Sudėtyje yra natūralaus kaučiuko latekso, galinčio sukelti IV ir I tipo alergijas.
Jei sudirginama oda ar pasireiškia alerginės reakcijos, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų reprodukcijai medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį.

Standartai

CE ženklas

Medicininis I klasės gaminytis pagal ES 2017/745
III kategorijos asmeninės apsaugos priemonės pagal ES 2016/425
DE-MF-000004956
4051642-wiroMICROGRIP-7N



SRN

Basis UDI DI

CE ženklas
CE ženklas užtikrina laisvą gaminių ir prekių judėjimą Europos
ekonominėje bendrijoje. CE ženklą pažymėtas gaminytis atitinka esminius nurodytų Europos reglamentų reikalavimus.

EN ISO 21420:2020

Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai

Bandymas	Rezultatas
pH reikšmė	Išlaikytas
Judėjimas	5
Mažiausias ilgis	Ilgis
7 dydis: 230 mm	≈ 240 mm
8 dydis: 240 mm	≈ 240 mm
9 dydis: 250 mm	≈ 240 mm
10 dydis: 260 mm	≈ 240 mm

Informacija

Laikykites nurodymų, pateiktų informacijoje apie gaminį ir jo naudojimo instrukcijoje.



EN 455-1:2022

Vienkartinės medicininės pirštinės. 1 dalis. Skylių suradimas. Reikalavimai ir tikrinimas

Bandymas vandens pralaidumui	Rezultatas
Tankis	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Vienkartinės medicininės pirštinės. 2 dalis. Fizikinių savybių reikalavimai ir tikrinimas

Mažiausias ilgis	Ilgis
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Bandymas	Rezultatas
Plešimo jėga	Išlaikytas

EN 455-3:2015

Vienkartinės medicininės pirštinės. 3 dalis. Biologinio įvertinimo reikalavimai ir bandymai

Bandymas	Rezultatas
Pudros likučiai	< 2 mg
ekstrahuojami proteinai	< 50 µg/g

Informacija

i* Šiame gaminyje yra natūralaus kaučiuko latekso, kuris gali sukelti alergines ir anafilaksines reakcijas.
Būtinai tinkamas ženklinamas, ar pirštinės pudruotos ar be pudros.



EN 455-4:2009

Vienkartinės medicininės pirštinės. 4 dalis. Mažiausias laikymo trukmės reikalavimai ir bandymai

Bandymas	Rezultatas
Tinkamumas naudoti	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminija ir apsaugos nuo cheminės rizikos charakteristikų reikalavimai.

Išbandytos cheminės medžiagos	Lygis
K Natrio hidroksidas 40 %	4



wiroMICROGRIP PF

P	Vandenilio peroksidas 30 %	2
T	Formaldehidas 37 %	3

Informacija

Irimo laikas: 1 lygis > 10 min. | 2 lygis > 30 min. | 3 lygis > 60 min. | 4 lygis > 120 min. | 5 lygis > 240 min. | 6 lygis > 480 min.

Ši informacija nepateikia duomenų apie faktinę apsaugos trukmę darbo vietoje ir apie mišinių ir grynų cheminių medžiagų skaidymąsi.

Atsparumas cheminėms medžiagoms nustatytas laboratorinėmis sąlygomis bandymą atliekant tik delno plote (išskyrus 400 mm ilgio ir ilgesnes pirštines; tokių buvo bandomas ir jų rankogalis) ir tik su išbandytais cheminėmis medžiagomis. Atsparumas gali kisti, jei naudojamas cheminių medžiagų mišinys.

Rekomenduojame patikrinti, ar pirštinės tinkamos naudoti, nes sąlygos darbo vietoje gali kisti priklausomai nuo temperatūros, trinties ir blogėjimo ir dėl to gali pasikeisti tipinis bandymas.

Jei apsauginės pirštines jau panaudojote, dėl pasikeitusių jų fizikinių savybių jų atsparumas pavojingos cheminėms medžiagoms gali pasikeisti. Dėl sąlyčio su cheminėmis medžiagomis atsiradęs blogėjimas, judesiai, išsitraukę siūlai, nusitrynimai ir kt. gali ženkliai sutrumpinti faktinę naudojimo trukmę. Naudojant agresyvias chemines medžiagas blogėjimas yra svarbiausias faktorius, į kurį reikia atsižvelgti, kai renkatės cheminių medžiagų poveikiui atsparias pirštines.

Prieš naudodami pirštines patikrinkite, ar nėra broko ir trūkumų.

Tik vienkartiniam naudojimui, pakartotinai nenaudoti.

EN ISO 374-2:2019

Apsauginės pirštines nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. 2 dalis: atsparumo prasiskverbimui nustatymas

Bandymas	Rezultatas
Laidumo orui bandymas	Išlaikytas

EN ISO 374-4:2019

Apsauginės pirštines nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. 4 dalis: atsparumo cheminiam skilimui nustatymas

Išbandytos cheminės medžiagos	Blogėjimas %
K Natrio hidroksidas 40 %	-32,8
P Vandenilio peroksidas 30 %	-6,5
T Formaldehidas 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Apsauginės pirštines nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 5 dalis. Terminija ir apsaugos nuo

Bandymas	Rezultatas
Apsauga nuo bakterijų ir grybelio	Išlaikytas
Apsauga nuo bakterijų, grybelio ir virusų	Išlaikytas



Informacija

Atsparumas įsiskverbimui buvo nustatytas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik išbandytiems bandiniams.

VO (EU) 2023/988

Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos

VO (EG) 1935/2004

Potvarkis dėl medžiagų ir objektų, pagamintų iš plastiko, kurie skirti liestis su maisto produktais



VO (EU) 10/2011

Potvarkis dėl medžiagų ir daiktų iš plastiko, skirtų sąlyčiui su maisto produktais

Naudojimas

Naudojimo instrukcija

Prieš naudojimą

Atkreipkite dėmesį, kad šiame gaminyje yra latekso. Įsitikinkite, kad pasirinktė jūsų poreikius ir naudojimo sritį atitinkantį gaminį ir laikykitės konkrečiame standarte pateiktos informacijos. Jei kiltų klausimų, kreipkitės į savo vienkartinį apsauginių pirštinių tiekėją.

Nedėvėkite vienkartinį apsauginių pirštinių, jei jos pažeistos arba jau buvo naudotos. Vienkartinės apsauginės pirštinės skirtos naudoti, kai dirbama su nestipriais chemikalais ir naudojamos tik trumpai.

Naudojimas

Pasirinkite tinkamą dydį.

Vienkartinės apsauginės pirštinės apsaugo tik jomis uždengtą paviršių. Jei reikalinga kitų kūno dalių arba kvėpavimo takų apsauga, naudokite papildomas AAP, naudokite tik tokias AAP, kurios leidžiamos naudoti numatyto tikslu. Jei reikalinga kitų kūno dalių arba kvėpavimo takų medicininė apsauga, naudokite papildomus medicininius gaminius ir tik tokius, kuriuos leidžiama naudoti tokiu tikslu. Tik naudotojas atsako už tinkamą AAP arba papildomų medicininių gaminių derinį ir privalomos informacijos standartuose pagal naudojimo paskirtį laikymąsi. Konkrečiu naudojimo atveju tik jūs patys sprendžiate dėl naudojimo trukmės, atsižvelgdami į apsauginį poveikį ir dėvėjimo komfortą. Jei pirštines naudojate medicinos srityje, jas keiskite naujomis po darbo su kiekvienu pacientu / paciente. Po užteršimo gali pasikeisti nurodyta atsparumo klasė. Naudodami reguliariai tikrinkite, ar gaminyje nepažeistas. Naudodami reguliariai tikrinkite, ar gaminyje nepažeistas. Pažeistas vienkartinės apsauginės pirštinės nedelsdami pakeiskite tinkamomis. Užterštas arba sugadintas vienkartinės apsauginės pirštinės nusimaukite ir tinkamai utilizuokite.

Dėmesio: pastebėjus alergines reakcijas, tuoj pat nutraukite naudojimą. Gerai nusiplaukite rankas ir jei reikia, kreipkitės medicininės pagalbos.

Saugos nurodymas

Sudėtyje esantis natūralus lateksas gali sukelti alergines reakcijas.

wiroMICROGRIP PF

Utilizavimas	Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.
Tinkamumas naudoti	3 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.
Laikymo sąlygos	Saugoti nuo didelio karščio, saulės spindulių, šalnos, drėgmės, ozono, rentgeno spindulių ir ultravioletinių spindulių poveikio. Laikykite sausoje vietoje. Laikymo temperatūra nuo 10 °C iki 40 °C. Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.
Atsekamumas	Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo. Gaminio duomenų lapas Versija 3 galioja nuo prekės partijos 2617 +



Pakuotė

Perdirbama	Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322. Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.
------------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Variantas 1

Pardavimo pakuotė	1000 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	100 vienetas/Dalytuvas				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (P x I)	Tolerancija
	40351401	balta	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	balta	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	balta	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	balta	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use UDI	Lygių pakuotė 1 UDI	Lygių pakuotė 2 UDI	Kartono dėžutė UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.

Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.

Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.

Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas. Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiais.



Produkta datu lapa

wiroMICROGRIP PF



LATEKSA CIMDI

Bez pūdera | Smalkas tekstūras

i* Šis izstrādājums satur dabīgā kaučuka lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas.



PREMIUM





Ražotājs

Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
SRN	DE-MF-000004956
Preču zīme	care & serve®

Atļaujas

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveice
--------	---

Produkta apraksts

Kategorija	PREMIUM
Produkta nosaukums	care & serve® PREMIUM wiroMICROGRIP PF Lateksa cimdi Bez pūdera Smalkas tekstūras i* Šis izstrādājums satur dabīgā kaučuka lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas.
Produkta īpašības	Bez pūdera Smalkas tekstūras



Materiāls

Materiāls	Dabīgais latekss
Materiāla biezums	Pirksti: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Plauksta: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Mala: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Materiāla svars	Izmērs M $\approx 5,8$ g/gab. ($\pm 0,2$ g)

Lietošana


Lietošanas mērķis	Vienreizējas lietošanas aizsargcimdš, kas paredzēts, lai novērstu krustenisku kontamināciju starp lietotājiem un pacientiem, veicot medicīniskus izmeklējumus, kā arī lai izvairītos no plaukstas vīrusa saskares ar veselībai kaitīgām vielām un maisījumiem vai kaitīgām bioloģiski aktīvajām vielām. Aizsardzības pakāpe, kā arī maksimālais valkāšanas ilgums izriet no katram pārbaudītajam materiālam noteiktās veiktspējas klases.
Saskare ar pārtikas produkt	Ir pieļaujama īslaicīga netieša saskare ar pārtiku.
Lietošanas joma	Cimdus izmanto, lai novērstu medicīniskā personāla roku piesārņošanu.
Lietošanas grupa	Lietošana ir atļauta tikai atbilstoši apmācītiem speciālistiem. Nav piemērots lietotājiem ar alerģiju uz lateksu.
Pacientu grupa	Nav piemērots pacientiem, kuri varētu būt alerģija pret lateksu. Jaundzimušo aprūpē ir ieteicams izvairīties no lateksa cimdus lietošanas, lai novērstu sensibilizāciju.
Indikācija	Cimdus izmanto, lai novērstu medicīniskā personāla roku piesārņošanu, 1) tiešā saskarē ar asinīm vai ķermeņa šķidrumiem, gļotādām, neskatoties ādu un citiem potenciāli infekcioziem materiāliem 2) tiešā kontaktā ar pacientiem, kuri ir kolonizēti vai inficēti ar patogēniem, kuri tiek pārnesti kontakta ceļā, piem. B. VRE, MRSA, RSV vai 3) rīkojoties vai pieskaroties redzami vai potenciāli piesārņotām pacienta aprūpes iekārtām un apkārtējām virsmām.
Kontrindikācija	Latekss var izraisīt alerģiskas reakcijas un sensibilizāciju.
Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts nav sterili
Ierobežojums	Par care & serve® produktu pielietojuma atbilstības noteikšanu atbildīgs ir vienīgi pats lietotājs. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu vai nelietpratīgu care & serve® produktu lietošanu. Ja zināt, ka jums ir alerģija pret lateksu, lūdz, nelietojiet šo produktu. Ja riska analīzes rezultāti apliecina, ka minētā aizsardzība NAV pietiekama, ir jāizmanto aizsargapģērbs ar augstāku aizsardzības pakāpi. Nav paredzēts lietošanai ar petroleju vai eļļu saturošām vielām. Nav piemērots pārtikas produktu iepakojšanai un uzglabāšanai.
Norāde	Par visiem nopietniem incidentiem, kas saistīti tieši ar šo produktu, jāziņo ražotājam un atbildīgajām iestādēm.





Pielietojuma jomas

Slimnīca | Veco ļaužu pansionāts | u.c. speciālistu aprindas
 Ārstu prakses
 Rūpniecība | farmaceutiskā rūpniecība
 Laboratorijas
 Pārtikas produktu apstrāde
 HACCP
 Pakalpojumi | Gastronomija | HoReCa
 Tīrīšana | higiēna
 Kosmētika | Labsajūta | Skaistumkopšanas industrija
 Māja + dārzs | lauksaimniecība | būvniecība

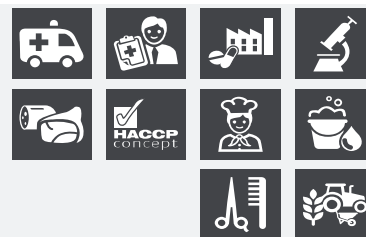

Norāde attiecībā uz veselību

Satur dabīgā kaučuka lateksu, kas var izraisīt IV un I tipa alerģiju.

Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību.

Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam.

Standarti

CE marķējums

I klases medicīniskais izstrādājums saskaņā ar ES 2017/745
 III kategorijas individuālie aizsarglīdzekļi saskaņā ar ES 2016/425

SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroMICROGRIP-7N



CE marķējums

CE marķējums garantē izstrādājumu un preču brīvu apriti Eiropas

EN ISO 21420:2020

Standarts par aizsargcimdiem – Vispārīgas prasības un pārbaudes metodes

Pārbaude	Rezultāts
pH līmenis	Sekmīga
Kustīgums	5
Minimālais garums	Garums
7. izmērs: 230 mm	≈ 240 mm
8. izmērs: 240 mm	≈ 240 mm
9. izmērs: 250 mm	≈ 240 mm
10. izmērs: 260 mm	≈ 240 mm

Informācija

Nemiet vērā informāciju par produktu un lietošanas instrukciju.



EN 455-1:2022

Vienreizējās lietošanas medicīniskie cimdi – 1.daļa: Prasības un pārbaude, vai tajos nav caurumu

Ūdens izturības pārbaude	Rezultāts
Hermētiskums	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Vienreizējās lietošanas medicīniskie cimdi – 2.daļa: Prasības un fizikālo īpašību testēšana

Minimālais garums	Garums
XS – XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Pārbaude	Rezultāts
Plēšanas spēks	Sekmīga

EN 455-3:2015

Vienreizējās lietošanas medicīniskie cimdi – 3.daļa: Prasības un testi bioloģiskai novērtēšanai

Pārbaude	Rezultāts
Pūdera atlikumi	< 2 mg
Ekstrahējamās olbaltumvielas	< 50 µg/g

Informācija

*Šis izstrādājums satur dabīgā kaučuka lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas.

Obligāti ir skaidri jānorāda, vai cimdi ir pārklāti ar pūderi, vai nē.



EN 455-4:2009

Vienreizējās lietošanas medicīniskie cimdi – 4.daļa: Prasības un testēšana glabāšanas laika noteikšanai

Pārbaude	Rezultāts
Derīguma termiņš	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Standarts par aizsargcimdiem pret ķīmikālijām un mikroorganismiem – 1. daļa: Terminoloģija un īpašību prasības attiecībā uz ķīmisku apdraudējumu

Pārbaudes ķīmikālija	Līmenis
K Nātrija hidroksīds 40 %	4
P Ūdeņraža peroksīds 30 %	2





T Formaldehids 37 %

3

Informācija

Materiāla pārrāvuma laiks: 1. līmenis > 10 min | 2. līmenis > 30 min | 3. līmenis > 60 min | 4. līmenis > 120 min | 5. līmenis > 240 min | 6. līmenis > 480 min

Šī informācija neatspoguļo faktisko aizsardzības ilgumu darba vietā un atšķirības starp maisījumiem un tīrām ķīmikālijām.

Noturība pret ķīmikālijām ir novērtēta laboratorijas apstākļos, ņemot paraugus tikai no plaukstas iekšējās virsmas (izņemot gadījumu, kad cimdus ir 400 mm vai garāks – tādā gadījumā tiek pārbaudīti arī piedurkne), un attiecas tikai uz pārbaudē izmantotajām ķīmikālijām. Noturība var būt citāda, ja ķīmikālija tiek lietota maisījumā.

Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam, jo apstākļi darba vietā var atšķirties no tipa pārbaudes apstākļiem atkarībā no temperatūras, nodiluma un degradācijas.

Ja aizsargcimdi jau ir lietoti, cimdus sniegtā aizsardzība pret ķīmikālijām var būt pasliktināta fizikālo īpašību izmaiņu dēļ. Kustības, aizķeršanās, berze, degradācija, kuru izraisa saskare ar ķīmikālijām, utt. var būtiski samazināt faktisko lietošanas laiku Kodīgu ķīmikāliju gadījumā degradācija var būt svarīgākais faktors, kas jāņem vērā, izvēloties cimdus aizsardzībai pret ķīmikālijām.

Pirms lietošanas jāpārbauda, vai cimdiem nav nekādu trūkumu vai bojājumu.

Paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Neizmantojot atkārtoti.

EN ISO 374-2:2019

Aizsargcimdi pret ķīmikālijām un mikroorganismiem – 2. daļa: Caurduršanas pretestības noteikšana

Pārbaude	Rezultāts
Gaisa noplūdes pārbaude	Sekmīga

EN ISO 374-4:2019

Aizsargcimdi pret ķīmikālijām un mikroorganismiem – 4. daļa: Noturība pret ķīmikāliju izraisītu degradāciju

Pārbaudes ķīmikālija	Degradācija %
K Nātrija hidroksīds 40 %	-32,8
P Ūdeņraža peroksīds 30 %	-6,5
T Formaldehīds 37 %	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Standarts par aizsargcimdiem pret ķīmikālijām un mikroorganismiem – 5. daļa: Terminoloģija un īpašību prasības attiecībā uz mikroorganismu radītu apdraudējumu

Pārbaude	Rezultāts
Aizsardzība pret baktērijām un sēnītēm	Sekmīga
Aizsardzība pret baktērijām, sēnītēm un vīrusiem	Sekmīga



Informācija

Noturība pret iekļūšanu ir pārbaudīta laboratorijas apstākļos un attiecas tikai uz pārbaudītajiem paraugiem.

VO (EU) 2023/988

Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu

VO (EG) 1935/2004

Regula par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem



VO (EU) 10/2011

Direktīva par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

Lietošana

Lietošanas instrukcija

Pirms lietošanas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis produkts satur lateksu. Lūdzu, pārliecinieties, ka izvēlētais produkts ir piemērots jūsu vajadzībām un lietošanas jomām, un ņemiet vērā attiecīgajos standartos ietvertos priekšrakstus. Jautājumu gadījumā vērsieties pie sava vienreizējās lietošanas aizsardzības cimdus piegādātāja.

Nevalkājiet vienreizējās lietošanas aizsardzības cimdus, ja tam ir manāmi trūkumi vai tas jau ir lietots. Strādājot ar vieglām ķīmikālijām, vienreizējās lietošanas aizsargcimdi ir piemēroti tikai īslaicīgai lietošanai.

Rīcība

Izvēlieties jums piemērotu izmēru. Vienreizējās lietošanas aizsardzības cimdi aizsargā vietas, kuras tie nosedz. Ja ir nepieciešama citu ķermeņa daļu vai elpceļu aizsardzība, izmantojiet papildu individuālos aizsarglīdzekļus, un lietojiet tikai individuālos aizsarglīdzekļus, kuri ir atļauti paredzētajam lietojumam. Ja ir nepieciešama citu ķermeņa daļu vai elpceļu aizsardzība, izmantojiet papildu individuālos aizsarglīdzekļus, un lietojiet tikai individuālos aizsarglīdzekļus, kuri ir atļauti paredzētajam lietojumam. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par papildu individuālo aizsarglīdzekļu vai papildu medicīnisku izstrādājumu pareizu kombinēšanu un standartos ietverto nepieciešamo priekšrakstu ievērošanu atkarībā no pielietošanas sfēras. Jūs esat atbildīgs par lietošanas ilguma noteikšanu attiecīgā lietojuma ietvaros, ņemot vērā aizsardzības īpašības un valkāšanas komfortu. Medicīnas nozarē ir atļauta pielietošana tikai vienam pacientam. Ja notiek kontaminācija, nevar izslēgt tai sekojošas norādīto lietošanas īpašību izmaiņas. Arī lietošanas laikā regulāri pārbaudiet, vai prece nav bojāta. Ja vienreizējās lietošanas aizsardzības cimdus ir bojāts, nekavējoties aizstājiet to ar nebojātu cimdus. Ja vienreizējās lietošanas aizsardzības cimdus ir netīrs vai bojāts, tas ir jānoveļk un jālikvidē piemērotā veidā.

Uzmanību: nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja rodas iespējamās alerģiskas reakcijas. Rūpīgi nomazgājiet rokas un nepieciešamības gadījumā lūdziet medicīnisku palīdzību.



Drošības norāde	Dabīgais latekss var izraisīt alerģiskas reakcijas.
Utilizācija	Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzejošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.
Derīguma termiņš	3 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.
Glabāšana	Sargāt no pārmērīga karstuma, saules gaismas, sala, mitruma, ozona, rentgena starojuma un ultravioletās gaismas iedarbības. Glabājiet sausā vietā. Glabāšanas temperatūra no 10°C līdz 40°C. Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.
Izsekojamība	Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai. Produkta datu lapa Versija 3 spēkā no partijas 2617 +



Iepakojums

Pārstrāde	Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322. Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Variants 1

Pārdošanas vienība	1000 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	100 Gab./izsniegšanas kastīte				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (P x G)	Pielaide
	40351401	balti	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	balti	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	balti	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	balti	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Preces numurs	Unit of Use UDI	Iepakojuma līmenis 1 UDI	Iepakojuma līmenis 2 UDI	Kartona kaste UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Izmēru, svara, stiprības un pielaistu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.

Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.

Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.

Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktogrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.





Информационен лист за продукта

wiroMICROGRIP PF



ЛАТЕКСОВИ РЪКАВИЦИ

Без пудра | Микро-текстурирана

i* Този продукт съдържа естествен каучуков латекс, който може да причини алергични реакции, включително анафилактични реакции.



PREMIUM



Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wirosMICROGRIP PF | Version 3 | 27.05.2026

115 / 134





Производител

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Търговска марка	care & serve®

Упълномощавания

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцария
--------	--

Описание на продукта

Категория	PREMIUM
Наименование на продукта	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Латексови ръкавици Без пудра Микро-текстурирана i* Този продукт съдържа естествен каучуков латекс, който може да причини алергични реакции, включително анафилактични реакции.
Характеристики на продукт	Без пудра Микро-текстурирана



Материал

Материал	Естествен латекс
Дебелина на материала	Пръсти: $\approx 0,13 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Длан: $\approx 0,10 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Ръб: $\approx 0,08 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$)
Тегло на материала	Размер M $\approx 5,8 \text{ g/St.}$ ($\pm 0,2 \text{ g}$)

Употреба

Употреба по предназначение	Защитна ръкавица за еднократна употреба за предотвратяване на кръстосано замърсяване между потребители и пациенти при извършването на медицински прегледи, както и за предотвратяване на това, повърхността на ръцете да влиза в контакт с опасни за здравето материали и смеси или с вредни биологични активни вещества. Нивото на защита, както и максималната продължителност на носене се определят от определената степен на ефективност в зависимост от изпитвания материал.
Контакт с хранителни продукти	Допуска се краткотраен индиректен контакт с хранителни продукти.
Област на приложение	Ръкавиците се използват за предотвратяване на замърсяване на ръцете на медицинския персонал.
Група на приложение	Употребата е ограничена до използване от специалисти със съответното образование. Не са подходящи за потребители с алергия към латекс.
Група пациенти	Не е подходящо за пациенти с алергия към латекс. Използването на латексови ръкавици в неонаталната грижа не се препоръчва, за да се предотврати получаване на чувствителност.
Показание	Ръкавиците се използват за предотвратяване на замърсяване на ръцете на медицинския персонал, 1) при директен контакт с кръв или телесни течности, лигавици, ненарушена кожа и други потенциално инфекциозни материали 2) при пряк контакт с пациенти, които са колонизирани или заразени с патогени, които се предават по контактният път, напр. Б. VRE, MRSA, RSV или 3) при работа или докосване на видимо или потенциално замърсено оборудване за грижа за пациента и околните повърхности.
Противопоказание	Латексът може да доведе до алергични реакции и чувствителност.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба нестерилни
Ограничение	Установяването на пригодността за употреба на продукти care & serve® е еднолична отговорност на потребителя. Производителят не поема никаква отговорност за неправилна употреба на продуктите care & serve®. При известна алергия към латекс, моля не използвайте този продукт. Ако анализ на риска е довел до резултата, че посочената защита НЕ е достатъчна, тогава трябва да се използва защитно облекло с по-висока защитна способност. Продуктът не е подходящ за употреба със съдържащи нефт или масло субстанции. Не са подходящи за опаковане и съхранение на хранителни продукти.
Указание	Всички сериозни инциденти във връзка с този продукт трябва да бъдат докладвани на производителя и на отговорните органи.



Области на приложение

Болница | Дом за възрастни | и др. специализирани кръгове
 Лекарски практики
 Индустрия | Фармацевтична индустрия
 Лаборатория
 Преработка на хранителни продукти
 HACCP
 Сервиз | Гастрономия | HoReCa
 Почистване | Хигиена
 Козметика | Уелнес | Индустрия за красота
 Дом и градина | Селско стопанство | Строителство



Указание за здравето

Съдържа естествен каучуков латекс, който може да причини алергии тип IV и тип I.
 При кожни раздразнения или алергични реакции спрете незабавно употребата и потърсете лекарска помощ.
 Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродуктивните способности вещества, ако се използват според предназначението им.

Стандарти

CE маркировка

Медицински продукт от клас I съгласно EC 2017/745
 Лични предпазни средства от категория III съгласно EC 2016/425
 DE-MF-000004956
 4051642-wiroMICROGRIPP-7N



SRN

Basis UDI DI

CE маркировка

Маркировката CE гарантира свободното движение на продукти и стоки в рамките на Европейското икономическо пространство. Обозначеният с маркировка CE продукт съответства на основните изисквания на посочените европейски разпоредби.

EN ISO 21420:2020

Стандарт за защитни ръкавици - Общи изисквания и методи за изпитване

Тест	Резултат
pH стойност	Издържан
Подвижност	5
Минимална дължина	Дължина
Размер 7: 230 mm	≈ 240 mm
Размер 8: 240 mm	≈ 240 mm
Размер 9: 250 mm	≈ 240 mm
Размер 10: 260 mm	≈ 240 mm

Информация

Спазвайте информацията за продукта и инструкцията за употреба.



EN 455-1:2022

Медицински ръкавици за еднократна употреба - Част 1: Изисквания и изпитване за откриване на дупки

Тест за издръжливост на вода	Резултат
Непромокаемост	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Медицински ръкавици за еднократна употреба - Част 2: Изисквания и изпитване за физични свойства

Минимална дължина	Дължина
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Тест	Резултат
Сила на скъсване	Издържан

EN 455-3:2015

Медицински ръкавици за еднократна употреба - Част 3: Изисквания и изпитване за биологична оценка

Тест	Резултат
Остатък от пудра	< 2 mg
Подлежащи на извличане протеини	< 50 µg/g



Информация

i* Този продукт съдържа естествен каучуков латекс, който може да причини алергични реакции, включително анафилактични реакции.
 Еднозначно обозначение, дали ръкавицата е покрита с прах или не, е задължително.

EN 455-4:2009

Медицински ръкавици за еднократна употреба - Част 4: Изисквания и изпитвания за определяне срок на годност

Тест	Резултат
Срок на годност	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Стандарт за защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми - Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките за химически рискове.

Химикали за изпитване	Ниво
-----------------------	------





K	Натриев хлорид 40%	4
P	Водороден пероксид 30%	2
T	Формалдехид 37%	3

Информация

Време за проникване: Ниво 1 > 10 мин. | Ниво 2 > 30 мин. | Ниво 3 > 60 мин. | Ниво 4 > 120 мин. | Ниво 5 > 240 мин. | Ниво 6 > 480 мин.

Тази информация не съдържа данни за действителната продължителност на защитата на работното място и за различаване на смеси от чисти химикали.

Устойчивостта на химикали е оценена при лабораторни условия върху проби, които са били взети от вътрешната повърхност на ръката (изключение прави случаят, при който ръкавицата е 400 mm или по-дълга – в този случай е тестван също и маншетът), и се отнася единствено за тестваните химикали. Устойчивостта може да е различна, ако химикалът се използва в смес.

Препоръчва се проверка, дали ръкавиците са подходящи за предвиденото приложение, защото условията на работното място могат да се различават в зависимост от температурата, изтъкването и разлагането от тези при типовото изпитване.

Ако предпазни ръкавици вече са били използвани, поради промени на техните физически характеристики те могат да предлагат по-малка устойчивост срещу опасни химикали. В резултат на причинените при контакта с химикали разлагане, движения, издърпани конци, търкане и др. действителното време за приложение може значително да бъде намалено. При агресивни химикали разлагането може да е най-важния фактор, който трябва да се вземе под внимание при избора на устойчиви на химикали ръкавици.

При приложение ръкавиците трябва да се проверяват за всякакви повреди или дефекти.

Предназначено само за еднократна употреба, не използвайте повторно.

EN ISO 374-2:2019

Предпазни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми - част 2: Определяне устойчивостта на проникване

Тест	Резултат
Проверка за пропускане на въздух	Издържан

EN ISO 374-4:2019

Предпазни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми - част 4: Определяне устойчивостта на разлагане от химични продукти

Химикали за изпитване	Разлагане %
K Натриев хлорид 40%	-32,8
P Водороден пероксид 30%	-6,5
T Формалдехид 37%	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Стандарт за защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми – Част 5: Терминология и изисквания за характеристики при опасности от микроорганизми

Тест	Резултат
Защита от бактерии и гъби	Издържан
Защита от бактерии, гъби и вируси	Издържан

Информация

Устойчивостта срещу просмукване е била оценена при лабораторни условия и се отнася единствено за тестваните проби.

VO (EU) 2023/988

Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите

VO (EG) 1935/2004

Разпоредба за материали и предмети от синтетичен материал, които са предназначени за контакт с хранителни продукти

VO (EU) 10/2011

Разпоредба за материали и предмети от пластмаса, които са предназначени за контакт с хранителни продукти

Приложение

Инструкция за употреба

Преди употреба

Моля, обърнете внимание на това, че този продукт съдържа латекс. Моля, уверете се, че сте избрали подходящия продукт за Вашите нужди и области на приложение и спазвайте изискванията на съответните стандарти. При въпроси, моля обърнете се към доставчика на Вашата защитна ръкавица за еднократна употреба.

Моля, не носете защитната ръкавица за еднократна употреба, ако тя има повреди или вече е била използвана. Защитната ръкавица за еднократна употреба е предвидена за работа с леки химикали само при употреба за кратко време.

Боравене

Моля, изберете подходящия за Вас размер.

Защитната ръкавица за еднократна употреба предпазва покритата от нея област. Ако е необходима лична защита на други части на тялото или на дихателните пътища, добавете допълнителни продукти за ЛПС и използвайте само ЛПС, които са одобрени за предвидената употреба. Ако е необходима медицинска защита на други части на тялото или на дихателните пътища, добавете допълнителни медицински продукти и използвайте само медицински продукти, които са одобрени за предвидената употреба. Потребителят отговаря сам за правилната комбинация на допълнителни ЛПС или допълнителни медицински продукти и спазването на необходимите изисквания на нормите според предназначението. Вие определяте на собствена отговорност продължителността на употреба при

Информационен лист за продукта

wiroMICROGRIP PF



Съхраняването на медицинските изделия изисква специални условия. Предлаганите изделия са предназначени за употреба в медицинска среда. При съответното приложение с оглед на предпазното действие и комфорта при носене. В медицинската област използването е ограничено до един пациент. След замърсяване не може да бъде изключена промяна на посочените нива на ефективност. Също и по време на употреба проверявайте редовно, дали продуктът е невредим. Незабавно сменете повредена защитна ръкавица за еднократна употреба със здрава такава. При замърсявания или повреди защитната ръкавица за еднократна употреба трябва да бъде свалена и изхвърлена правилно.

Внимание: Спрете незабавно употреба при евентуални алергични реакции. Измийте ръцете си добре и при нужда потърсете медицинска помощ.

Указание за безопасност	Съдържащият се естествен латекс може да предизвика алергични реакции.
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замърсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно валидните национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.
Срок на годност	3 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.
Съхранение	Пазете от силна горещина, слънчево лъчение, студ, влага, озон, рентгенови лъчи и ултравиолетова светлина. Съхранявайте на сухо място. Температура на съхранение между 10 °C и 40 °C. Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.
Обратна проследимост	Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада. Информационен лист за продукта Версия 3 важи от партида 2617 +



Опаковка

Рециклиране	Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322. Моля, предайте опаковката за рециклиране.
-------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Вариант 1

Продажна единица	1000 броя/Кашон				
Ниво на опаковката 1	100 броя/Дозираща кутия				
Минимално количество за поръчка	1 Кашон				
Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	Размер (Ш x Д)	Допуск
	40351401	бяло	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	бяло	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	бяло	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	бяло	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.

Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поисквайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години. Не се поема отговорност за печатни грешки.

Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктовите спецификации. Промяна на продуктовите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.



Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wiromicrogrip PF | Version 3 | 27.05.2026



ЛАТЕКСНІ РУКАВИЧКИ

Без присипки | Мікротекстурована

і* Цей виріб має у своєму складі натуральний каучуковий латекс, який може викликати алергічні реакції, включаючи анафілактичні реакції.



PREMIUM



Виробник

Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
SRN	DE-MF-000004956
Торговельна марка	care & serve®

Повноваження

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцарія
--------	--

Опис продукту

Категорія	PREMIUM
Найменування продукту	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Латексні рукавички Без присипки Мікротекстурована i* Цей виріб має у своєму складі натуральний каучуковий латекс, який може викликати алергічні реакції, включаючи анафілактичні реакції.
Властивості продукту	Без присипки Мікротекстурована



Матеріал

Матеріал	Натуральний латекс
Товщина матеріалу	Пальці: ≈ 0,13 мм (± 0,01 мм) Долоня: ≈ 0,10 мм (± 0,01 мм) Манжета: ≈ 0,08 мм (± 0,01 мм)
Вага матеріалу	Розміри M ≈ 5,8 г/шт. (± 0,2 г)

Використання

Призначення	Одноразові захисні рукавички для запобігання перехресного забруднення між користувачами та пацієнтами при проведенні медичних досліджень та для запобігання контакту поверхні рук з небезпечними для здоров'я речовинами та сумішами або шкідливими біологічними речовинами. Ступінь захисту та максимальний час носіння складається з визначеного рівня навантаження для кожної випробуваної речовини.
Контакт з харчовими прод	Припустимий короточасний непрямий контакт з харчовими продуктами.
Сфера застосування	Рукавички використовуються для запобігання забрудненню рук медичного персоналу.
Група застосування	Використання дозволене лише фахівцям з відповідною освітою. Не придатна для користувача з алергією на латекс.
Група пацієнтів	Не підходить для пацієнтів з алергією на латекс. Щоб уникнути сенсibilізації, не рекомендується використовувати латексні рукавички при догляді за новонародженими.
Показання	Рукавички використовуються для запобігання забрудненню рук медичного персоналу, 1) при безпосередньому контакті з кров'ю або рідиною тіла, слизовими оболонками, нецільовою шкірою та іншим потенційно інфекційним матеріалом 2) при безпосередньому контакті з пацієнтами, які колонізовані або заражені патогенами, які передаються контактним шляхом, наприклад E. coli, MRSA, RSV або 3) під час поводження або дотику до помітно або потенційно забрудненого обладнання для догляду за пацієнтами та навколишніх поверхонь.
Протипоказання	Латекс може викликати алергічні реакції і сенсibilізацію.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання не стерильний
Обмеження	Визначення придатності продуктів care & serve® покладається виключно на користувача. Виробник не приймає на себе жодної відповідальності за неправильне використання засобів care & serve®. Не використовуйте цей виріб, якщо у вас є алергія на латекс. Якщо аналіз ризику виявив, що наведеного захисту НЕ достатньо, слід застосовувати захисний одяг з більш високими захисними характеристиками. Не підходить для використання з речовинами, що містять нафтопродукти або олію. Не придатні для пакування та зберігання харчових продуктів.
Примітка	Про всі серйозні випадки, пов'язані з цим продуктом, необхідно повідомляти виробника та відповідальні органи.



Галузі застосування	Лікарня Будинки престарілих в тому числі групи фахівців Лікарські практики Промисловість Фармацевтична промисловість Лабораторії Харчова промисловість НАССР Сервіс Гастрономія HoReCa Прибирання Гігієна Косметика Велнес Індустрія краси Дім + сад Сільське господарство Будівельна справа	
---------------------	--	--

Вказівка щодо охорони зд	Містить натуральний каучуковий латекс, що може викликати алергічні реакції типу IV та I. При подразненні шкіри або алергічних реакціях негайно припинити використання та звернутися за консультацією лікаря. Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних, мутагенних або репродуктивнотоксичних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення.
--------------------------	--

Стандарти

CE-маркування	Медичний виріб класу I відповідно до EU 2017/745 Індивідуальний захисний засіб категорії III відповідно до ЄС 2016/425 DE-MF-000004956 4051642-wiroMICROGRIPP-7N	CE 2777 MD CLASS I PPE CAT. III																
SRN																		
Basis UDI DI																		
	CE-маркування Маркування CE гарантує вільний обіг виробів та товарів у межах Європейської економічної спільноти. Виріб з маркуванням CE відповідає основним вимогам зазначених європейських розпоряджень.																	
EN ISO 21420:2020	Стандарт для захисних рукавичок - Загальні вимоги та методи випробувань <table><tr><th>Тест</th><th>Результат</th></tr><tr><td>pH-показник</td><td>Успішна</td></tr><tr><td>Рухомість</td><td>5</td></tr><tr><th>Мінімальна довжина</th><th>Довжина</th></tr><tr><td>Розмір 7: 230 мм</td><td>≈ 240 mm</td></tr><tr><td>Розмір 8: 240 мм</td><td>≈ 240 mm</td></tr><tr><td>Розмір 9: 250 мм</td><td>≈ 240 mm</td></tr><tr><td>Розмір 10: 260 мм</td><td>≈ 240 mm</td></tr></table> Інформація Звертайте увагу на інформацію щодо продукту та виконуйте інструкції з використання.	Тест	Результат	pH-показник	Успішна	Рухомість	5	Мінімальна довжина	Довжина	Розмір 7: 230 мм	≈ 240 mm	Розмір 8: 240 мм	≈ 240 mm	Розмір 9: 250 мм	≈ 240 mm	Розмір 10: 260 мм	≈ 240 mm	 www.wiros.de/PL
Тест	Результат																	
pH-показник	Успішна																	
Рухомість	5																	
Мінімальна довжина	Довжина																	
Розмір 7: 230 мм	≈ 240 mm																	
Розмір 8: 240 мм	≈ 240 mm																	
Розмір 9: 250 мм	≈ 240 mm																	
Розмір 10: 260 мм	≈ 240 mm																	
EN 455-1:2022	Рукавички медичні одноразового використання - Частина 1: Вимоги та випробування на непроникність <table><tr><th>Перевірка водонепроникності</th><th>Результат</th></tr><tr><td>щільність</td><td>AQL 1.5</td></tr></table>	Перевірка водонепроникності	Результат	щільність	AQL 1.5	AQL 1.5												
Перевірка водонепроникності	Результат																	
щільність	AQL 1.5																	
EN 455-2:2015	Рукавички медичні одноразового використання - Частина 2: Вимоги та випробування фізичних властивостей <table><tr><th>Мінімальна довжина</th><th>Довжина</th></tr><tr><td>XS - XL ≈ 240 мм</td><td>≈ 240 mm</td></tr><tr><th>Тест</th><th>Результат</th></tr><tr><td>Сила розтягування</td><td>Успішна</td></tr></table>	Мінімальна довжина	Довжина	XS - XL ≈ 240 мм	≈ 240 mm	Тест	Результат	Сила розтягування	Успішна									
Мінімальна довжина	Довжина																	
XS - XL ≈ 240 мм	≈ 240 mm																	
Тест	Результат																	
Сила розтягування	Успішна																	
EN 455-3:2015	Рукавички медичні одноразового використання - Частина 3: Вимоги та випробування для біологічної оцінки <table><tr><th>Тест</th><th>Результат</th></tr><tr><td>Залишки порошку</td><td>< 2 mg</td></tr><tr><td>Екстрактивні білки</td><td>< 50 µg/g</td></tr></table> Інформація i* Цей виріб має у своєму складі натуральний каучуковий латекс, який може викликати алергічні реакції, включаючи анафілактичні реакції. Обов'язково чітко вказувати, чи оброблена рукавичка порошком для посипання.	Тест	Результат	Залишки порошку	< 2 mg	Екстрактивні білки	< 50 µg/g	LATEX i*										
Тест	Результат																	
Залишки порошку	< 2 mg																	
Екстрактивні білки	< 50 µg/g																	
EN 455-4:2009	Рукавички медичні одноразового використання - Частина 4: Вимоги та випробування для визначення мінімального терміну придатності <table><tr><th>Тест</th><th>Результат</th></tr><tr><td>Термін служби</td><td>3</td></tr></table>	Тест	Результат	Термін служби	3													
Тест	Результат																	
Термін служби	3																	
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B	Стандарт для захисних рукавичок для захисту від небезпечних хімікалій та мікроорганізмів - частина 1: Термінологія та вимоги до робочих характеристик для хімічних ризиків. <table><tr><th>Хімікалії для випробування</th><th>Рівень</th></tr><tr><td>K Гідроксид натрію 40%</td><td>4</td></tr></table>	Хімікалії для випробування	Рівень	K Гідроксид натрію 40%	4	 KPT												
Хімікалії для випробування	Рівень																	
K Гідроксид натрію 40%	4																	



P	Перекис водню 30%	2
T	Формальдегід 37%	3

Інформація

Час прориву: Рівень 1 > 10 хв. | Рівень 2 > 30 хв. | Рівень 3 > 60 хв. | Рівень 4 > 120 хв. | Рівень 5 > 240 хв. | Рівень 6 > 480 хв.

Ця інформація не надає відомостей щодо фактичної тривалості захисту на робочому місці та щодо різниці між сумішами та чистими хімічними речовинами.

Стійкість до хімічних речовин оцінювалась в лабораторних умовах на зразках, взятих тільки з ділянки матеріалу на долоні (окрім випадків, коли рукавичка розміром 400 мм або довше - у цьому випадку також перевіряється манжета) і стосується лише перевірених хімікалій. Стійкість може бути різною, якщо хімічний засіб використовується в суміші.

Рекомендується перевіряти, чи підходять рукавички для передбаченого застосування, оскільки умови на робочому місці можуть відрізнятися від умов типового випробування в залежності від температури, зносу та деградації.

Якщо захисними рукавичками вже користувалися, вони можуть забезпечувати меншу стійкість до небезпечних хімічних речовин через зміни їх фізичних характеристик. В наслідок деградації, рухів, розтягування, тертя тощо при контакті з хімічними речовинами, фактичний час використання може значно скоротитися. При роботі з агресивними хімічними речовинами найважливішим фактором, який слід враховувати при виборі хімічно стійких рукавичок, може бути деградація.

Перед використанням необхідно перевірити рукавички на наявність недоліків чи дефектів.

Тільки для одноразового використання, не використовувати повторно.

EN ISO 374-2:2019

Захисні рукавички для захисту від небезпечних хімікалій та мікроорганізмів - частина 2: Визначення стійкості до проникнення

Тест	Результат
Перевірка на герметичність за допомогою повітря	Успішна

EN ISO 374-4:2019

Захисні рукавички для захисту від небезпечних хімікалій та мікроорганізмів - частина 4: Визначення стійкості до деградації, викликані хімікаліями

Хімікалії для випробування	Деградація %
K Гідроксид натрію 40%	-32,8
P Перекис водню 30%	-6,5
T Формальдегід 37%	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Стандарт для захисних рукавичок для захисту від небезпечних хімікалій та мікроорганізмів - частина 5: Термінологія та технічні вимоги до ризиків по відношенню до мікроорганізмів

Тест	Результат
Захист від бактерій та грибів	Успішна
Захист від бактерій, грибів та вірусів	Успішна



Інформація

Стійкість до проникнення оцінювалась в лабораторних умовах і стосується виключно досліджуваних зразків.

VO (EU) 2023/988

Регламент (ЕС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу

VO (EG) 1935/2004

Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами



VO (EU) 10/2011

Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами

Використання

Інструкція з використання

Перед використанням

Зверніть увагу, що цей продукт містить латекс. Переконайтесь, що обрали правильний продукт для своїх потреб та областей застосування, та дотримуйтесь критеріїв відповідних стандартів. При виникненні питань зв'яжіться з постачальником одноразових захисних рукавичок.

В жодному разі не носіть одноразові захисні рукавички, у яких були виявлені дефекти або якими вже користувалися. Одноразові захисні рукавички призначені лише для короткотривалого використання під час робіт з легкими хімічними речовинами.

Застосування

Оберіть розмір, що вам пасує.

Одноразові захисні рукавички захищають покриті ними ділянку. Якщо необхідно захистити інші частини тіла або дихальні шляхи, додатково використовуйте інші засоби індивідуального захисту, дотримуючись при цьому критеріїв стандартів, в залежності від застосування, та використовуйте лише 313, затверджені для конкретного використання. Якщо вам необхідний медичний захист інших частин тіла або дихальних шляхів, додатково використовуйте інші медичні вироби, використовуйте лише медичні вироби, затверджені для конкретного використання. Відповідальність за правильне поєднання додаткових засобів індивідуального захисту або додаткових медичних виробів та дотримання необхідних критеріїв стандартів, в залежності від застосування покладатиметься виключно на користувача. Ви під власну відповідальність визначаєте тривалість використання для конкретного застосування, враховуючи дієвість захисту та комфорт



носіння. У медичній галузі використання обмежується одним пацієнтом. Не виключено, що після забруднення вказаний рівень ефективності зміниться. Під час використання також регулярно перевіряйте, що виріб є неушкодженим. В разі пошкодження одноразових захисних рукавичок негайно замініть їх на нові. При забрудненні або пошкодженні одноразових захисних рукавичок їх слід зняти та утилізувати належним чином.

Увага: Негайно припиніть використовувати в разі виникнення алергічних реакцій. Ретельно вимийте руки і при необхідності зверніться за медичною допомогою.

Інструкція з безпеки	Натуральний латекс, що міститься в ньому, може спричинити алергічні реакції.
Утилізація	Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.
Термін служби	3 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.
Зберігання	Берегти від надмірного тепла, сонячного світла, морозу, вологи, озону, рентгенівських променів і ультрафіолету. Зберігати в сухому місці. Температура зберігання від 10°C до 40°C. Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.
Простежуваність	Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу. Технічний лист Версія 3 дійсний з партії 2617 +



Упаковка

Переробка	Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322. Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.
-----------	--



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Варіант 1

Торгова одиниця	1000 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	100 штук/коробка диспенсера				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Ш x Д)	Допустиме відхилення
	40351401	білий	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	білий	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	білий	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	білий	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.

Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірних правових розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, який більше ніж 2 роки.

Можливі друкарські та інші помилки.

Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.



Toote teabeleht

wiroMICROGRIP PF



LATEKSKINDAD

Puudrita | Mikrotekstuuriga

i* See toode sisaldab looduslikku latekskummit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone, sh anafülaktilist reaktsiooni.



PREMIUM



Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wirosMICROGRIP PF | Version 3 | 27.05.2026

125 / 134





Tootja

Ettevõtte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
SRN	DE-MF-000004956
Kaubamärk	care & serve®

Volitused

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveits
--------	---

Tootekirjeldus

Kategooria	PREMIUM
Toote nimetus	care & serve® PREMIUM wirosMICROGRIP PF Latekskindad Puudrita Mikrotekstuuriga i* See toode sisaldab looduslikku latekskummit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone, sh anafülaktilist reaktsiooni.
Toote omadused	Puudrita Mikrotekstuuriga



Materjal:

Materjal:	Looduslik lateks
Materjali tugevus	Sõrmed: $\approx 0,13 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Peopesa: $\approx 0,10 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$) Serv: $\approx 0,08 \text{ mm}$ ($\pm 0,01 \text{ mm}$)
Materjali kaal	Suurus M $\approx 5,8 \text{ g/St.}$ ($\pm 0,2 \text{ g}$)


Kasutamine

Kasutusotstarve	Ühekordselt kasutatav kaitsekinas meditsiiniliste uuringute käigus ristsaastumise vältimiseks kasutaja ja patsiendi vahel ning käte pinna kokkupuute vältimiseks tervistkahjustavate ainete ja segude või kahjulike bioloogiliste toimeainetega. Kaitseaste ja maksimaalne kandmisaeg sõltub iga testitud aine kindlaksmääratud vastupidavusklassist.
Kokkupuude toiduainetega	Lühiajaline kaudne kokkupuude toiduainetega on lubatud.
Rakendusvaldkond	Kindaid kasutatakse meditsiinitöötajate käte saastumise vältimiseks.
Rakendamisrühm	Kasutamine on lubatud ainult vastava koolitusega spetsialistidele. Ei sobi lateksiallergiaga kasutajatele.
Patsientide rühm	Ei sobi lateksiallergiaga patsientide jaoks. Lateksist kinnaste kasutamist vastuvõetavate hooldusel ei soovitata, selleks et sensibiliseerumist takistada.
Näidustus	Kindaid kasutatakse meditsiinitöötajate käte saastumise vältimiseks, 1) otseses kokkupuutes vere või kehavedelikega, limaskestadega, terve naha ja muu potentsiaalselt nakkusohutliku materjaliga 2) otseses kontaktis koloniseeritud või nakatunud patogeenidega, mis levivad kontakti teel, nt. B. VRE, MRSA, RSV või 3) nähtava või potentsiaalselt saastunud patsiendihoolidusvahendi ja seda ümbritsevate pindade käsitsemisel või puudutamisel.
Vastunäidustus	Lateks võib kutsuda esile allergilisi reaktsioone ja sensibiliseerumist.
Kasutusjuhised	Ühekordselt kasutatav toode mittesteriilne
Piirangud	care & serve®-i toodete kasutussobivuse kindlakstegemise eest vastutab ainult kasutaja. Tootja ei võta mis tahes vastutust care & serve®-i toodete väärkasutamise eest. Kui teil on teadaolevalt allergia lateksi vastu, ärge seda toodet kasutage. Kui riskialalüüsi käigus selgub, et loetletud kaitsest EI piisa, tuleb kasutada kõrgema kaitsetoimega kaitseriietust. Ei sobi kasutamiseks nafta ega õli sisaldavate ainete kasutamiseks. Ei sobi toiduainete pakkimiseks ega hoiustamiseks.
Märkus	Kõigist selle toote otseselt seotud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja vastutavaid ametiasutusi.
Kasutusvaldkonnad	Haigla vanadekodu jt erialased ringkonnad





Arstipraksised
Tööstus | farmaatsiatööstus
Labor
Toiduainetööstus
HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteem)
Teenindus | gastronoomia | HoReCa (hotellid, restoranid ja toitlustus)
Puhastus | hügieen
Kosmeetika | heaolu | ilutööstus
Kodu + aed | põllumajandus | ehitus

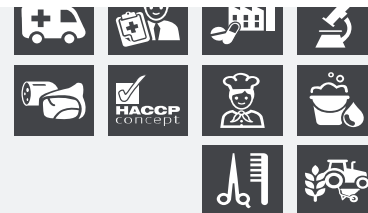

Tervisega seotud märkus Sisaldab looduslikust kautšukist lateksit, mis võib põhjustada IV- ja I-tüüpi allergiaid.
Nahaärrituste või allergiliste reaktsioonide korral lõpetage kohe kasutamine ja küsige arstilt nõu.
Praeguse tehnika taseme kohaselt ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid, mutageenseid ega reproduktiivtoksilisi aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt.

Standardid

CE-märgistus Klass I meditsiinivahendid vastavalt määrusele EL 2017/745
SRN Isiklik III kategooria kaitsevarustus vastavalt määrusele EÜ 2016/425.
Basis UDI DI DE-MF-000004956
4051642-wiroMICROGRIPP-7N

CE-märgistus
CE-märgis garanteerib toodete ja kaupade vaba liikumise Euroopa



EN ISO 21420:2020

Kaitsekindaid puudutav standard - üldnõuded ja katsemeetodid

Katse	Tulemus
pH väärtus	Läbitud
Liikuvus	5
Vähim pikkus	Pikkus
Suurus 7: 230 mm	≈ 240 mm
Suurus 8: 240 mm	≈ 240 mm
Suurus 9: 250 mm	≈ 240 mm
Suurus 10: 260 mm	≈ 240 mm

Teave
Järgige tooteteavet ja kasutusjuhendit.



EN 455-1:2022

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 1: Nõuded aukude puudumisele ja selle katsetamine

Veekindluskatse	Tulemus
Tihedus	AQL 1.5



EN 455-2:2015

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 2: Nõuded füüsikaliste omaduste ja katsetamine

Vähim pikkus	Pikkus
XS – XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Katse	Tulemus
Rebenemistugevus	Läbitud

EN 455-3:2015

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 3: Bioloogilise hindamise nõuded ja katsetamine

Katse	Tulemus
Puudri jäägid	< 2 mg
Ekstraheeritavad valgud	< 50 µg/g



Teave
i* See toode sisaldab looduslikku latekskummit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone, sh anafülaktilist reaktsiooni.
Selge märgistus, kas kinnas on puudriga või puudrivaba, on kohustuslik.

EN 455-4:2009

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 4: Säilivusaja määramise nõuded ja testimine

Katse	Tulemus
Säilivus	3

EN ISO 374-1:2016 +
A1:2018 TYPE B

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvaid kindaid puudutav standard. Osa 1 Terminoloogia ja toimivusnõuded keemiliste ohtude puhul

Katsekemikaal	Tase
K Naatriumhüdroksiid 40%	4
P Vesinikperoksiid 30%	2
T Formaldehüüd 37%	3



Teave

Läbitungimise aeg: Tase 1 > 10 min | Tase 2 > 30 min | Tase 3 > 60 min | Tase 4 > 120 min | Tase 5 > 240 min | Tase 6 > 480 min

See teave ei sisalda andmeid tegeliku kaitse kestuse kohta töökohal ega segude ning puhaste kemikaalide eristamise kohta.

Vastupanu kemikaalide suhtes on hinnatud laboritingimustes proovide abil, mida on võetud üksnes peopesalt (välja arvatud juhul, kui kinnas on 400 mm või pikem. Sellisel juhul võetakse proov käiselt), ja see hõlmab üksnes kontrollitud kemikaale. Vastupanu kemikaalide suhtes võib erineda, kui neid kasutatakse segus.

Soovitame üle kontrollida, kas kinnas sobib ettenähtud kasutamiseks, kuna tingimused töökohas sõltuvad temperatuurist, hõõrdumisest ja seisundi halvenemisest, mis omakorda mõjutavad tüübikatset.

Kui kaitsekindaid on juba kasutatud, võivad need oma füüsikaliste omaduste muutuste tõttu pakkuda väiksemat vastupanu ohtlike kemikaalide vastu. Kemikaalidega kokkupuutest tingitud seisundi halvenemise, liigutuste, pingutuse, hõõrdumise jms tõttu võib tegelik kasutusaeg oluliselt väheneda. Agressiivsete kemikaalide korral võib seisundi halvenemine olla oluline tegur, mida tuleb kemikaalide eest kaitsvate kinnaste valikul silmas pidada.

Enne kasutamist tuleb kindad mis tahes defekti või puuduse osas üle kontrollida.

Mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks, ei tohi korduvalt kasutada.

EN ISO 374-2:2019

Kaitsekindad kaitseks ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 2: Vastupidavuse määramine sisseimbumisele

Katse	Tulemus
Õhulekke kontroll	Läbitud

EN ISO 374-4:2019

Kaitsekindad kaitseks ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 4: Vastupanu kindlaksmääramine kemikaalidest tingitud seisundi halvenemise korral

Katsekemikaal	Seisundi halvenemine %
K Naatriumhüdroksiid 40%	-32,8
P Vesinikperoksiid 30%	-6,5
T Formaldehüüd 37%	-13,7

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Kemikaalide ja mikroorganismide eest kaitsvaid kindaid puudutav standard. Osa 5 Terminoloogia ja toimivusnõuded mikroorganismidest põhjustatud ohtude puhul

Katse	Tulemus
Kaitse bakterite ja seente vastu	Läbitud
Kaitse bakterite, seente ja viiruste vastu	Läbitud



Teave

Läbitamiskindlust hinnati laboritingimustes ja see hõlmab üksnes kontrollitud proove.

VO (EU) 2023/988

ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta

VO (EG) 1935/2004

Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta



VO (EU) 10/2011

Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta

Kasutamine

Kasutusjuhend

Enne kasutamist

Arvestage, et see toode sisaldab lateksit. Veenduge, et olete valinud oma vajaduste ja kasutusvaldkonnaga sobiva toote ning järgige asjakohaste standarditega sätestatud ettekirjutusi. Küsimuste korral võtke ühendust oma ühekordselt kasutatavate kaitsekindaste tarnijaga.

Ärge kasutage ühekordselt kasutatavat kaitsekindast, kui sellel on puudusi või seda on juba kasutatud. Ühekordselt kasutatavad kaitsekindad on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks, kui töötatakse õrnatoimeliste kemikaalidega.

Kasutamine

Valige endale sobiv suurus.

Ühekordselt kasutatav kaitsekindas kaitseb sellega kaetud ala. Kui kaitset vajavad teised kehaosad või hingamisteed, kasutage täiendavaid isikukaitsevahendeid ja kasutage ainult selliseid isikukaitsevahendeid, mis on konkreetselt kasutusotstarbeks lubatud. Kui meditsiinilist kaitset vajavad teised kehaosad või hingamisteed, kasutage täiendavaid meditsiinitooteid ja kasutage ainult selliseid meditsiinitooteid, mis on konkreetselt kasutusotstarbeks lubatud. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt õige kombinatsiooni eest täiendavate isikukaitsevahendite või täiendavate meditsiinitoodetega ja iga kasutusotstarbe kohta käivatest standarditest kinnipidamise eest. Vastutate igal kasutamisel ainuisikuliselt kasutuskestuse eest, võttes arvesse kaitsetoimet ja kandmismugavust. Meditsiiniivaldkonnas on kasutamine piiratud ühe patsiendiga. Saastumise korral võib vastupidavus etteantud näitajatest erineda. Kontrollige ka toote kasutamise ajal regulaarselt, et see poleks kahjustunud. Asendage rikunud ühekordselt kasutatav kaitsekindas viivitamatult uue rikkumata kindaga. Kui ühekordselt kasutatav kaitsekindas on määrdunud või kahjustunud, võtke see käest ja utiliseerige nõuetekohaselt.

Tähelepanu! Võimalike allergiliste reaktsioonide tekkimisel lõpetage kohe kasutamine. Peske käsi hoolikalt ja pöörduge vajadusel arsti poole.

Ohutusjuhis

Sisaldub looduslik lateks võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kasutusest kõrvaldamine

Kasutamata ja saastumata tooted võib põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.



Säilivus	3 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.
Hoiustamine	Kaitske tugeva kuumuse, päikese kiirguse, pakase, niiskuse, osooni, röntgenikiirte ja ultravioletse valguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Ladustamistemperatuur 10 °C ja 40 °C vahemikus. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.
Jälgitavus	Partiipõhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 3 Kehtib alates partiist 2617 +



Pakendamine

Taaskasutus	Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.
-------------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Variant 1

Müügiühik	1000 Tk/Kartong
Pakkimistasand 1	100 Tk/Jaoturkarp
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong

Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (L x P)	Hälve
	40351401	valge	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	valge	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	valge	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	valge	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Tootenumber	Unit of Use UDI	Pakkimistasand 1 UDI	Pakkimistasand 2 UDI	Kartong UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvanded on sihtväärtused ja võivad erineda.

Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tootemaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.

Sisestusvead ja vead on reserveeritud.

Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaalkoodetega.



LATEKSIKÄSINEET

Puuteroimaton | Mikroteksturoitu

i* Tämä tuote sisältää luonnonkautsulateksia, joka voi laukaista allergisia reaktioita mukaan luettuna anafylaktiset reaktiot.



PREMIUM





Valmistaja

Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
SRN	DE-MF-000004956
Tavaramerkki	care & serve®

Valtuutukset

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Sveitsi
--------	--

Tuotekuvaus

Kategoria	PREMIUM
Tuotenimike	care & serve® PREMIUM wiroMICROGRIP PF Lateksikäsineet Puuteriimaton Mikroteksturoitu i* Tämä tuote sisältää luonnonkautsulateksiä, joka voi laukaista allergisia reaktioita mukaan luettuna anafylaktiset reaktiot.
Tuotteen ominaisuudet	Puuteriimaton Mikroteksturoitu



Materiaali

Materiaali	Luonnonlateksi
Materiaalivahvuus	Sörmed: $\approx 0,13$ mm ($\pm 0,01$ mm) Peopesa: $\approx 0,10$ mm ($\pm 0,01$ mm) Serv: $\approx 0,08$ mm ($\pm 0,01$ mm)
Materiaalin paino	Koko M $\approx 5,8$ g/kpl ($\pm 0,2$ g)

Käyttö

Käyttötarkoitus	Kertakäyttöiset suojakäsineet käyttäjien ja potilaiden välisen ristikontaminaation estämiseksi suoritettaessa lääketieteellisiä tutkimuksia sekä käsien pinnan ja vaarallisten aineiden ja seosten tai haitallisten biologisten tehoaineiden välisen kosketuksen estämiseen. Suojaustaso ja enimmäiskäyttöaika määräytyvät määritetyn suojautason mukaan testatusta aineesta riippuen.
Elintarvikekosketus	Lyhytaikainen, epäsuora kosketus elintarvikkeiden kanssa on sallittu.
Käyttöalue	Käsineitä käytetään hoitohenkilökunnan käsien saastumisen estämiseen.
Käyttöryhmä	Käyttö on rajoitettu asianmukaisesti koulutetuille ammattilaisille. Ei sovellu luonnonkumille (lateksi) allergisille käyttäjille.
Potilasryhmä	Ei sovellu lateksille allergisille potilaille. Vastasyntyneiden hoidossa lateksikäsineiden käyttöä ei suositella herkistymisen estämiseksi.
Indikaatiot	Käsineitä käytetään hoitohenkilökunnan käsien saastumisen estämiseen, 1) suorassa kosketuksessa veren tai kehon nesteiden, limakalvojen, ehjän ihon ja muun mahdollisesti tarttuvan materiaalin kanssa 2) suorassa kosketuksessa potilaiden kanssa, jotka ovat siirtokunnassa tai infektioituneet taudinaiheuttajilla, jotka leviävät kontaktireitillä, esim. B. VRE, MRSA, RSV tai 3) käsitellessäsi tai kosketettaessa näkyvästi tai mahdollisesti saastuneita potilaan hoitolaitteita ja ympäröiviä pintoja.
Vasta-aiheet	Lateksi voi aiheuttaa allergisia reaktioita ja herkistymistä.
Käyttöohje	Kertakäyttötuote Ei steriili
Rajoitukset	Käyttäjää on yksin vastuussa päätöksestä care & serve®-tuotteiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa care & serve®-tuotteiden epäasianmukaisesta käytöstä. Älä käytä tuotetta, mikäli tiedossa on lateksiallergia. Jos riskianalyysi on johtanut tulokseen, että tarjottu suojaa EI riitä, on käytettävä korkeamman tason suojauksen tarjoavaa suojavaatetusta. Ei sovellu käyttöön petrolin tai öljypitoisten ainesosien kanssa. Ei sovellu elintarvikkeiden pakkaamiseen ja varastointiin.
Ohje	Kaikista vakavista tapahtumista, jotka liittyvät suoraan tähän tuotteeseen, on ilmoitettava valmistajalle ja vastuuviranomaisille.



Käyttöalueet	Sairaalat Vanhainkodit Muut alan yritykset Lääkäriasemat Teollisuus Lääketeollisuus Laboratoriot Elintarvikkeiden jalostus HACCP Palveluala Gastronomia HoReCa Puhdistus Hygienia Kosmetiikka Hyvinvointi Kauneusteollisuus Rakennukset ja pihat Maatalous Rakennusala	
Terveystietoa	Sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa tyypin IV ja tyypin I allergioita. Ihoärsytysten tai allergisten reaktioiden tapauksessa lopeta käyttö heti ja neuvotte lääkärisi kanssa. Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisiä, mutageenisia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti.	

Standardit

CE-merkintä

SRN

Basis UDI DI

Asetuksen EU 2017/745 mukainen lääkinnällinen tuote

EU 2016/425 -standardin luokan III henkilönsuojain

DE-MF-000004956

4051642-wiroMICROGRIPP-7N

CE-merkintä

CE-merkintä takaa tuotteiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden Euroopan yhteisössä. CE-merkitty tuote täyttää sovellettavien eurooppalaisten määräysten perusvaatimukset.

EN ISO 21420:2020

Standardi Suojakäsineet – Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

Testi	Tulos
ph-arvo	Läpäisty
Liikkuvuus	5
Vähimmäispituus	Pituus
Koko 7: 230 mm	≈ 240 mm
Koko 8: 240 mm	≈ 240 mm
Koko 9: 250 mm	≈ 240 mm
Koko 10: 260 mm	≈ 240 mm

Tiedot

Noudata tuotetietoja ja käyttöohjetta.

EN 455-1:2022

Terveystuotteen käytettävät kertakäyttöiset käsineet – osa 1: Tiiviyttä koskevat vaatimukset ja testaaminen

vedenpidätystesti	Tulos
Tiiviys	AQL 1.5

AQL

1.5

EN 455-2:2015

Terveystuotteen käytettävät kertakäyttöiset käsineet – osa 2: Fysikaalisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset ja testit

Vähimmäispituus	Pituus
XS - XL ≈ 240 mm	≈ 240 mm
Testi	Tulos
repeämisvoima	Läpäisty

EN 455-3:2015

Terveystuotteen käytettävät kertakäyttöiset käsineet – osa 3: Biologisen arvioinnin vaatimukset ja testaus

Testi	Tulos
puuterijäämät	< 2 mg
uutettavat proteiinit	< 50 µg/g

Tiedot

i* Tämä tuote sisältää luonnonkautsulateteksia, joka voi laukaista allergisia reaktioita mukaan luettuna anafylaktiset reaktiot. Selvä merkintä siitä, onko käsine puuteritoimaton vai puuteritoimaton, on pakollinen.

EN 455-4:2009

Terveystuotteen käytettävät kertakäyttöiset käsineet – osa 4: Vaatimukset ja testit säilymisajan määrittämiseksi

Testi	Tulos
Säilyvyysaika	3

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B

Standardi Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet – Osa 1: Kemikaaliriskien termit ja vaatimukset.

Testikemikaali	Taso
K Natriumhydroksidi 40 %	4

KPT

CE

2777

MD

CLASS I

PPE

CAT. III

www.wiros.fi



	P Vetyperoksidi 30 %	2
	T Formaldehydi 37 %	3
Tiedot Läpäisy aika: taso 1 > 10 min taso 2 > 30 min taso 3 > 60 min taso 4 > 120 min taso 5 > 240 min taso 6 > 480 min Nämä tiedot eivät Kemikaalien kestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain käsineiden kämmenosasta otetuista näytteistä (lukuun ottamatta käsineitä, joiden pituus on vähintään 400 mm, jolloin myös ranneke on testattu), ja arvot koskevat vain testattuja kemikaaleja. Kemikaalikestävyys voi olla eri, mikäli kemikaalia käytetään seoksessa. On suositeltavaa tarkistaa, että käsineet soveltuvat aiotuun käyttötarkoitukseen, sillä työskentelypaikan olosuhteet saattavat poiketa tyypitetistä lämpötilan, hankauksen ja degradaation suhteen. Jos suojakäsineitä on jo käytetty, ne saattavat antaa heikomman suojan vaarallisia kemikaaleja vastaan fysikaalisten ominaisuuksiensa muuttumisen takia. Kemikaalikosketuksessa syntyvä degradaatio, liikkeet, takertuminen, hankaus jne. voivat lyhentää todellista käyttöaikaa huomattavasti. Syövyttävien kemikaalien kohdalla degradaatio voi olla tärkein huomioitava tekijä valittaessa kemikaaleja kestäviä käsineitä. Ennen käyttöä on tarkistettava, että käsineissä ei ole vikoja tai puutteita. Tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöiseksi, älä käytä uudelleen.		
EN ISO 374-2:2019	Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet – osa 2: läpäisevyys vastustuskyvyn määrittäminen	
	Testi	Tulos
	Ilmalla suoritettava vuototesti	Läpäisty
EN ISO 374-4:2019	Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet – osa 4: kemiallisen vaurioitumisen määrittäminen	
	Testikemikaali	Degradaatio-%
	K Natriumhydroksidi 40 %	-32,8
	P Vetyperoksidi 30 %	-6,5
	T Formaldehydi 37 %	-13,7
EN ISO 374-5:2016 VIRUS	Standardi Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet – Osa 5: Mikro-organismitestien	
	Testi	Tulos
	Suojaus bakteereja ja sieniä vastaan	Läpäisty
	Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan	Läpäisty
	Tiedot Penetraation vastustuskyky arvioitiin laboratorio-olosuhteissa ja koskee vain testattuja näytteitä.	
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988	
VO (EG) 1935/2004	Muovista valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja esineitä koskeva määräys	
VO (EU) 10/2011	Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista	

Käyttö

Käyttöohje	Ennen käyttöä Huomioi, että tämä tuote sisältää lateksia. Varmista, että olet valinnut tarpeisiisi ja käyttökohteisiisi sopivan tuotteen ja noudata sovellettavien standardien vaatimuksia. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys kertakäyttöisten suojakäsineiden toimittajaan. Älä käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä, jos niissä on puutteita tai jos niitä on jo käytetty. Kevyiden kemikaalien kanssa työskennellessä kertakäyttöiset suojakäsineet on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Käsittely Valitse sinulle sopiva koko. Kertakäyttöiset suojakäsineet suojaavat peittämänsä aluetta. Jos kehon muut osat tai hengitystiet on tarpeen suojata, käytä lisäksi muita henkilönsuojaintuotteita. Käytä vain henkilönsuojaimia, jotka on tarkoitettu kyseiseen käyttötarkoitukseen. Jos kehon muut osat tai hengitystiet on tarpeen suojata, käytä lisäksi muita terveydenhuollossa käytettäväksi tarkoitettuja tuotteita. Käytä vain sellaisia terveydenhuollossa käytettäväksi tarkoitettuja tuotteita, jotka on hyväksytty kyseiseen käyttötarkoitukseen. Käyttäjän on yksin vastuussa muiden henkilönsuojaimien tai terveydenhuollossa käytettäväksi tarkoitettujen tuotteiden oikeasta yhdistelmästä sekä standardien olennaisten määräysten noudattamisesta käyttötarkoituksesta riippuen. Vastaa itse käyttöajan määrittämisestä kutakin käyttötarkoitusta varten ottamalla huomioon suojavaikutuksen ja käyttömukavuuden. Terveydenhuollon alalla käyttö on rajattu potilaaseen. Kontaminoitumisen jälkeen ilmoitettujen suoritusasteiden muuttumista ei voida sulkea pois. Tarkista myös käytön aikana säännöllisesti, että tuote on vahingoittumaton. Vaihda vahingoittuneet kertakäyttöiset suojakäsineet välittömästi ehjiin. Jos kertakäyttöinen suojakäsine likaantuu tai vahingoittuu, se tulee riisua kädestä ja hävittää asianmukaisesti. Huomio: Käyttö lopetettava välittömästi mahdollisten allergisten reaktioiden esiintyessä. Pese kädet huolellisesti ja hakeudu tarvittaessa terveydenhuoltoon.
Turvallisuushojeet	Tuotteen sisältämä luonnonlateksi voi aiheuttaa allergisia reaktioita.



Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumattavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.
Säilyvyysaika	3 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.
Varastointi	Suojattava kuumuudelta, auringonsäteilyltä, pakkaselta, kosteudelta, otsonilta, röntgensäteiltä ja UV-valolta. Säilytettävä kuivassa. Varastointilämpötila: 10 °C ... 40 °C. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaikaa.
Jäljitettävyy	Eräkohtainen jäljitettävyy tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 3 voimassa alkaen erästä 2617 +



Pakkaus

Kierrätys	Lisensioitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen.
-----------	---



www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/handschuhe/latex-handschuhe/wiromicrogrip-pf/
-----	---

Vaihtoehtot 1

Myyntiyksikkö	1000 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	100 Kappale/Annostelulaatikko				
Minimitilauusmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (L x P)	Toleranssi
	40351401	valkoinen	S	≈ 80 x 240 mm	± 5 mm
	40351402	valkoinen	M	≈ 90 x 240 mm	± 5 mm
	40351403	valkoinen	L	≈ 100 x 240 mm	± 5 mm
	40351404	valkoinen	XL	≈ 110 x 240 mm	± 5 mm
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use UDI	Pakkaustaso 1 UDI	Pakkaustaso 2 UDI	Pahvilaatikko UDI
	40351401	4051642005966	4051642150239	-----	4051642650234
	40351402	4051642005973	4051642150246	-----	4051642650241
	40351403	4051642005980	4051642150253	-----	4051642650258
	40351404	4051642005997	4051642150260	-----	4051642650265

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.

Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.

Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.